



medical solutions

Gesamtkatalog

Wechseldrucksysteme **Patientenlifter**
Schaumstoffsysteme Hybridsysteme
Kompressionstherapie Schulungen
Service Chemothermische Aufbereitung
Transfer- und **Positionierungshilfen**



Inhaltsverzeichnis

Intermittierende Kompressionstherapie

Variymph 12 Pro.....	7-12
----------------------	------

Wechseldrucksysteme

SLK Relax.....	14
SLK I.....	15
SLK II.....	16
SLK III.....	17
SLK IV.....	18
Pain & Therapy.....	19
KiddyCare.....	20
FreeChair Professional.....	21

XXL Schwerlast-Lagerungssysteme

Schwerlastbetten.....	24
SLK IV XXL 90 x 200 cm.....	25
SLK IV XXL 120 x 200 cm.....	26
XXL Foam.....	27
SLK Frame.....	28

Schaumstoff- und Hybridsysteme

NeoCare Basic.....	30
NeoCare I.....	30
NeoCare II.....	31
FoamCare Comfort.....	32
ProfiSoft Comfort.....	33
ViscoCare Comfort.....	34
Silver Sleep.....	35
Ersatzbezüge.....	36
GreenCare.....	37
BlueCare.....	38

mobile Patientenlifter

SLK Carry 185 Classic.....	42
SLK Carry 185 Pro.....	43
SLK Carry 185 Pro L.....	44
Blue Flyer Compact.....	45
Blue Flyer Plus.....	46
Flyer Plus.....	47
Flyer XL.....	48

mobile Aktivlifter

Blue Wayup.....	50-51
Wayup.....	52-53
Easylev.....	54-55
Wayup XL.....	56
Technische Daten Patientenlifter & Aktivlifter.....	58-59

Gurte für Patientenlifter & Aktivlifter

Universalgurt.....	63
Universalgurt mit Kopfstütze.....	64
Universalgurt Bad.....	65
Universalgurt Bad mit Kopfstütze.....	66
Quick Transfer- und Toilettengurt.....	67
Toilettengurt.....	68
Hammock Universalgurt.....	69
Hammock Badegurt.....	70
Hammock Sitzschalengurt.....	71
Comfort-Liegegurt.....	72
Comfort-Liege-Badegurt.....	73
Rücken-Fix-Gurt.....	74
Rücken-Fix-Badegurt.....	75
Maxi-Gurt.....	76
Aktivgurt.....	78
Spezial Aktivgurt.....	79
Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel.....	80
Technische Daten Liftergurte.....	82-83

Zubehör

Lifterwaage.....	86
eichfähige Lifterwaage.....	86
ergolet Wandladestation.....	86
Carry Wandladestation.....	87
Wandladestation.....	87
Carry 2-Punkt-Bügel.....	87
Carry 4-Punkt-Bügel.....	87
Carry 4-Punkt-Bügel Basic.....	88
Twin-Bügel.....	88
Twin-Bügel-Compact.....	88
anklettbare Kopfstütze.....	89
adaptierbare Kopfstütze mit Verstärkung.....	89
Gewichtetrolley 220 kg.....	90
Gewichtetrolley 440 kg.....	91

Deckenlifter

Luna Portable.....	95
Luna Stationär.....	96
Luna Room to Room.....	97
Luna Twin Set.....	98
Luna Mover.....	99
Mobile Flex.....	100

Transfer- und Positionierungshilfen

Quick Stand.....	102
Quick Hold.....	103
Quick Slide.....	104
Quick Slide mit Schlaufen.....	105
Easy Bauchgurt.....	106
Easy Hosengurt.....	107
Easy Weste.....	108

Chemothermische Aufbereitung

Hygienecenter Dortmund.....	110
-----------------------------	-----

Ihre Spezialisten für Dekubitus & Kompressionstherapie sowie Patientenliftsysteme

Wer wir sind

Die SLK Vertriebsgesellschaft mbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Dortmund. Unser Produktportfolio umfasst ein breites Spektrum an Hilfsmitteln gegen Dekubitus, Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression, Patientenliftern, Transfer- und Positionierungshilfen und Produkten für bariatrische Patienten.

Was wir wollen

Bei der Entwicklung unserer Produkte wird Wert darauf gelegt, dass therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Gerade bei Medizinprodukten ist eine schnelle Lieferung und ein umfangreicher Service ein wichtiger Faktor, der oft über den Behandlungserfolg entscheidet. Aus diesem Grund werden unsere Hilfsmittel standardmäßig am Tag der Bestellung versendet. Für spezielle Fälle steht unser bundesweiter Außendienst den Fachhandelspartnern auch vor Ort und beim Patienten zur Seite.

In vielen europäischen Ländern ist SLK durch Stützpunkthändler vertreten. Regelmäßige Schulungen und Trainingsprogramme sichern einen hohen Standard bei der Versorgung der Patienten.

Produktportfolio

Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Lagerungs- und Kompressionssysteme sowie Patientenlifter, Transfer- und Positionierungshilfen für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige und besonders robuste Materialien aus.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Apparative Intermittierende Kompressionstherapie



medical solutions

Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

Der Einsatz von Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) ist in der modernen medizinischen Versorgung von Lymphödemen und Lipödemen Standard geworden. Ein leistungsstarker Kompressor mit einer intelligenten Steuerung sorgt für einen effektiven und gleichzeitig schonenden Abtransport von Flüssigkeit. Der Druck und die Therapiedauer kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden. Durch die überzeugenden Behandlungserfolge setzt die Varilymph 12 Pro neue Maßstäbe in der apparativen Entstauungstherapie.

Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie geben die Indikation und Kontraindikation für den Einsatz der Geräte zur AIK an:

Indikationen

- Thromboembolieprophylaxe
- Ulcus cruris venosum mit fehlender Heilungstendenz trotz konsequenter Kompressionstherapie mittels Strumpfsystemen oder Kompressionsverbände
- chronische venöse Insuffizienz Stadium C4b bis C6 (CEAP Klassifikation)
- Extremitätenlymphödem, additiv zur komplexen physikalischen Entstauungstherapie
- periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- posttraumatische Ödeme
- therapieresistente venöse Ödeme
- Lipödem
- Hemiplegie mit sensorischer Störung und Ödem

Kontraindikationen

absolute Kontraindikationen

- dekompensierte Herzinsuffizienz
- ausgedehnte Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht
- akutes Erysipel
- akute Phlegmone
- Kompartmentsyndrom
- schwere, nicht eingestellte Hypertonie
- okkludierende Prozesse im Lymphabstrombereich

relative Kontraindikationen


- ausgedehntes, ggf. offenes Weichteiltrauma der Extremitäten
- ausgeprägte Neuropathie der Extremitäten
- blasenbildende Dermatosen



Apparative Intermittierende Kompressionstherapie


Funktionsprinzip

Nach dem Start der Therapie werden die 12 Kammern der Behandlungsmanschette angesteuert und mit Luft befüllt (im Bild blau dargestellt).

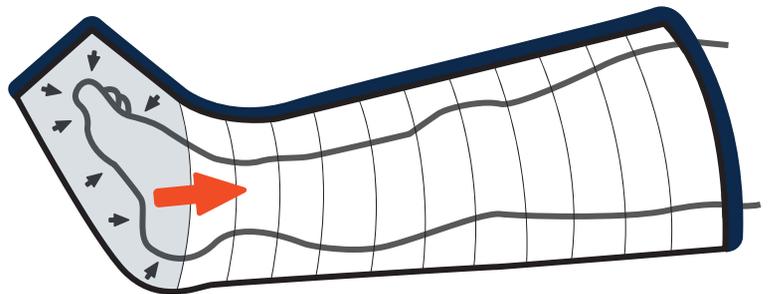

Die Dauer der Befüllung hängt neben der gewählten Befüllungszeit auch von der Anatomie des Patienten und den zu versorgenden Körperteilen ab.


Im Verlauf der Therapie werden nach und nach alle weiteren Kammern der Behandlungsmanschette befüllt. Durch diesen Prozess wird Gewebeflüssigkeit in proximaler Richtung abtransportiert (roter Pfeil) und so das Ödem reduziert.

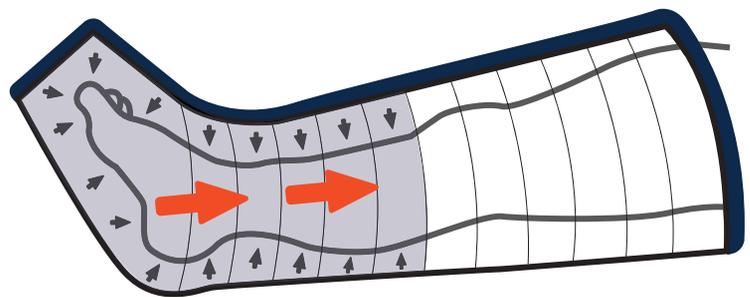

Der Druck kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden, dieser sollte durch den behandelnden Arzt vorgegeben werden.

Sind alle Kammern gefüllt, entweicht je nach eingestellter Zeit, die Luft aus allen Kammern der Manschette gleichzeitig.

Der Zyklus beginnt nach einer Pause jeweils wieder von vorne. Ein Rückstau von Flüssigkeit wird somit ausgeschlossen.

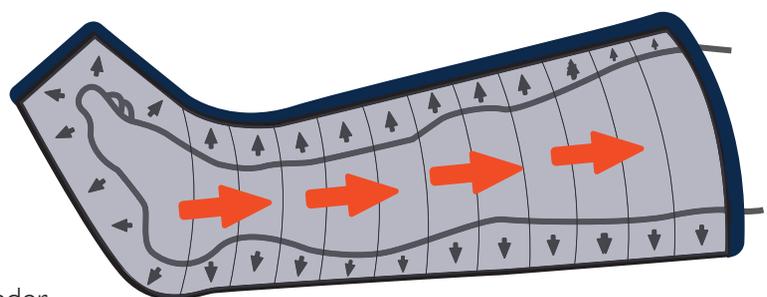

Physiologische Grundlagen

Das lymphatische System

Die Lymphgefäße verlaufen entlang der Blutgefäße und münden über die obere und untere Hohlvene in den Blutkreislauf.

Das lymphatische System hat folgende Aufgaben:

- Transport lymphpflichtiger Substanzen aus dem Interstitium in das venöse Blutgefäßsystem (Eiweiße, Fette und Zellen)
- Regulation des Flüssigkeitsvolumens zwischen den Zellen (Lymphe)
- als Bestandteil des Immunsystems Mitwirkung an der körpereigenen Abwehr

Der Transport der Lymphe in den Lymphgefäßen erfolgt einerseits durch die rhythmische Kontraktion der Gefäßmuskulatur, wobei Lymphklappen den Rückstrom verhindern, andererseits unterstützt die Bewegung der Skelettmuskulatur den Lymphfluss deutlich.

Bei Störungen im lymphatischen System können sich Lymphödeme bilden. Hierbei handelt es sich um eine sichtbare und tastbare Flüssigkeitsansammlung im Zellzwischenraum (Interstitium).

Der venöse Blutkreislauf

Die Venen führen sauerstoffarmes Blut zurück zum Herzen, wo es anschließend im Lungenkreislauf wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Ein spezielles Pumpensystem, die Muskelpumpe, sorgt dafür, dass das Blut gegen die Schwerkraft zum Herzen befördert wird.

Beim Gehen oder Bewegen kommt es in der Muskulatur zu einem Wechsel zwischen Kontraktion und Entspannung, wodurch das Blut aus den Extremitäten (Beine und Arme) zum Herzen gepumpt wird.

Um einen Rückfluss des Blutes zu verhindern, besitzen die Venen Klappen, welche als Rücklaufventile dienen. Störungen des venösen Rückflusses (chronische venöse Insuffizienz) führen zu Ödembildung, Hautveränderungen und im weiteren Verlauf zu offenen Stellen der Haut, dem sogenannten Ulcus cruris.



Der richtige Einsatz der Behandlungsmanschetten

Für den Erfolg der Kompressionstherapie ist die Verwendung der passenden Behandlungsmanschetten entscheidend.

Die richtige Manschette

- muss dem Bein- oder Armumfang angepasst sein
- sollte ausreichend lang sein
- bei Lymphödemen und Lipödemen (die das ganze Bein umfassen bzw. die bis oberhalb des Beckenkamms reichen) sollte die Manschette den Beckenbereich umschließen. Hier ist eine Kompressionshose von Vorteil. Durch die zusätzliche Stimulanz im Leisten-, Bauch- und Beckenbereich wird eine verbesserte Entstauung erzielt.

Für eine optimale Passform sind die Behandlungsmanschetten individuell anpassbar. Zur Verfügung stehen: Bein-, Hose-, Jacke- und Arm-Schultermanschetten mit Erweiterungssätzen.

Kompressionshose

mit verstellbarem Fußteil

- normal Artikel-Nr.: **4031**
mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm
- kurz Artikel-Nr.: **4029**
mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm



Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4030**
- kurz Artikel-Nr.: **4037**
- weit Artikel-Nr.: **4035**



Arm-Schultermanschette

- normal Artikel-Nr.: **4043**



Jackenmanschette

- Universalgröße Artikel-Nr.: **3075**



Erweiterungssatz Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4033**
- kurz Artikel-Nr.: **4039**

Erweiterungssatz Kompressionshose

- normal Artikel-Nr.: **4034**
- kurz Artikel-Nr.: **4040**
- Fußteil Artikel-Nr.: **4038**

VariLymph 12 PRO

digitales Kompressionstherapiegerät



digitale Druck- und
Zeitsteuerung



hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten



verdrehicher konstruierter
Anschlussstecker



● MADE
● IN
● GERMANY

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK 12-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

VariLymph 12 Pro

- Druckbereich von 15 bis 80 mmHg
- Therapiedauer von 15 bis 60 Min.
- Entlüftung 10 bis 120 Sek.
- Befüllung 20 bis 120 Sek.
(Befüllungs- und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)

Artikel-Nr.: 4000

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018

Technische Daten

- 17 x 20 x 20 cm (H x B x L)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang

- VariLymph 12 Pro
Kompressionstherapiegerät
- Netzkabel
- Schlauchverbindung



Wechseldrucksysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie



medical solutions

SLK Relax[®]

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



einzel herausnehmbare Zellen



CPR-Funktion



- großzelliges Matratzenauflegesystem
- 17-Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 6 Luftstromzellen
- Wechseldruckmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

SLK Relax

max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II

bei niedrigem bis mittlerem Risiko

Artikel-Nr.: 1600 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: II.29.04.1006

Technische Daten

• Maße Steuereinheit:
16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)

• für Bettmaß: 90 x 200 cm

• Höhe: 14 cm

• max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
• Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
• Gesamtgewicht: 6 kg

Lieferumfang

- SLK Relax® Auflage inkl. Steuereinheit und Care-Tex™ Bezug


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



Nylon-Luftstromkissen

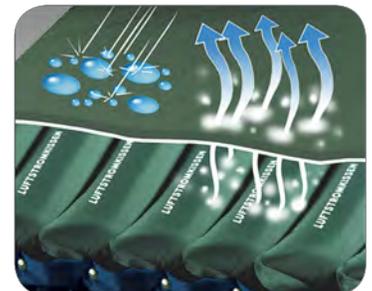

Soft-Care-Tex[™] Bezug

- großzelliges Matratzenauflegesystem
- 17-Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex[™] Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

SLK I

max. Patientengewicht: 130 kg
 Dekubitusstadium: I bis II

bei niedrigem bis mittlerem Risiko

Artikel-Nr.: 1603 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: II.29.04.1005

Technische Daten

- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)

- für Bettmaß: 90 x 200 cm

- Höhe: 14 cm

- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 6 kg

Lieferumfang

- SLK I[®] Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex[™] Bezug




Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



Polyurethan-Luftstromkissen

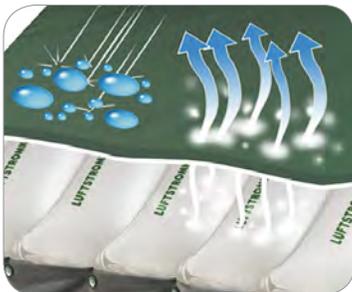

Soft-Care-Text™ Bezug



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

SLK II

max. Patientengewicht: 135 kg
Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1701 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 1735 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1007

Technische Daten

• Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)

• für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm

• Höhe: 14 cm

• max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
• Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
• Gesamtgewicht: 8 kg

Lieferumfang

- SLK II® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Text™ Bezug

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System

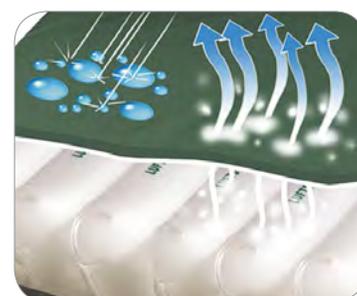

Soft-Care-Tex™ Bezug

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

SLK III

max. Patientengewicht: **195 kg**
Dekubitusstadium: **I bis III**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1702 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1706 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: **II.29.08.1009**

Technische Daten

• Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)

• für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm

• Höhe: 21 cm

• max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
• Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
• Gesamtgewicht: 15 kg

Lieferumfang

- SLK III® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

SLK IV®

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



integrierte Kissentasche



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

SLK IV

max. Patientengewicht: **250 kg**
Dekubitusstadium: **I bis IV**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1703 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1751 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: **II.29.08.3004**

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV®-Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Text™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagerung und Spitzfußprophylaxe

Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie




auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich



Steuereinheit



Polyurethan Luftstromkissen

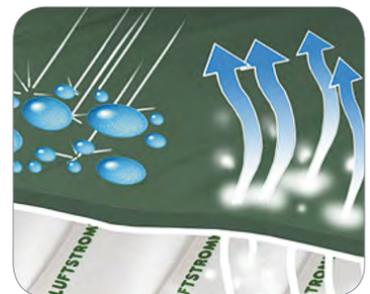

Soft-Care-Tex™ Bezug

- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

Pain & Therapy

max. Patientengewicht: **135 kg**
Dekubitusstadium: **I bis IV**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1704 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1779 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: **11.29.08.3005**


Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff
19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

Lieferumfang

- Pain & Therapy® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage


Pulsationssystem speziell für Kinder zur Dekubitus- und Schmerztherapie

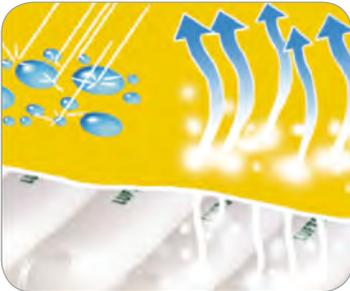

Soft-Care-Tex™ Bezug



Cell-on-Cell-System

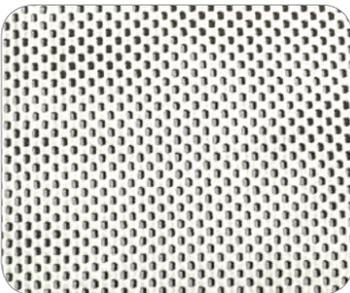

Anti-Rutsch-Pad



- Matratzenersatzsystem für Kinder
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 8 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

KiddyCare

max. Patientengewicht: 75 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko
• Verwendung des SLK Frame im Sondermaß

Artikel-Nr.: 1705 (70 x 140 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.11.04.2096

Technische Daten

• Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)

• für Bettmaß: 70 x 140 cm

• Höhe: 17 cm

• max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
• Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
• Gesamtgewicht: 10 kg

Lieferumfang

• KiddyCare® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug

• robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Netzunabhängiges Wechseldrucksitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Schaumstoff



2 Steuereinheiten



Luftzellen

- akkubetriebenes Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- wählbare Wechseldruckintervalle (10 min / 15 min / 20 min)
- Statikfunktion zur Weichlagerung
- die Steuereinheit kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden
- für überwiegend sitzende Patienten

FreeChair Professional

max. Patientengewicht: 100 kg

Artikel-Nr.: 1812 (43 x 43 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
12,6 x 25 x 5,6 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen:
7 x 43 x 43 cm (H x B x T)
- Akku: 6 V Ni-MH / 2000 mAh
- Netzgerät: primär 230 Volt / 50 Hz,
sekundär 12 Volt / max. 18 Watt
- Gesamtgewicht: 1,4 kg

Lieferumfang

- FreeChair Professional[®] Sitzkissen inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug
- 2 programmierbare Steuereinheiten, inkl. Akku
- Transporttasche für die Steuereinheiten
- ein Ladegerät

Übersicht luftbefüllte energetische Therapiesysteme

	SLK Relax	SLK I	SLK II	SLK III	SLK IV	Pain&Therapy	KiddyCare	SLK IV XXL
Stadium bis (nach EPUAP)	2	2	3	3	4	4	4	4
bis Risikostufe	niedrig / mittel	niedrig / mittel	mittel / erhöht	mittel / erhöht	hoch	hoch	hoch	hoch
für Patienten von	40-130 kg	40-130 kg	40-135 kg	40-195 kg	40-250 kg	30-135 kg	3-75 kg	80-400 kg
Statikfunktion	-	+	+	+	+	+	+	+
Pulsation	-	-	-	-	+	+	+	+
Cell-in-Cell-System	-	-	-	+	+	-	-	+*1
Spitzfuß-prophylaxe	-	-	-	-	+	-	-	+
Soft-Care-Tex™	+	+	+	+	+	+	+	+*2
Transport-tasche	-	-	-	+	+	+	+	+
Matratzen-auflagesystem	+	+	+	-	-	-/+*3	-	-
Matratzen-ersatzsystem	-	-	-	+	+	-/+*3	+	+
CPR-Funktion	+	+	+	+	+	+	+	+
Sensor-Chip-Steuerung (SCS)	-	-	-	-	+	+	+	+
Micro-Chip-Steuerung (MCS)	-	-	+	+	-	-	-	-
VDE-Messpunkt	+	+	+	+	+	+	+	+
EPR Netzkabel	+	+	+	+	+	+	+	+
Hilfsmittelnummer	11.29.04.1006	11.29.04.1005	11.29.04.1007	11.29.08.1009	11.29.08.3004	11.29.08.3005	11.11.04.2096	


*1 SLK IV XXL: 90er Breite: Cell-in-Cell System / 120er Breite: Cell-on-Cell System

*2 SLK IV XXL: 90er Breite: Soft-Care-Tex™ Bezug / 120er Breite: Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

*3 Die Pain&Therapy wird standardmäßig als Matratzenersatzsystem ausgeliefert, kann jedoch durch Entnahme des Schaumstoffkerns auch als Auflagesystem verwendet werden.



XXL Schwerlast-Lagerungssysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie

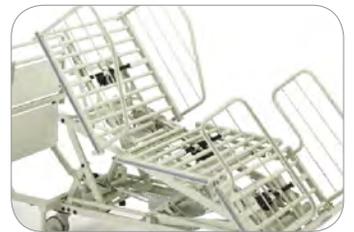

medical solutions

SLK Premium Bett



Gesamtbreite (cm) : 90 - 120

Gesamtlänge (cm) : 210 - 230

max. Patientengewicht (kg) : 400

Arbeitslast (kg) : 450

Gewicht (kg) : 255

Einzigartige Konstruktion

Das XXL Premium Bett ist mit allen modernen Funktionen ausgerüstet die eine sichere Handhabung bariatrischer Patienten individuell und bedarfsgerecht gewährleisten.

Produktdetails:

- Sicherheit und Komfort für Patient und Personal
- Der Patient erreicht einen sicheren und optimalen Liege-/ Sitzkomfort
- Die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Fußende lassen eine sichere und rückenfreundliche Mobilisation des Patienten zu
- Die demontierbaren Seitenteile lassen sich als Stützgriff benutzen
- Das Pflegepersonal kann ohne Risiko um das Bett herum arbeiten
- Das SLK Premium Bett steht auf Stützen und verfügt über einen Radlift
- Durch die einzigartige elektrische Bettbreiteneinstellung ist der Transfer außerhalb des Patientenzimmers (Türen und Aufzüge) kein Problem mehr

SLK Classic Bett



Gesamtbreite (cm) : 90 - 120

Gesamtlänge (cm) : 200 - 230

max. Patientengewicht (kg) : 350

Arbeitslast (kg) : 400

Gewicht (kg) : 175

Das SLK Classic Bett ermöglicht eine kosteneffiziente Versorgung von Schwerlastpatienten. Es verfügt über die klassischen elektrischen Funktionen eines Pflegebettes. Die Bettverbreiterung erfolgt manuell.

Produktdetails:

- viergeteilte Liegefläche - leicht herausnehmbar und zu reinigen
- Rahmen aus massivem Stahl
- überfahrbare Höhe: 150 mm
- Handbedienung für Benutzer (Magnetschlüsselloption)
- elektrische CPR-Funktion
- Notstromversorgung
- einfach abnehmbares Kopf- und Fußteil

SLK IV XXL



Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



90 cm
Breite



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad

- Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstomzellen
- Cell-in-Cell-System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- verstärkte Luftanschlüsse an den Luftzellen
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads

SLK IV XXL

max. Patientengewicht: 400 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1882 (90 x 200 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm

- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Text™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

SLK IV XXL

Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



Steuerunit



9 Luftstromzellen



Anti-Rutsch-Pad



120 cm
Breite

- Matratzensersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- abwaschbarer Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads

SLK IV XXL

max. Patientengewicht: 400 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 2080 (120 x 200 cm)

Technische Daten

• Maße Steuerunit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)

• für Bettmaß: 120 x 200 cm

• Höhe: 26 cm

• max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
• Steuerunit: 230 V / 50 Hz
• Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuerunit und Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

hochwertiges HR-Schaumstoffsystem für adipöse Patienten



auch im Sondermaß erhältlich


- 3-schichtige Schaumstoffmatratze für die Versorgung von bariatrischen Patienten mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition durch Visco-Topschaum
- abwaschbarer Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei



Bi-Stretch-Bezug



hervorragendes Mikroklima durch Belüftungskanäle

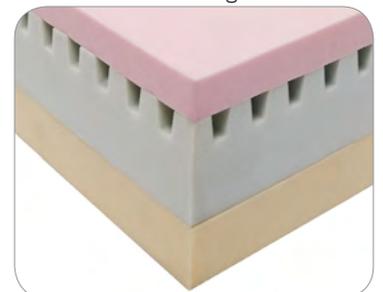

optimale Druckentlastung durch Profilschnitte

XXL Foam

max. Patientengewicht: 300 kg
Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 10063 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10064 (100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10081 (120 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 22 cm
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 kg / m³

Lieferumfang

- XXL Foam Schwerlastmatratze inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Schaumstoffrahmen



Einsatz einer SLK IV XXL
mit einem SLK Frame



auch im
Sondermaß
erhältlich

- speziell für den Einsatz in der Schwerlastversorgung
- Schaumstoffrahmen für großzellige Wechseldrucksysteme
- Rahmenbasis 5 cm mit Seiten-, Kopf- und Fußteilen aus Schaumstoff
- schnelle Anpassung an vorhandene Bettsysteme in allen Größen
- ersetzt aufwändige Sonderanfertigungen
- abwaschbarer Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- Bezug erfüllt OEKO-TEX-Standard 100, FCKW-frei

Anwendungsgebiete

- Anpassung hochwertiger Lagerungssysteme an verschiedene Bettrahmen
- Verwendung der Kindermatratze KiddyCare in Standard-Bettgrößen

Artikel-Nr.: 10026 (100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10033 (Sondermaß)

Technische Daten



- Standard-Innenmaß:
15 x 90 x 200 cm (H x B x L)
- Standard-Außenmaß:
20 x 100 x 200 cm (H x B x L)
- Sondermaße für die meisten Bettrahmen
- abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Frame Schaumstoffrahmen inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss



Schaumstoff- und Hybridsysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie

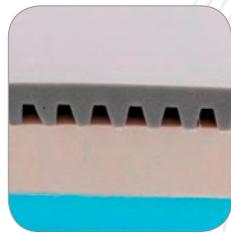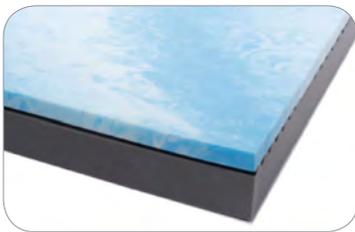

medical solutions

NeoCare Basic

Standard Pflegebettmatratze



Schaumschicht



- Pflegebettmatratze
- Hoher Liegekomfort durch hochwertigen PU-Schaumstoff

NeoCare Basic

max. Patientengewicht: 120 kg

Artikel-Nr.: 10061 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 10066 (100 x 200 cm)

Technische Daten


- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Raumgewicht: 35 kg / m³

Lieferumfang

- NeoCare Basic
- Trikotmatratzenbezug

NeoCare I

Prophylaxe- und Therapiesystem

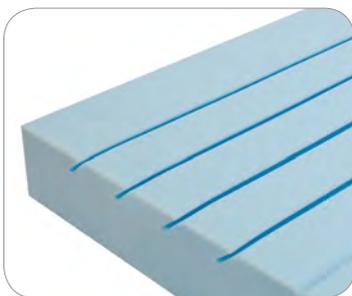

3 cm Einschnitte
reduzieren Scher- und
Reibungskräfte

- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

NeoCare I

max. Patientengewicht: 120 kg

Artikel-Nr.: 10067 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 10068 (100 x 200 cm)


Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Raumgewicht: 40 kg / m³


Lieferumfang

- NeoCare I
- Trikotmatratzenbezug


Standard Pflegebettmatratze

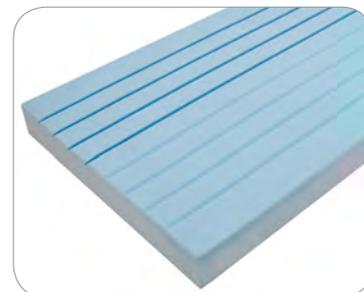

Scherkraftreduzierende
Einschnitte

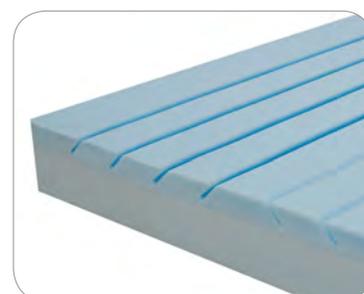

Kaltschaum-Deckschicht

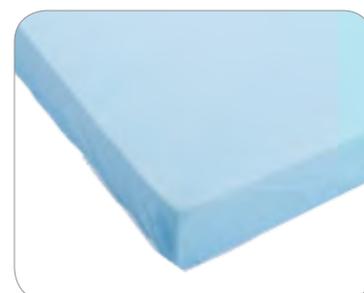

Trikotmatratzenbezug

- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität Deckschaum: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

NeoCare II

max. Patientengewicht: 120 kg
Dekubitusstadium: I

bei geringem Risiko

Artikel-Nr.: 10076 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10077 (100 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm

- Oberschicht: 2,5 kPa Stauchhärte
- Unterschicht: 4,5 kPa Stauchhärte

- Bezug waschbar bis 60° C

- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang

- NeoCare II Standard Pflegebettmatratze
- Trikotmatratzenbezug

FoamCare[®] Comfort

profilierte HR-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



unterschiedliche Härtezonen



hochwertiger HR-Schaum



druckentlastende
Würfelstruktur



auch im
Sondermaß
erhältlich

- 5-Zonen HR-Schaumkern mit Konturschnitten (Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich)
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

FoamCare Comfort

FoamCare Comfort 120
max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10014 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10015 (100 x 200 cm)

FoamCare Comfort 140
max. Patientengewicht: 160 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10058 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10065 (100 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: II.29.05.1032

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 14 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 5-Zonen Schaumstoff
- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang

- FoamCare Comfort[®] 120 / 140
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




auch im **Sondermaß** erhältlich

- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei
- **Zusätzlich:** pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze


Verlängerungsset: 90 x 20 cm



Bi-Stretch-Bezug

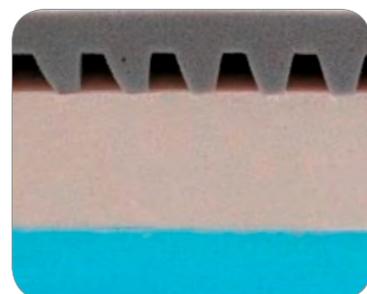

hervorragendes Mikroklima durch Belüftungskanäle

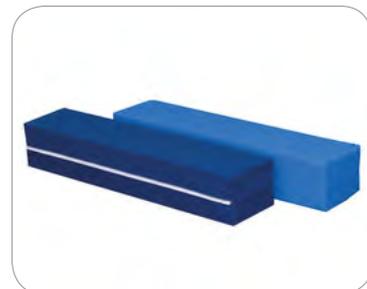

optionales Verlängerungsset (90 x 20 cm)

ProfiSoft Comfort

max. Patientengewicht: 180 kg
 Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 10016 (90 x 200 cm)
 Artikel-Nr.: 10017 (100 x 200 cm)
 Verlängerungsset: 10078 (90 x 20)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 45 / 50 / 35 kg / m³

Lieferumfang

- ProfiSoft Comfort 150
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss


viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Randzonenverstärkung



Noppenstruktur wirkt
Wärmestau entgegen

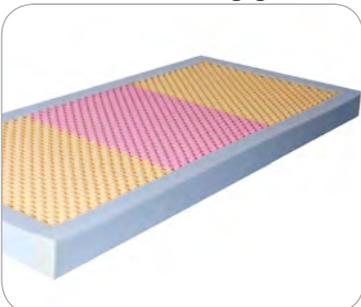

Druckentlastung durch 3
verschiedene Härtezeiten



auch im
Sondermaß
erhältlich

- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezeiten
- Randzonenverstärkung
- in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
- ViscoCare Comfort 120 Höhe: 12 cm
- ViscoCare Comfort 150 Höhe: 15 cm
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

ViscoCare Comfort

ViscoCare Comfort 120
max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10018 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10019 (100 x 200 cm)

ViscoCare Comfort 150
max. Patientengewicht: 200 kg
Dekubitusstadium: I bis III
Artikel-Nr.: 10020 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10021 (100 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 15 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff
- Raumgewicht: 50 / 40 kg / m³

Lieferumfang

- ViscoCare Comfort[®] 120 / 150
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

2-schichtige Komfortmatratze mit Gel-feel-Schaum und Silver-Care-Bezug



auch im
Sondermaß
erhältlich



optimale Druckentlastung durch
Einschnitte in der Unterschicht



Silver-Care-Bezug



Gel-feel-Schaum

- 2-schichtige Schaumstoffmatratze mit neuartigem Gel-feel-Schaum
- kühlend und atmungsaktiv
- optimale Druckverteilung durch einzigartiges Einsinkverhalten
- hervorragendes Mikroklima durch Gel-feel-Schaum und Lüftungskanäle
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Silver-Care-Bezug wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- optimal auch für Pflegebetten geeignet

Silver Sleep

Artikel-Nr.: 10079 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10080 (100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10083 (90 x 220 cm)
Artikel-Nr.: 10084 (80 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10085 (120 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10086 (140 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 14 cm (ohne Bezug)
- Silver-Care-Bezug (gesteppt)
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 2-Schichten

Lieferumfang

- Silver Sleep Komfortmatratze
inkl. Silver-Care-Bezug (gesteppt)
mit Wendeschlaufen

Bi-Stretch-Bezug

Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen



Bi-Stretch-Bezug

- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften



Bi-Stretch-Bezug

Artikel-Nr.: 1838 (90 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 1912 (100 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 1839 (90 x 200 x 15 cm)
Artikel-Nr.: 1915 (100 x 200 x 15 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm

Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Touch of Silver Bezug

Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen



Touch of Silver Bezug

- wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen



Touch of Silver Bezug

Artikel-Nr.: 2062 (90 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 2114 (100 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 2115 (90 x 200 x 15 cm)
Artikel-Nr.: 2116 (100 x 200 x 15 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm

Lieferumfang

- Touch of Silver Bezug

non-energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



- Dekubitusprophylaxe und-therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- spürbare Reduktion des Auflagedruckes
- passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum
- keine Energiekosten



Randzonenverstärkung



einzeln entnehmbare
Polyurethan-Zellen



obere Schaumstoffschicht /
Liegefläche

GreenCare

max. Patientengewicht: 195 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 2016 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: II.29.09.0004

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 18 cm
- Nylon-Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 14 kg

Lieferumfang

- GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Nylon-Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug

energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



individuelle Druckregulierung



10 Zellen mit integriertem
Schaumstoff-Zellkern



CPR-Funktion



- Dekubitusprophylaxe und -therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechseldruck
- für den Einsatz in der Schmerztherapie geeignet
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- einfach zu reinigen und zu desinfizieren

BlueCare

max. Patientengewicht: 180 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 2012 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.2002

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe:
12 cm unbelüftet, ohne Kompression
18 cm belüftet, ohne Kompression
- Nylon-Polyurethan-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C und
chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 11 kg

Lieferumfang


- BlueCare Anti-Dekubitus-System
inkl. Steuereinheit und Nylon-
Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-
Bezug



mobile Patientenlifter



medical solutions

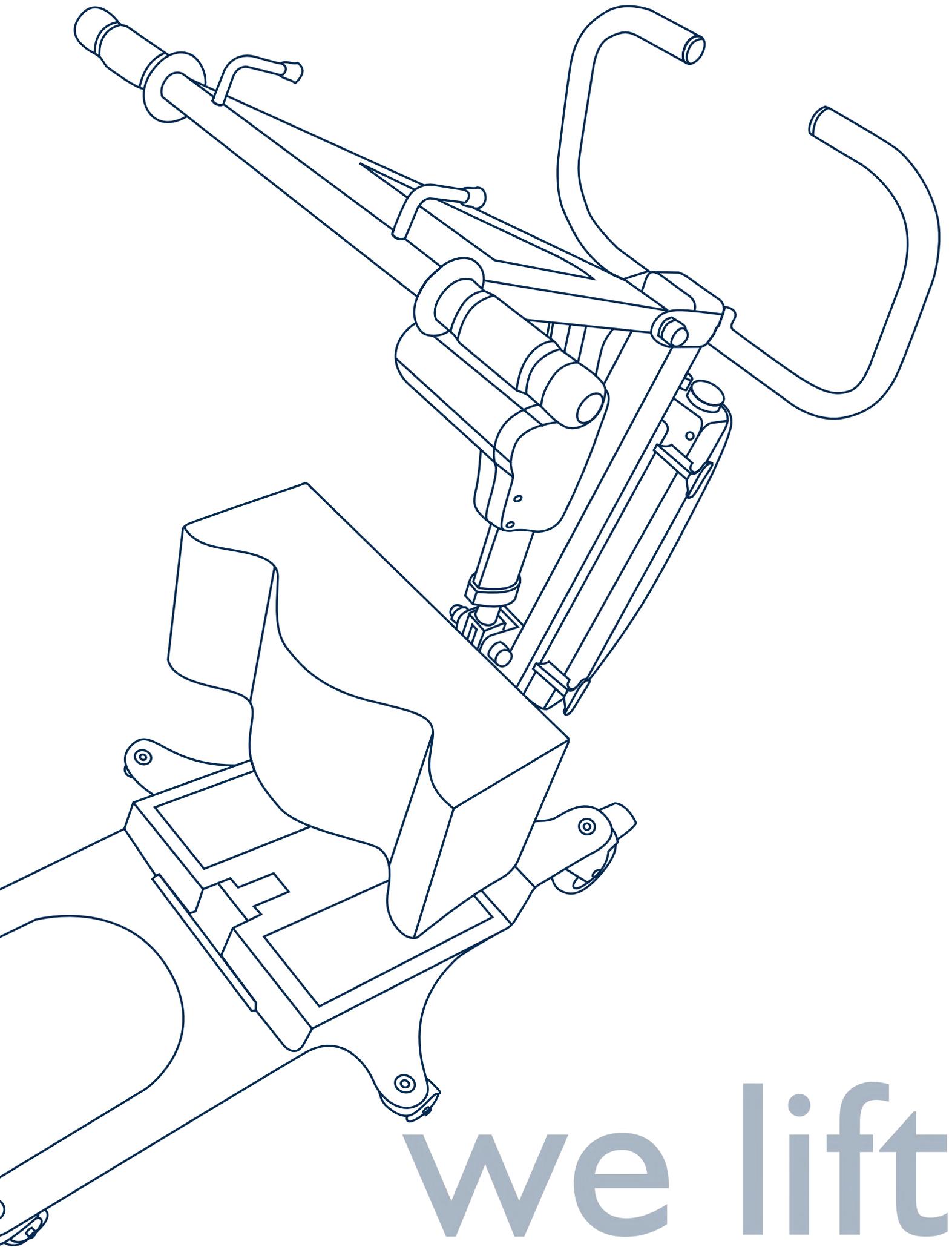

we lift

Aus diesen Gründen sollte man Patientenlifter einsetzen

Wie viele Personen benötigt man laut Lastenhandhabungsverordnung um einen Patienten umzupositionieren?

Nach nationalem Gesetz sind dazu **4 Pfleger** oder ein **Patientenlifter** nötig.

Patientenlifter dienen zur Aufnahme, zum Transport und Positionswechsel von Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung.
Mit einem geeigneten Gurt ist es möglich, einen Patienten sicher und schonend zu bewegen.

Vorteile für den Patienten

- Sicherer und schonender Transfer
- Aktivlifter unterstützen bei der Therapie, bei der Erhaltung oder Steigerung der Mobilität und Unabhängigkeit
- Aktivlifter sind in ihren Eigenschaften positiv:
 - für die Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems
 - für eine Verbesserung des Körpergefühls und der Darmfunktion
 - für die Stärkung von Knochen, Gelenken und Knorpel

Vorteile für den Betreuer

- einfache Bedienung während des Transfers
- Minimierung der körperlichen Belastung des Betreuers beim Transfer

you up

Carry 185 Classic

Patientenlifter Konzipiert für die Pflege Zuhause



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Handbedienung mit Magnet



Hakenaufnahme mit Federsicherung



● MADE
● IN
● GERMANY

- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rüchenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stop, Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8002**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
 - Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**
- serienmäßig:**
- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Lenkrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0099**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	115
Bauhöhe	137
Breite	61
Fußhöhe	11
Hubhöhe	81-203
Drehradius	132
Spreizung	51-94
Gewicht	37 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Carry 185 Pro



Patientenlifter

Konzipiert für den Einsatz in Einrichtungen und Kliniken



- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- doppelte Akkuleistung



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Bedienung über Steuerbox möglich



optional mit Carry 4-Punkt-Bügel

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8004**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
- Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**

serienmäßig:

- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0100**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	118
Bauhöhe	137
Breite	61
Fußhöhe	11
Hubhöhe	81-203
Drehradius	132
Spreizung	51-94
Gewicht	38 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Carry 185 Pro L

Patientenlifter extra niedriges Fahrwerk



Schnellspannschraube zum
werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Komfort-Rollen



optional mit Carry 4-Punkt-Bügel

MADE
IN
GERMANY



kg
185

- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rüchenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stop, Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8006**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
- Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**

serienmäßig:

- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende
Komfort-Rollen mit hochwertigem
Kunststoffgehäuse

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0101**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	118
Bauhöhe	135
Breite	61
Fußhöhe	9
Hubhöhe	79-201
Drehradius	131
Spreizung	51-94
Gewicht	38 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Blue Flyer Compact



Patientenlifter kurzes Fahrgestell



werkzeuglos klappbar



Bedienung über
Steuerbox möglich



optional mit Twin-Bügel

- für Kinder und kleine Patienten bis zu einer Körpergröße von **1,70** cm geeignet
- Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Benutzerfreundlichkeit für Betreuer und Patient
- **360** Grad Drehung des Universalbügels in höchster Position möglich
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- faltbar und transportfähig
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- manuelle Spreizung: **5000**

Optional:

- Twin-Bügel-Compact: **5180**

serienmäßig:

- Universalbügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0087**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	100
Bauhöhe	126
Breite	62
Fußhöhe	11
Hubhöhe	78-178
Drehradius	114
Spreizung	59-92
Gewicht	31 kg

max. Patientengewicht: **160 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Blue Flyer Plus

Patientenlifter elektrische Spreizung



Handbedienung



elektrische Spreizung



optional mit Twin-Bügel



- schonendes Aufheben und Absetzen von Patienten
- Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5002**

Optional:

- Twin-Bügel: **5181**

serienmäßig:

- Universalbügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

elektrische Spreizung: **22.40.01.0089**

Daten

elektrische Spreizung

Länge	119
Bauhöhe	136
Breite	63
Fußhöhe	11
Hubhöhe	79-200
Drehradius	134
Spreizung	55-90
Gewicht	32 kg

max. Patientengewicht: **180 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Patientenlifter elektrische Spreizung



Bedienung über Steuerbox möglich



kugelgelagerte Doppelrollen



Twin-Bügel serienmäßig

- für den Einsatz in Kliniken und Pflegeinstitutionen geeignet
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- verstellbare Beinspreizung für einen optimalen Zugang zu Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- garantiert ein sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **180 kg**
- auch bei den meisten Scherenbetten und bariatrischen Rollstühlen einsetzbar
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5004**

serienmäßig:

- Twin-Bügel: **5181**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

elektrische Spreizung: **22.40.01.0091**

Daten

elektrische Spreizung

Länge	119
Bauhöhe	133
Breite	63
Fußhöhe	9
Hubhöhe	78-200
Drehradius	134
Spreizung	61-86
Gewicht	42 kg

max. Patientengewicht: **180 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Flyer XL

Patientenlifter für schwergewichtige Patienten



Bedienung über Steuerbox möglich



kugelgelagerte Rollen



Twin-Bügel XL serienmäßig



- schonendes Aufheben und Absetzen von Patienten
- elektrisch verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rüchenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5016**

serienmäßig:

- Twin-Bügel XL

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten

elektrische Spreizung

Länge	125
Bauhöhe	124
Breite	74
Fußhöhe	11
Hubhöhe	66-182
Drehradius	145
Spreizung	70-105
Gewicht	46 kg

max. Patientengewicht: **300 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm



mobile Aktivlifter



medical solutions

Blue Wayup

Aktivlifter fixes Fahrgestell



Einsatz mit Spezial
Aktivgurt mit Sitzschaukel



kugelgelagerte Doppelrollen



optionales Wadenband



- für Patienten im Homecare-Bereich
- sicherer und einfacher Transfer mit Gesäßunterstützung
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- extrem kompakt, wodurch eine hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche gewährleistet wird
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Universal Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

Artikelnummer:

- fixes Fahrgestell: **5006**
- manuelle Spreizung: **5007**

Optional:

- Wadenband: **5193**
- breites Schienbeinpolster: **5462**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

fixes Fahrgestell: **22.29.01.1046**
manuelle Spreizung: **22.29.01.1047**

Daten

Daten	Fahrgestell	
	fix	manuell
Länge	83	100
Bauhöhe	103	103
Breite	58	53
Fußhöhe	8	11
Hubhöhe	83-129	83-129
Drehradius	90	111
Spreizung	-	53-82
Gewicht	29 kg	30 kg

max. Patientengewicht: **150 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Aktivlifter manuelle Spreizung

Merkmale dieser Variante:


- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität.
- Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



minimale Spreizung



maximale Spreizung

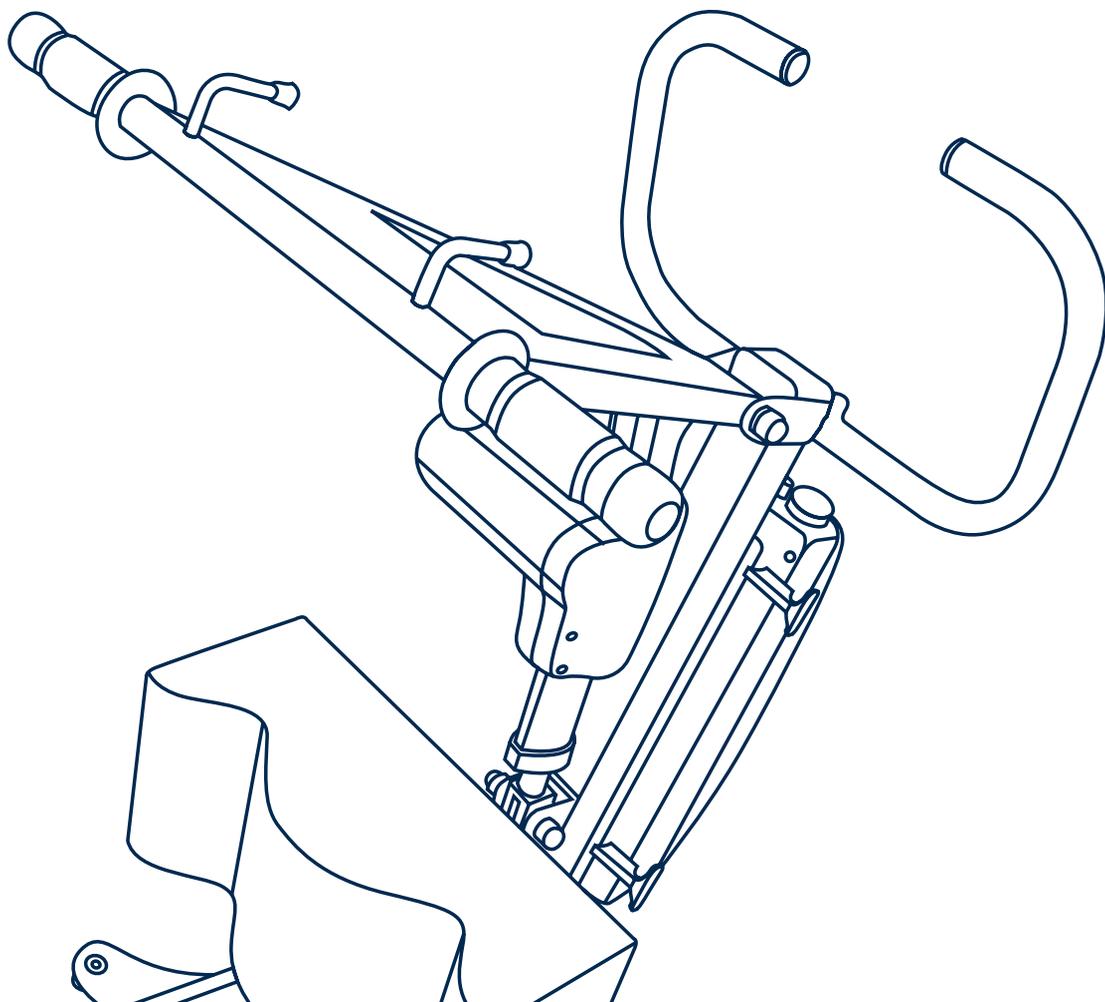

Aktivlifter fixes Fahrgestell



optionales Wadenband



variable Fußplatte



fixes platzsparendes Fahrwerk



- schonendes Aufrichten und Absetzen von Patienten durch höhen- und winkelverstellbaren Fußbereich
- auch für kleinere Patienten und Kinder geeignet
- sicherer und einfacher Transfer mit Gesäßunterstützung
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- ergonomischer Bedienergriff
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Universal Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

Artikelnummer:

- fixes Fahrgestell: **5008**
- manuelle Spreizung: **5009**
- elektrische Spreizung: **5010**

Optional:

- Wadenband: **5193**
- breites Schienbeinpolster: **5462**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Service Richtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

fixes Fahrgestell: **22.29.01.1048**

manuelle Spreizung: **22.29.01.1049**

elektrische Spreizung: **22.29.01.1050**

Daten

Daten	Fahrgestell		
	fix	manuell	elektrisch
Länge	84	99	99
Bauhöhe	101	106	106
Breite	56	52	52
Fußhöhe	8	11	11
Hubhöhe	83-125	87-131	83-131
Drehradius	88	110	110
Spreizung	-	52-101	52-86
Gewicht	28 kg	30 kg	31 kg

max. Patientengewicht: **150 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Aktivlifter manuelle Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



minimale Spreizung



maximale Spreizung

Aktivlifter elektrische Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- Spreizung des Fahrgestells ohne Kraftanstrengung auf Tastendruck
- empfohlen bei schwergewichtigen Patienten
- auch auf hochflorigen Teppichen einsetzbar
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



Steuereinheit



Handbedienung
für elektrische Spreizung



optional breites Schienbeinpolster

Aktivlifter fixes Fahrgestell



Hubvorrichtung



optionales Wadenband



variable Fußplatte



- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

Artikelnummer:

- fixes Fahrgestell: **5011**
- manuelle Spreizung: **5012**
- elektrische Spreizung: **5013**

Optional:

- Wadenband: **5193**
- breites Schienbeinpolster: **5462**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

fixes Fahrgestell: **22.29.01.1051**
manuelle Spreizung: **22.29.01.1052**
elektrische Spreizung: **22.29.01.1053**

Daten

Daten	Fahrgestell		
	fix	manuell	elektrisch
Länge	84	99	99
Bauhöhe	110	112	112
Breite	56	52	52
Fußhöhe	8	11	11
Hubhöhe	67-159	65-161	65-161
Drehradius	88	111	111
Spreizung	-	53-102	53-86
Gewicht	41 kg	42 kg	43 kg

max. Patientengewicht: **150 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm

Aktivlifter manuelle Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



minimale Spreizung



maximale Spreizung

Aktivlifter elektrische Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- Spreizung des Fahrgestells ohne Kraftanstrengung auf Tastendruck
- empfohlen bei schwergewichtigen Patienten
- auch auf hochflorigen Teppichen einsetzbar
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



100 mm Doppelrollen-wartungsfrei



Steuereinheit



Handbedienung
für elektrische Spreizung

Wayup XL

Aktivlifter für schwergewichtige Patienten



Hubvorrichtung



kugelgelagerte Doppelrollen



optionales Wadenband



- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- breites Schienbeinpolster serienmäßig
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5017**

Optional:

- Wadenband: **5194**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen
- serienmäßig mit breiterem Schienbeinpolster

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Daten

elektrische Spreizung


Länge	107
Bauhöhe	105
Breite	69
Fußhöhe	11
Hubhöhe	85-135
Drehradius	125
Spreizung	69-104
Gewicht	45 kg

max. Patientengewicht: **300 kg**
weitere Details auf Seite: **58**

Maße in cm




Technische Daten Patientenlifter & Aktivlifter

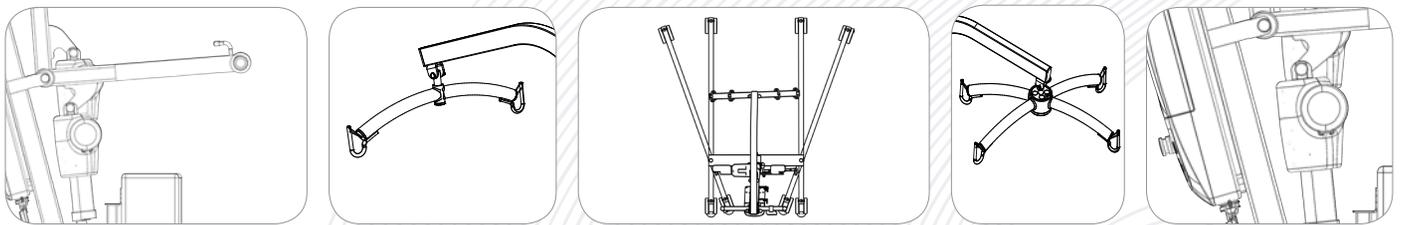

medical solutions



Technische Daten

Patientenlifter und Aktivlifter

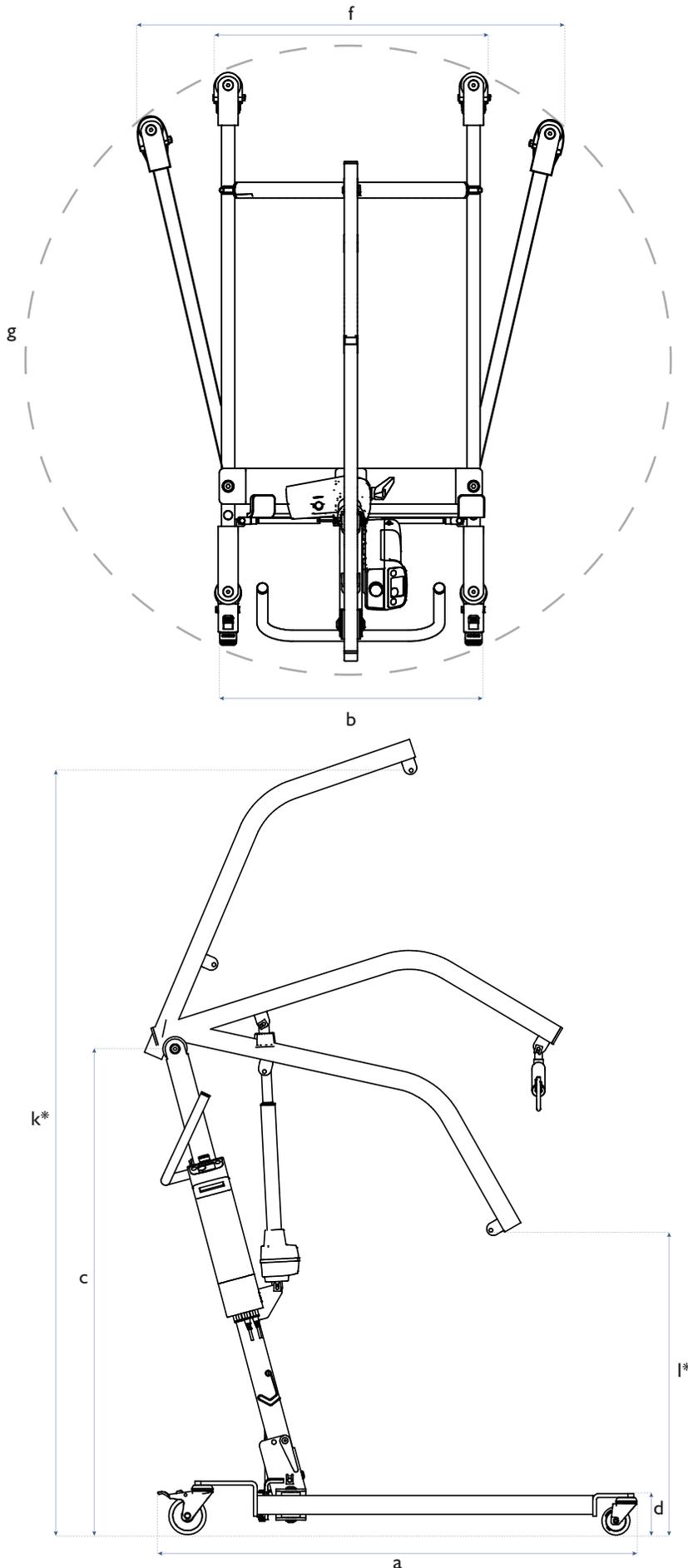

	Länge	Breite	E
	a	b	
Carry 185 Classic manuelle Spreizung	115	61	
Carry 185 Pro manuelle Spreizung	118	61	
Carry 185 Pro L manuelle Spreizung	118	61	
BLUE FLYER COMPACT manuelle Spreizung	100	62	
BLUE FLYER PLUS elektrische Spreizung	119	63	
FLYER PLUS elektrische Spreizung	119	63	
FLYER XL elektrische Spreizung	125	74	
BLUE WAYUP fixes Fahrgestell manuelle Spreizung	83 100	58 53	
WAYUP fixes Fahrgestell manuelle Spreizung elektrische Spreizung	84 99 99	56 52 52	
EASYLEV fixes Fahrgestell manuelle Spreizung elektrische Spreizung	84 99 99	56 56 56	
WAYUP XL elektrische Spreizung	107	69	

* = nach Bild 1, DIN EN ISO 10535:2007-04

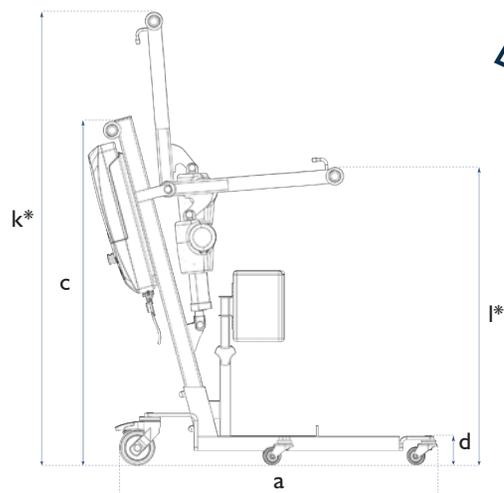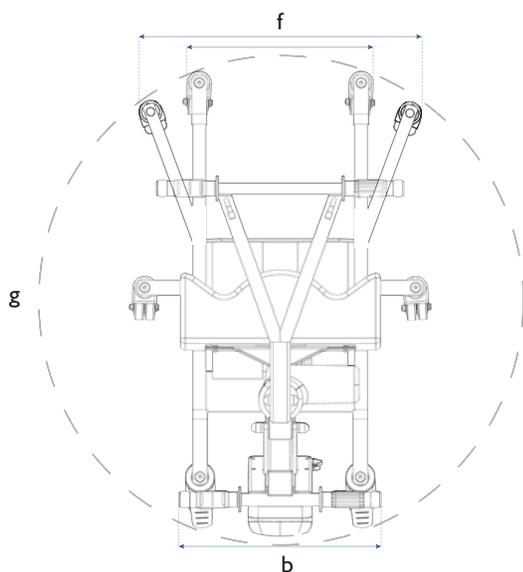

Bauhöhe	Hubhöhe oben	Höhe des Fahrgestells	Hubhöhe unten	Spreizung	Drehradius	Gewicht	max. Patientengewicht
c	k*	d	l*	f	g	h	i
137	203	11	81	51-94	132	36 kg	185 kg
137	203	11	81	51-94	132	38 kg	185 kg
135	201	9	79	51-94	131	38 kg	185 kg
126	178	11	78	59-92	114	31 kg	160 kg
136	200	11	79	55-90	134	32 kg	180 kg
133	200	9	78	61-86	134	42 kg	180 kg
127	182	11	66	70-105	145	46 kg	300 kg
103	129	8	83	-	90	29 kg	150 kg
103	129	11	83	53-82	111	30 kg	150 kg
101	125	8	83	-	88	28 kg	150 kg
106	131	11	87	52-101	110	29 kg	150 kg
106	131	11	83	52-86	110	30 kg	150 kg
110	159	8	67	-	88	41 kg	150 kg
112	161	11	65	53-102	111	42 kg	150 kg
112	161	11	65	53-86	111	43 kg	150 kg
105	135	11	85	69-104	125	45 kg	300 kg



Gurte für Patientenlifter & Aktivlifter



medical solutions

Qualität, Komfort und Sicherheit sind unsere Ansprüche

Bei der Entwicklung unserer Produkte wird besonders Wert darauf gelegt, dass therapeutische Wirksamkeit und Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund sind unsere Liftergurte speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten.

Wir bieten individuelle Lösungskonzepte für Kinder, Erwachsene, leichte oder schwere Patienten, im Homecare-Bereich, in Pflegeinstitutionen oder Kliniken.

Die SLK-Liftergurte zeichnen sich durch ihre erstklassige Qualität und Benutzerfreundlichkeit aus. Hochwertige Materialien und eine professionelle Verarbeitung gewährleisten eine hohe Belastbarkeit von bis zu **320 kg**. Außerdem sind die Gurte bis zu einer Temperatur von **70 °C** waschbar und entsprechen somit den allgemein geltenden Hygienestandards.

Die Gurtschlaufen sind farbig gekennzeichnet. Diese Farbkennzeichnung ermöglicht eine schnellere und sichere Anpassung des Liftergurtes an den Patienten.

Die verschiedenfarbigen Gurtumrandungen gewährleisten ein schnelles Erkennen der Größen.

Alle SLK-Gurte eignen sich zudem auch für Lifter anderer Hersteller gemäß der aktuellen Kompatibilitätserklärung. Den Download hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.slk-gmbh.de oder nutzen Sie unseren QR-Code.



Laden Sie sich **HIER** die aktuelle **Kompatibilitätsliste** herunter!





Größentabelle für die Liftergurte

		Gewicht in kg																													
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		
Körpergröße in cm	100	S	S	M	M	M	M	M	L	XL	XXL																				
	110	S	S	M	M	M	M	L	L	XL																					
	120	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	130	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	140	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	150	S	S	S	S	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	160	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	170	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	180	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	190	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
200	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
210	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

für alle anderen Größen sind Sonderanfertigungen notwendig

Universalgurt für den allgemeinen Gebrauch



- für den sicheren Transfer des Patienten sowie das Liften vom Boden
- optional mit anklettbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

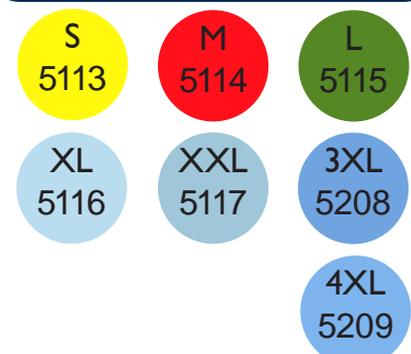

SLK Universalgurt mit Kopfstütze

Universalgurt für den allgemeinen Gebrauch mit Kopfstütze

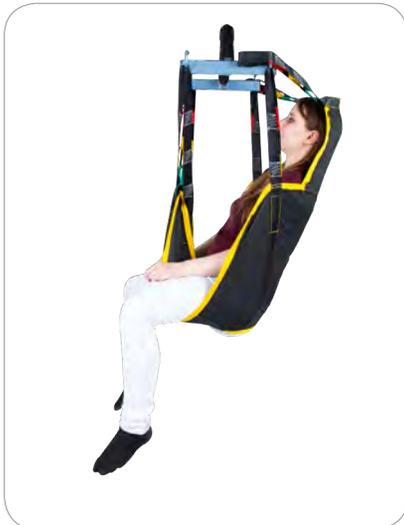

- anschießbarer Universalgurt mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien


Maße und Artikelnummern



SLK Universalgurt Bad



Badegurt

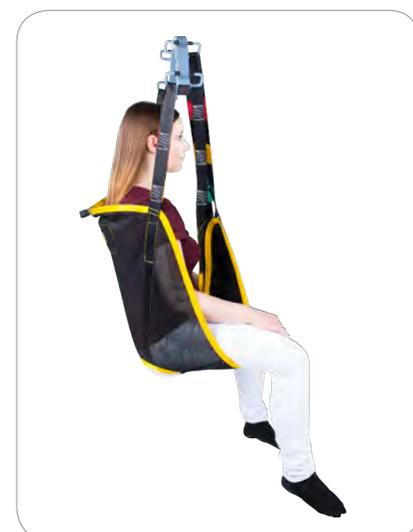

- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Abfließen von Wasser
- optional mit anklettbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5124	M 5125	L 5126
XL 5127	XXL 5128	3XL 5210
		4XL 5211

SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze

Universalgurt zum Baden mit Kopfstütze

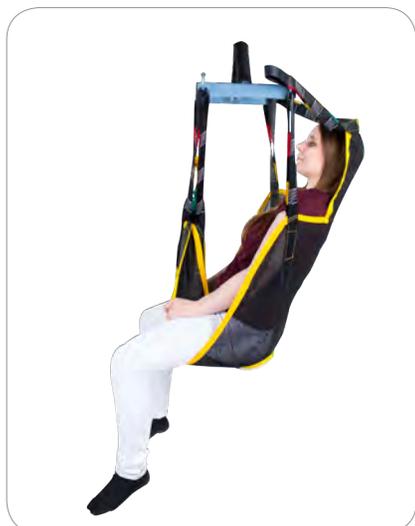

- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Abfließen von Wasser
- mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern




SLK Quick Transfer- und Toilettengurt

Transfer- und Toilettengurt für das schnelle Anlegen und Umsetzen



kg
320

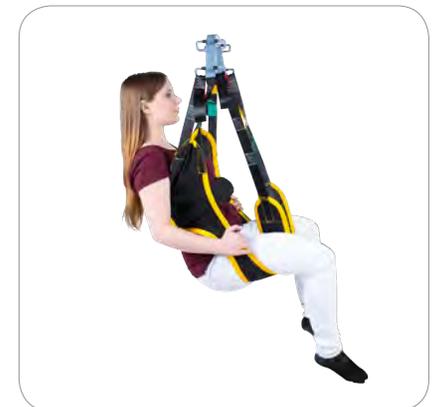

- besonders unkompliziert und schnell an- und abzulegen
- mit Rückenverstärkung und Brustschlaufe
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- optional mit adaptierbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- adaptierbare Kopfstütze: **5138**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5134



M
5135

L
5136

XL
5137

SLK Toilettengurt

Toilettengurt

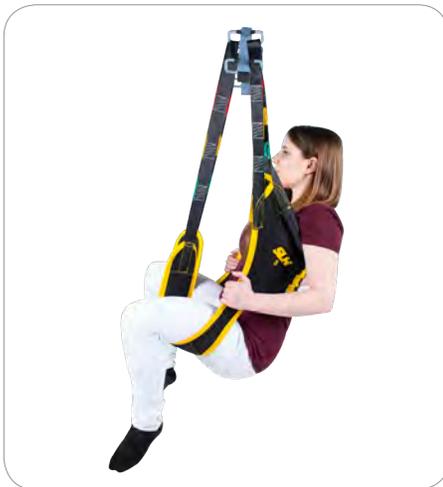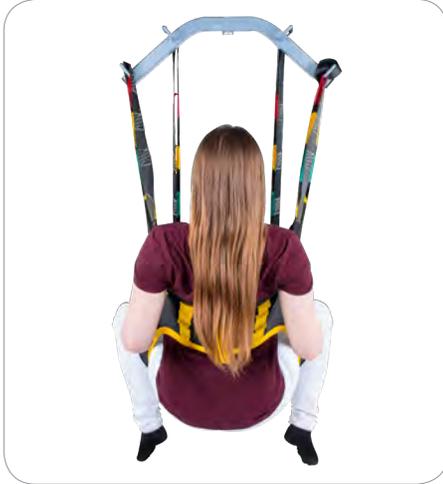

- schnelles An- und Auskleiden
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- optional mit adaptierbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- adaptierbare Kopfstütze: **5138**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien



Maße und Artikelnummern

S 5139	M 5140	L 5141
XL 5142	XXL 5143	3XL 5206
		4XL 5207

SLK Hammock Universalgurt



Gurt im Hängemattenschnitt für den allgemeinen Gebrauch

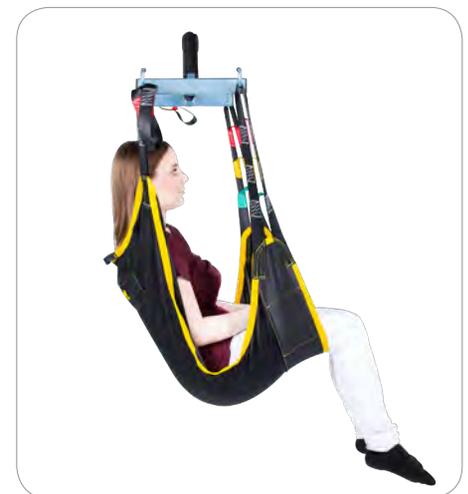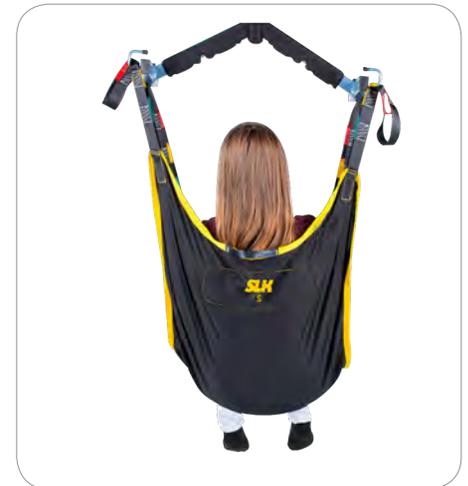

- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: 5118

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Hammock Badegurt

Gurt im Hängemattenschnitt für den allgemeinen Gebrauch im Bad

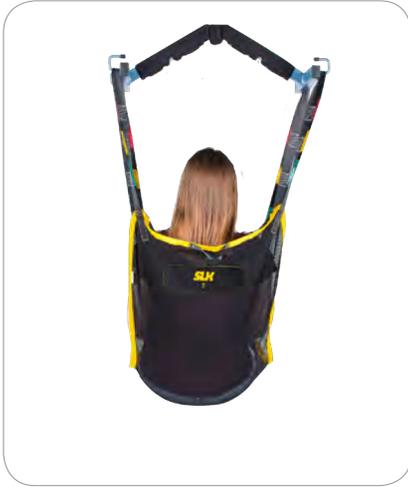

- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: 5118

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien


Maße und Artikelnummern

S 5149	M 5150	L 5151
XL 5152	XXL 5153	3XL 5202
		4XL 5203

SLK Hammock Sitzschalengurt



Sitzschalengurt für den Verbleib im Rollstuhl

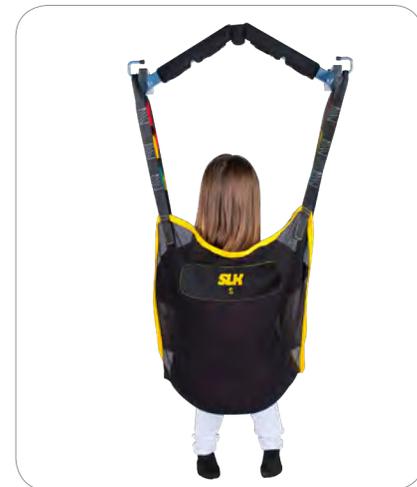

- anschmiegsamer Stoff, der die Konturen der Sitzschale annimmt
- ohne Nähte und Schlaufen im Rücken- und Gesäßbereich
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

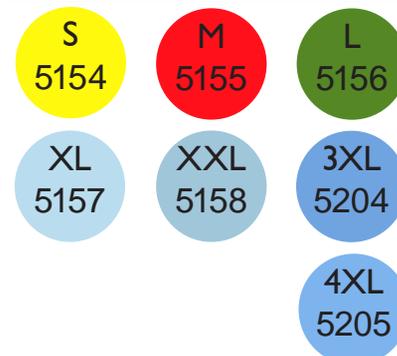

SLK Comfort-Liegegurt

Liegendtransfergurt für den halb liegenden Transport

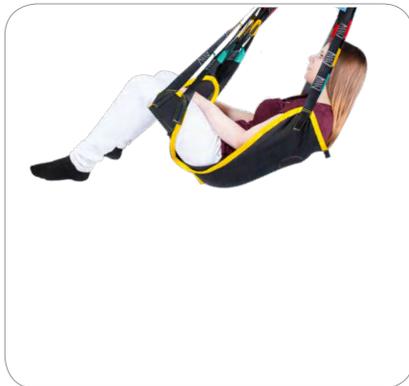

- nur mit Twin-Bügel möglich
- Einsatz einer anklettbaren Kopfstütze wird empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- Twin-Bügel und Kopfstütze werden empfohlen
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern





SLK Comfort-Liege-Badegurt



Liegendtransfergurt

für den halb liegenden Transport zum Baden

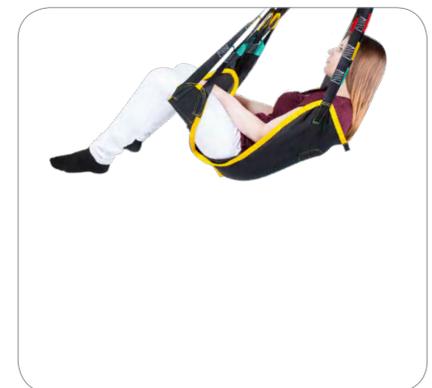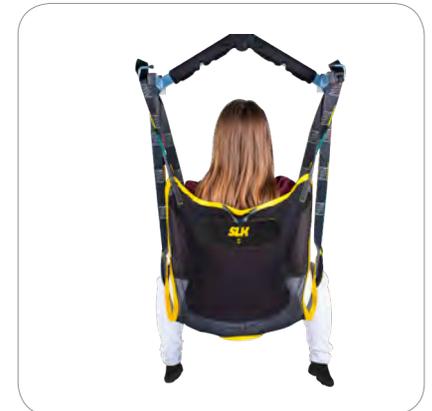

- nur mit Twin-Bügel möglich
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- Einsatz einer anklettbaren Kopfstütze wird empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- Twin-Bügel und Kopfstütze werden empfohlen
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Rücken-Fix-Gurt

Universalgurt



- Gurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
- für Patienten deren Rücken und Kopf extrem gestützt werden müssen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5169

M
5170

L
5171

XL
5172

SLK Rücken-Fix-Badegurt



Badegurt



- Gurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
- für Patienten deren Rücken und Kopf extrem gestützt werden müssen
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerrichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Maxi-Gurt

Universalgurt für schwergewichtige Patienten



- mit integrierter Kopfstütze
- in besonders großen Größen

Fakten

Geeignet für:

- Lifter mit Twin-Bügel XL
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

XXL
5177

3XL
5178

4XL
5179



we lift you up

www.slk-gmbh.de

SLK Aktivgurt

Aufrichtgurt für dual- und nach oben ziehende Aktivlifter



- gepolsterter Gurt zur Unterstützung beim Aufrichten
- zusätzlicher Bauchgurt für mehr Sicherheit
- höchster Tragekomfort

Fakten

Geeignet für:

- alle Aktivlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5100

M
5101

L
5102


XL
5103

XXL
5104

Aufrichtgurt mit Gesäßunterstützung für nach vorne ziehende Aktivlifter



kg
320

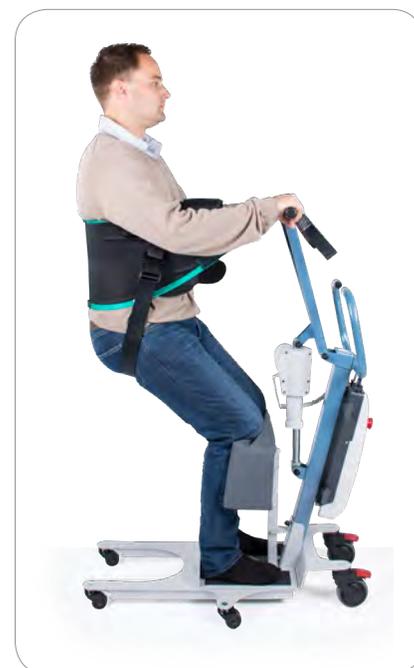

- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten
- zusätzlicher Gesäßgurt für mehr Sicherheit

Fakten

Geeignet für:

- Blue Wayup
- Wayup
- Wayup XL

- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

Aufrichtgurt für nach vorne ziehende Aktivlifter

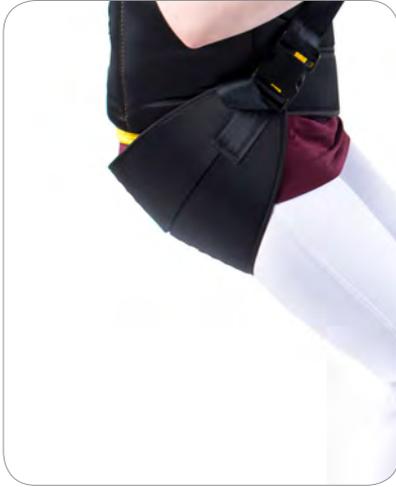

Sitzschaukel



- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten

Fakten

Geeignet für:

- Blue Wayup
- Wayup
- Wayup XL
- Easylev
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- Sitzschaukel mit Anti-Rutsch Gewebe
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

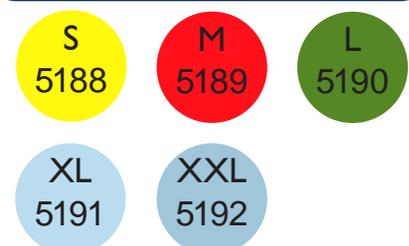




Technische Daten Liftergurte



medical solutions

Technische Daten

Liftergurte

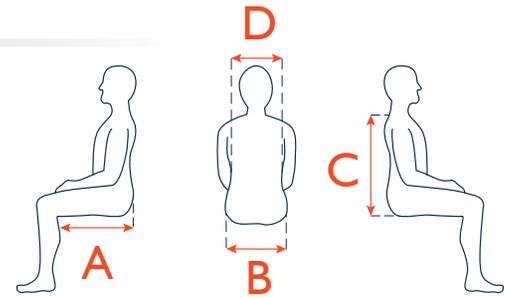

Gurte für Aktivlifter	A	C	D
SLK Aktivgurt in Größe S	-	21	60
SLK Aktivgurt in Größe M	-	25	75
SLK Aktivgurt in Größe L	-	29	88
SLK Aktivgurt in Größe XL	-	33	102
SLK Aktivgurt in Größe XXL	-	37	116
SLK Spezial Aktivgurt in Größe S	-	21	60
SLK Spezial Aktivgurt in Größe M	-	25	75
SLK Spezial Aktivgurt in Größe L	-	29	88
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe S	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe M	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe L	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XL	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XXL	25	68	-
Wadenband			

Gurte für Patientenlifter	A	B	C
SLK Universalgurt in Größe S	52	35	56
SLK Universalgurt in Größe M	60	37	58
SLK Universalgurt in Größe L	73	47	57
SLK Universalgurt in Größe XL	78	53	58
SLK Universalgurt in Größe XXL	81	65	64
SLK Universalgurt in Größe XXXL	84	77	70
SLK Universalgurt in Größe XXXXL	87	89	76
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe S	52	35	89
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe M	60	42	103
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe L	73	47	111
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XL	78	53	115
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XXL	81	65	123
SLK Universalgurt Bad in Größe S	52	35	56
SLK Universalgurt Bad in Größe M	60	44	58
SLK Universalgurt Bad in Größe L	73	47	57
SLK Universalgurt Bad in Größe XL	78	53	58
SLK Universalgurt Bad in Größe XXL	81	65	64
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXL	84	77	70
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXXL	87	89	76
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe S	52	35	89
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe M	60	45	103
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe L	73	47	111
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XL	78	53	115
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XXL	81	65	123

Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten


alle Maßangaben in cm

Gurte für Patientenlifter	A	B	C
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe S	93	35	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe M	105	37	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe L	115	47	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe XL	125	53	25
SLK Toilettengurt in Größe S	93	35	27
SLK Toilettengurt in Größe M	105	37	27
SLK Toilettengurt in Größe L	115	47	27
SLK Toilettengurt in Größe XL	125	53	27
SLK Toilettengurt in Größe XXL	135	65	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXL	145	77	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXXL	155	89	27
SLK Hammock Universalgurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Universalgurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Universalgurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Universalgurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Hammock Badegurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Badegurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Badegurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Badegurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Badegurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Comfort-Liegegurt in Größe S	59	35	53
SLK Comfort-Liegegurt in Größe M	65	37	57
SLK Comfort-Liegegurt in Größe L	70	47	61
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XL	75	53	65
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XXL	80	65	69
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe S	59	35	53
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe M	65	37	57
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe L	70	47	61
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XL	75	53	65
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XXL	80	65	69
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe S	59	35	88
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe M	66	37	92
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe L	71	47	96
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe XL	77	53	101
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe S	59	35	88
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe M	66	37	92
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe L	71	47	96
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe XL	77	53	101
SLK-Maxi Gurt in Größe XXL	100	65	92
SLK-Maxi Gurt in Größe XXXL	124	78	96
SLK-Maxi Gurt in Größe XXXXL	146	91	101


alle Maßangaben in cm

Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten


anklebbare Kopfstütze

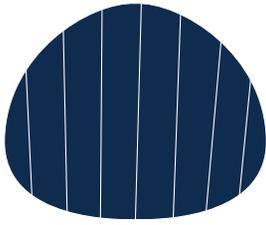

adaptierbare Kopfstütze mit Verstärkung

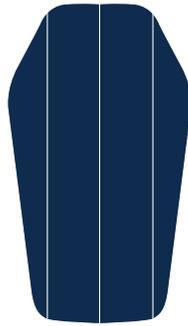


SLK Toilettengurt

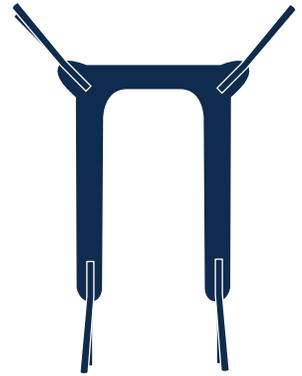


Wadenband




SLK Spezial Aktivgurt

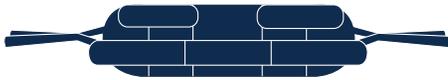

SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

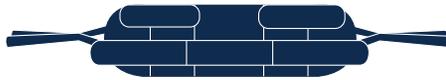

SLK Quick Transfer- und Toilettengurt

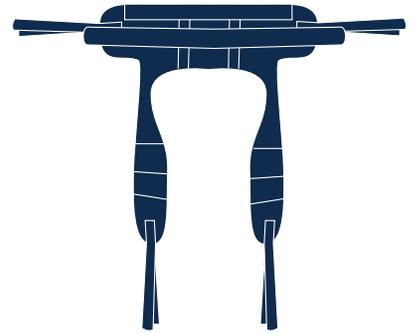


SLK Aktivgurt



Sitzschaukel




SLK Universalgurt

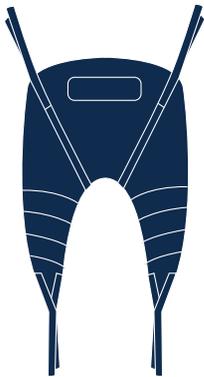

SLK Universalgurt mit Kopfstütze




SLK Rücken-Fix-Gurt

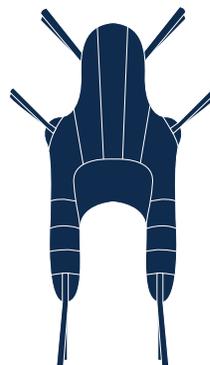


SLK Maxi-Gurt




SLK Hammock Sitzschalengurt

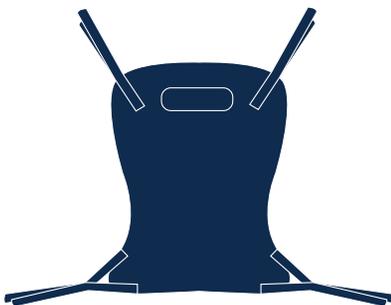

SLK Hammock Universalgurt

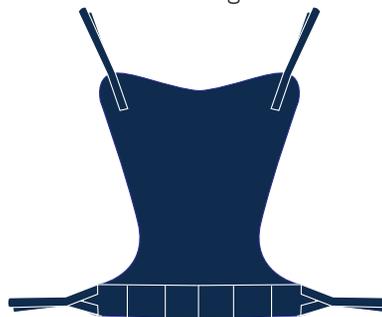

SLK Comfort-Liegegurt

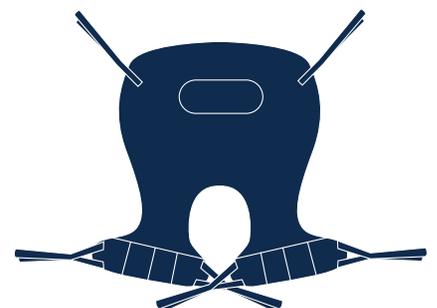



Zubehör



medical solutions

SLK-Lifterwaage

Die SLK-Lifterwaage kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragegewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für schwergewichtige Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5186

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage



SLK-eichfähige Lifterwaage

Die SLK-eichfähige Lifterwaage ist ab Werk erstgeeicht und kann somit für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Sie kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragegewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für adipöse Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5183

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage



ergolet Wandladestation

Mit der Wandladestation können Akkus von Deckenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden.

Die magnetisch haftende Handbedienung ermöglicht ein einfaches Bedienen des Deckenlifters. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 6041

geeignet für alle ergolet (Luna) Deckenlifter





SLK Carry Wandladestation

TiMotion Antriebssystem

Mit der Wandladestation können Akkus von Patientenhilfen unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden.

Diese kann gleichzeitig auch als Tischladestation verwendet werden.

Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 8454

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenhilfen

Ladegerät optional erhältlich

Artikelnummer: 8450

Lieferumfang: ohne Akku

SLK Wandladestation

UMEC Antriebssystem

Mit der Wandladestation können Akkus von Patientenhilfen unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden.

Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 5182

geeignet für alle SLK-Patientenhilfen (außer SLK Carry 185)

Lieferumfang: ohne Akku



Carry 2-Punkt-Bügel

Der Carry 2-Punkt-Bügel besteht durch seine einfache und schnelle Handhabung. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 7047 (Telegrau) für SLK Carry 185 Classic

Artikelnummer: 8054 (Silber) für SLK Carry 185 Pro & Pro L



Carry 4-Punkt-Bügel

Der Carry 4-Punkt-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl.

Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8060 (Silber)

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenhilfen

Carry 4-Punkt-Bügel Basic

Der Carry 4-Punkt-Bügel Basic ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8064 (Telegrau)

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenlifter



Wir empfehlen den Einsatz des Carry 4-Bügels u.a. bei:

- adipösen Patienten
- schmerzempfindlichen Patienten
- Patienten die zu Streckspastiken neigen

Twin-Bügel

Der Twin-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl.

Artikelnummer: 5181

geeignet für SLK Blue Flyer Plus und SLK Flyer Plus



Twin-Bügel-Compact

Der Twin-Bügel-Compact ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders angenehmes Transportgefühl.

Artikelnummer: 5180

geeignet für SLK Blue Flyer Compact



anklettbare Kopfstütze

Die anklettbare Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein Twin-Bügel empfohlen.

Artikelnummer: 5118

geeignet für Gurte mit passender Vorrichtung



adaptierbare Kopfstütze mit Verstärkung

Die adaptierbare Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf-, Nacken- und Rückenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein Twin-Bügel empfohlen.

Artikelnummer: 5138

geeignet für SLK Toilettengurt und den SLK Quick Transfer- und Toilettengurt



Gewichtetrolley 220 kg

für den Maximal-Lasttest
als Teil der Lifterwartung



ohne Last



aufgehängter Zustand



mit Last



- für die Funktionsprüfung von Patientenliftern mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem Gewichtetrolley einfach auf ihren Patientenlifter anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

Gewichtetrolley 220 kg

Maximallast: 220 kg

Artikelnummer:

- Gewichtetrolley: 5470

Technische Daten

Material:

- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugelgelagert

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Lieferumfang

- Gestell mit Rollen ohne Gewichte
- Zugdeichsel
- Schäkel
- Bolzen mit SL-Sicherung

Gewichtetrolley 440 kg




für den Maximal-Lasttest als Teil der Lifterwartung



ohne Last



aufgehängter Zustand
(Test bei einem 185 kg Lifter)

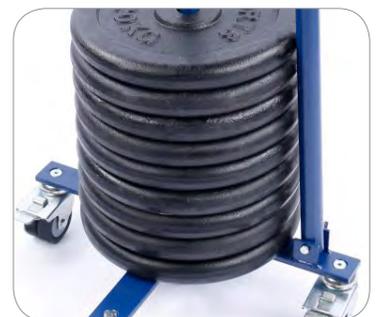

mit Last

- für die Funktionsprüfung von Patientenhilfen mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem Gewichtetrolley einfach auf ihren Patientenhilfen anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Hilfen geeignet

Gewichtetrolley 440 kg

Maximallast: 440 kg

Artikelnummer:

- Gewichtetrolley: 5474

Technische Daten

Material:

- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugelgelagert

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Lieferumfang

- 2 Gestelle mit Rollen ohne Gewichte
- Zugdeichsel
- 2 Schäkel
- 2 Hebebänder
- Bolzen mit SL-Sicherung



Deckenlifter



medical solutions


Wir bieten Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Full Service-Paket:

- Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten
- Aufmaß der Räumlichkeiten
- individuelle Angebotserstellung
- Installation des Deckenlifters
- Wartung des Deckenlifters

Auf uns als kompetenten Partner können Sie sich verlassen


Installationsbeispiele

Beispiele aus einer Wohnung

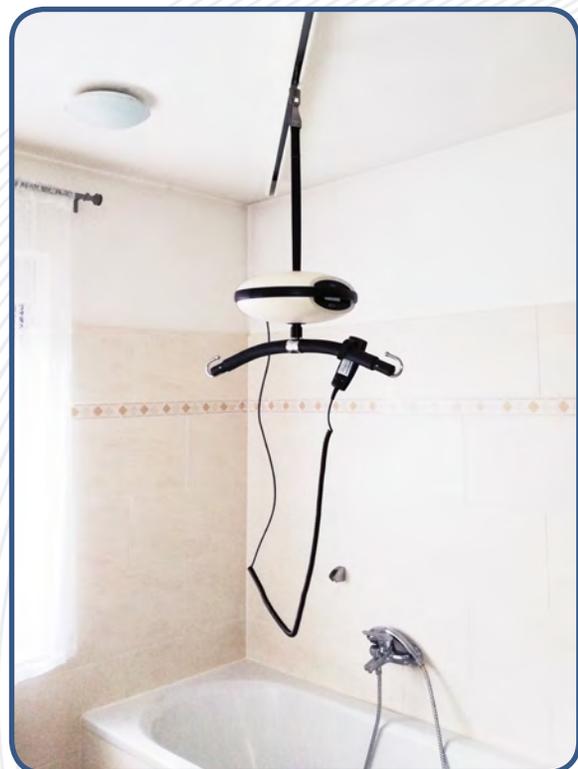

Installationsbeispiele

Beispiele aus einer Klinik

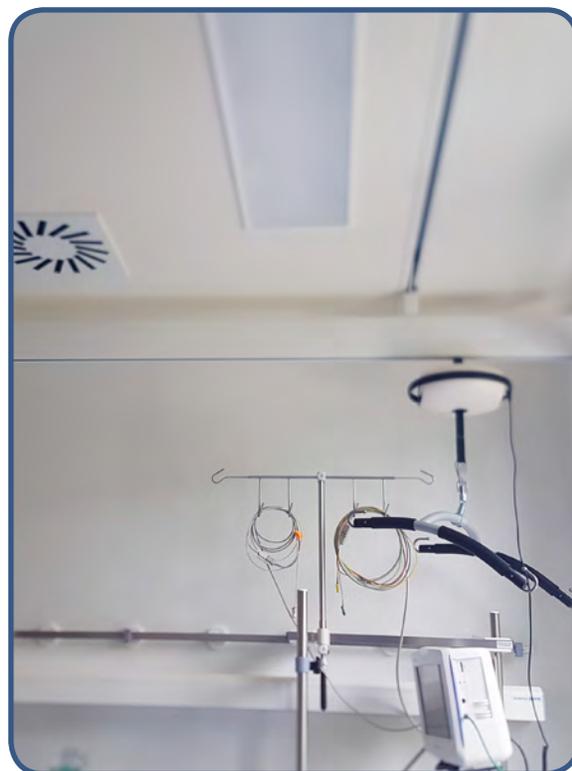

Luna Portable



portable Deckenlifterkassette




kg
200

kg
275



Walking Sling

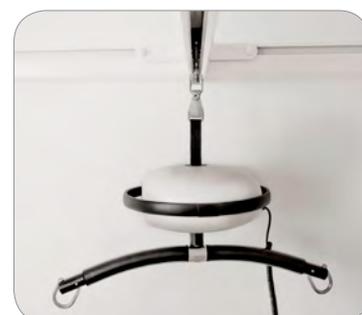

- portables System zum Einsatz in mehreren Räumen
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- je nach Liftermodell ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Stationär

stationäre Deckenliftekassette



kg
200

kg
275

- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- nahezu überall installierbar
- hoher Benutzerkomfort durch fixiertes Deckenmodul
- optimale Lifterlösung für den Transfer in die Badewanne
- je nach Liftermodell ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Room to Room




portable Deckenlifternkassette



kg
200

kg
275

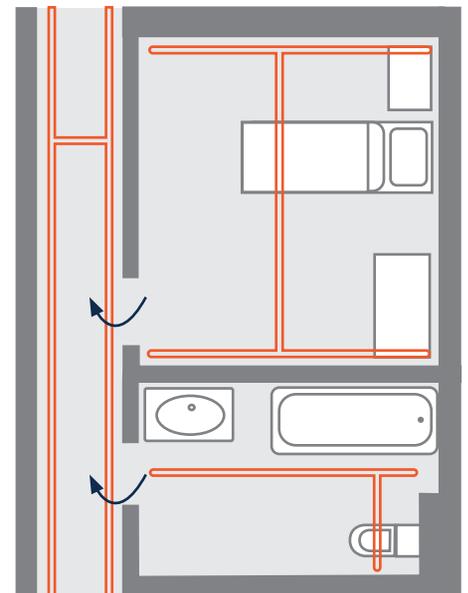

Aufriss einer Wohnung mit Deckenliftern

- sicherer Patiententransport von Raum zu Raum
- keine Türdurchbrüche für den Transport von Raum zu Raum nötig
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- je nach Liftermodel ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Twin Set

Schwerlast Deckenliftersystem



besonders sichere, patentierte Gurtaufnahme



Handbedienung



Deckenlifterschiene



- für schwergewichtige Personen geeignet
- ein garantiert sicheres und komfortables Liften bis zu einem Patientengewicht von **400 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Mover



Motorisierter Fahrwagen



- abnehmbarer Deckenlift
- nahezu überall installierbar
- moderate Laufgeschwindigkeit
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Sicherheitssystem: Handbedienug bei Defekt oder Stromausfall
- Patientenkomfort: Der Luna Mover funktioniert im Tipp-Betrieb, das heißt: Er stoppt sofort, wenn die Handbedienung nicht mehr betätigt oder ganz losgelassen wird
- je nach Liftermodel ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **275 kg**

2-Ständer-System und 4-Ständer-System



4-Ständer-System



Komfort-Rollen



- ideale Lösung für Räume in denen temporär ein Deckenliftsystem benötigt wird
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- kann ohne spezielle Werkzeuge verstellt werden, so dass das Heben in allen Situationen möglich ist
- Leichtbau-System zum einfachen Aufbau
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Tragkraft von bis zu **200 kg**



Transfer- und Positionierungshilfen



medical solutions

SLK Quick Stand

Hebegurt



- rüchkschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rüchkschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung im Stand

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

M
5704

L
5705

XL
5706

Haltegurt



- rüchenschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rüchenschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung beim Gehen
- 6 Grifflchlaufen zur Unterstützung
- einfache Handhabung
- verstellbarer und automatisch zentrierender Verschluss an der Vorderseite
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5700

M
5701

L
5702

XL
5703

SLK Quick Slide mit Schlaufen



Gleit-/Wendelaken



- dient zum Umlagern von normalen bis hin zu extrem adipösen Patienten
- Griffschlaufen zur Unterstützung
- Stoff mit guten Gleiteigenschaften

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- silikonbeschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

130x70
5712

140x110
5713

195x70
5714

Maße in cm

SLK Easy Bauchgurt

Bauchgurt



- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

one size
5722

SLK Easy Hosengurt



Hosengurt



- optimale Unterstützung der Beckenpositionierung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials in die Oberschenkel
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service


Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

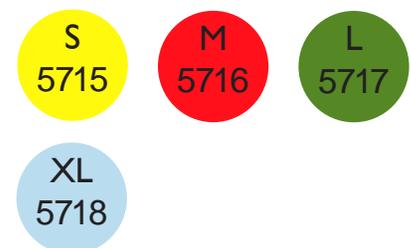

SLK Easy Weste

Gurtweste



- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

one size
5724



Chemothermische Aufbereitung im eigenen Hygienecenter Dortmund



medical solutions

Chemothermische Aufbereitung

Hygienecenter Dortmund



Hochwertige Antidekubitus-Systeme werden für den Wiedereinsatz beim Patienten gereinigt und desinfiziert. Die sichere und nachvollziehbare hygienische Aufbereitung ist hier eine besondere Herausforderung.



SLK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mutters von der Universität Marburg ein validiertes Aufbereitungsverfahren entwickelt, welches nicht nur sicher Krankheitserreger bekämpft, sondern gleichzeitig das Material schont, und so eine lange Lebensdauer der Hilfsmittel gewährleistet.



Die moderne Anlage zur Chemothermischen Aufbereitung nutzt eine Kombination aus Temperatur und Chemikalien, welche sich nach den Vorgaben des Robert Koch Institut richtet. Die Wirksamkeit unseres Waschverfahrens wird regelmäßig vom Hygieneinstitut Hohenstein überwacht.



Die Anlage ist konsequent in eine reine und eine unreine Seite getrennt. Stark verschmutzte Bestandteile (beispielsweise Bezüge und Transporttaschen) werden in speziellen Waschmaschinen gereinigt, während Luftkammern und Unterbauten in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsstraße aufbereitet werden. Dieses Verfahren gewährleistet minimale mechanische Belastung bei maximaler hygienischer Wirksamkeit.

Nach erfolgter Desinfektion gelangen die Systeme in die reine Seite. Hier werden Funktionskontrollen und messtechnische Prüfungen durchgeführt.

Abschließend werden die Systeme in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und zusammen mit einem Hygienezertifikat in neuen Kartonagen zum Kunden geschickt. Bei weiteren Fragen zur Aufbereitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



A large rectangular area consisting of 30 horizontal grey lines, intended for taking notes.

DIE RICHTIGE VERSORGUNG



Produkte

- Lagerungssysteme zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- Systeme zur Apparativen Intermittierenden Kompressionstherapie mit entsprechenden Mehrkammermanschetten für verschiedene Anwendungsgebiete
- Patientenlifter für Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Schulung

- Produktschulungen zu unseren SLK®-Systemen
- Schulungen zum Thema Dekubitus (Ursachen, Therapieformen usw.)
- Apparative Intermittierende Kompressionstherapie (Produkt- und Anwenderschulung für SLK®-Produkte)
- Patientenlifter für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich

Service

- schnelle Lieferung von Produkten
- sichere und zeitnahe chemothermische Aufbereitung und Prüfung von Antidekubitussystemen nach validiertem Verfahren
- regelmäßige Kontrolle der Aufbereitung durch ein international anerkanntes Hygieneinstitut
- aufbereitete Systeme werden in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und in neuen Kartons verschickt
- Wartung und Reparatur von SLK®-Produkten
- Aufbereitung mit Wartung und Ableitstromprüfung gem. DIN EN 62353
- Reparatur von Fremdsystemen auf Anfrage
- hohe Sicherheit beim Wiedereinsatz



SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop
Telefon: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 0
Telefax: +49 (0) 231 / 92 53 60 - 29
www.slk-gmbh.de
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Stand: Juni 2019
VSNR: 10