



Gesamtkatalog

Wechseldrucksysteme **Patientenlifter**
Schaumstoffsysteme Hybridsysteme
Kompressionstherapie Schulungen
Service Chemothermische Aufbereitung
Transfer- und **Positionierungshilfen**



Inhaltsverzeichnis

Intermittierende Kompressionstherapie

SLK Varilymph I 2 Pro	7-12
-----------------------	------

Wechseldrucksysteme

SLK Eco I + 2	14
SLK I	15
SLK II	16
SLK III	17
SLK IV	18
SLK Pain&Therapy	19
SLK KiddyCare Digital	20
SLK FreeChair Professional	21

XXL Schwerlast-Lagerungssysteme

SLK IV XXL 90 x 200 cm	23
SLK IV XXL 120 x 200 cm	24
SLK XXL Foam	25
SLK Frame	26

Schaumstoff- und Hybridsysteme

SLK NeoCare Basic	27
SLK NeoCare I	27
SLK NeoCare II	28
SLK FoamCare Comfort	29
SLK ProfiSoft Comfort	30
SLK ViscoCare Comfort	31
SLK Silver Sleep	32
Ersatzbezüge: SLK Bi-Stretch, SLK Touch of Silver	33
SLK Evakuierungstuch	34
SLK Evakuierungsbezug	35
SLK GreenCare	36
SLK BlueCare	37

mobile Patientenlifter

SLK Carry I 85 Classic	40
SLK Carry I 85 Pro	41
SLK Carry I 85 Pro L	42
SLK Multy Universallifter	43
SLK Blue Flyer Compact	44
SLK Flyer XL	45

mobile Aktivlifter

SLK Multy Aktivlifter	47
SLK Blue Wayup	48-49
SLK Wayup	50-52
SLK Easylev	52-53
SLK Wayup XL	54
Technische Daten Patientenlifter & Aktivlifter	56-57
Größentabelle Liftergurte	60

Gurte für Patientenlifter & Aktivlifter

SLK Universalgurt	61
SLK Universalgurt mit Kopfstütze	62
SLK Universalgurt Bad	63
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze	64
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt	65
SLK Toilettengurt	66
SLK Hammock Universalgurt	67
SLK Hammock Badegurt	68
SLK Hammock Sitzschalengurt	69
SLK Comfort-Liegegurt	70
SLK Comfort-Liege-Badegurt	71
SLK Rücken-Fix-Gurt	72
SLK Rücken-Fix-Badegurt	73
SLK Maxi-Gurt	74
SLK Aktivgurt	76
SLK Spezial Aktivgurt	77
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	78
Technische Daten Liftergurte	80-81

Lifterzubehör

SLK Lifterwaage, SLK eichfähige Lifterwaage, SLK Waagenadapter	84
SLK Carry Wandladestation, SLK Carry Wandladestation & Ladegerät	85
SLK Wandladestation	85
SLK 2-Punkt-Bügel	86
SLK 4-Punkt-Bügel	86
SLK 4-Punkt-Bügel Basic	86
SLK Twin-Bügel	87
SLK Stoßkappe & Bügelschutz	87
anklettbare SLK Kopfstütze	88
adaptierbare SLK Kopfstütze mit Verstärkung	88
SLK Verlängerungsschlaufen	88
SLK Multy Umrüstkits	89
SLK Gewichtetrolley 220 kg	90
SLK Gewichtetrolley 440 kg	91

Deckenlifter

SLK Luna Portable	95
SLK Luna Stationär	96
SLK Luna Room to Room	97
SLK Luna Twin Set	98
SLK Luna Mover	99
SLK Mobile Flex	100

Transfer- und Positionierungshilfen

SLK Quick Stand	102
SLK Quick Hold	103
SLK Quick Slide	104
SLK Quick Slide mit Schlaufen	105
SLK Easy Bauchgurt	106
SLK Easy Hosengurt	107
SLK Easy Weste	108

Chemothermische Aufbereitung

SLK Hygienecenter	110
-------------------	-----



**Der Name SLK steht für Qualität „Made in Germany“.
Service und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle.**

Wer wir sind

Die SLK Vertriebsgesellschaft mbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen, gegründet 1998, mit Sitz in Waltrop. SLK hat Patienten und ihre medizinischen Bedürfnisse besonders im Fokus.

Was wir wollen

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir Wert darauf, dass therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Gerade bei Medizinprodukten ist eine schnelle Lieferung und ein umfangreicher Service ein wichtiger Faktor, der oft über den Behandlungserfolg entscheidet. Aus diesem Grund werden unsere Hilfsmittel standardmäßig am Tag der Bestellung versendet. Bundesweit steht unser Außendienst den Fachhandelspartnern vor Ort und auch beim Patienten zur Seite.

Weltweit ist SLK durch Stützpunkthändler vertreten. Regelmäßige Schulungen und Trainingsprogramme sichern einen hohen Standard bei der Versorgung der Patienten.

Produktportfolio

Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Lagerungs- und Kompressionssysteme sowie Patientenlifter, Transfer- und Positionierungshilfen für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige und besonders robuste Materialien aus.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kompressionstherapie

Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

20 Jahre Fachhandelstreue

SLK arbeiten ausschließlich
mit dem Fachhandel zusammen...



medical solutions

Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

Kompressionstherapie

Der Einsatz von Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) ist in der modernen medizinischen Versorgung von Lymphödemen und Lipödemen Standard geworden. Ein leistungsstarker Kompressor mit einer intelligenten Steuerung sorgt für einen effektiven und gleichzeitig schonenden Abtransport von Flüssigkeit. Der Druck und die Therapiedauer kann genau an den Patienten und seine Bedürfnisse angepasst werden. Durch die überzeugenden Behandlungserfolge setzt die Varilymph 12 Pro neue Maßstäbe in der apparativen Entstauungstherapie.

Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- venöse Ödeme
- Ödem-Mischformen
- Ulcus cruris
- postthrombotisches Syndrom
- posttraumatische Ödeme
- sensorische Störung bei Hemiplegie
- Thromboembolieprophylaxe
- diabetischer Fußdefekt
(im Rahmen eines komplexen Behandlungskonzept)
- periphere arterielle Verschlusskrankheit
(im Rahmen eines komplexen Behandlungskonzept)

Vorteile der AIK


- Therapiefreie Zeiten wie Wochenenden und Urlaub können überbrückt werden
- Der Patient ist flexibel in der Wahl des Therapiezeitpunktes und kann so Beruf, Termine, Haushalt und / oder Kinder mit seiner Therapie besser vereinbaren
- Er kann bei akuten Beschwerden (z.B. bei warmen Wetter) spontan reagieren
- sinnvolle Ergänzung zur manuellen Lymphdrainage und Kompressionsbestrumpfung

Kontraindikationen

- dekompensierte Herzinsuffizienz
- Erysipel
- akutes Weichteiltrauma der Extremitäten
- okkludierende Prozesse im Lymphabstrombereich
- ausgedehnte Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht
- Lungenödem
- frischer Myokardinfarkt
- schwere nicht eingestellte Hypertonie
- Neuropathie


Funktionsprinzip Kompressionstherapie

Nach dem Start der Therapie werden die 12 Kammern der Behandlungsmanschette angesteuert und mit Luft befüllt (im Bild blau dargestellt).

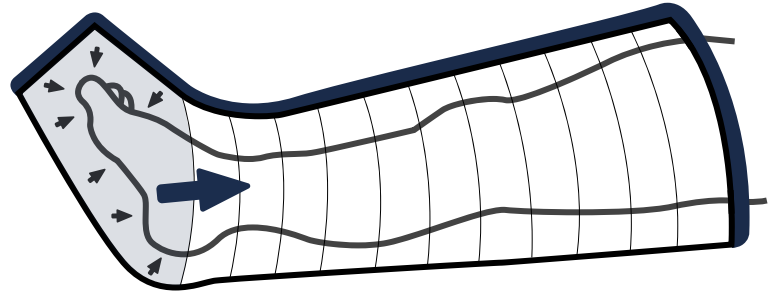

Die Dauer der Befüllung hängt neben der gewählten Befüllungszeit auch von der Anatomie des Patienten und den zu versorgenden Körperteilen ab.


Im Verlauf der Therapie werden nach und nach alle weiteren Kammern der Behandlungsmanschette befüllt. Durch diesen Prozess wird Gewebeflüssigkeit in proximaler Richtung abtransportiert (blauer Pfeil) und so das Ödem reduziert.

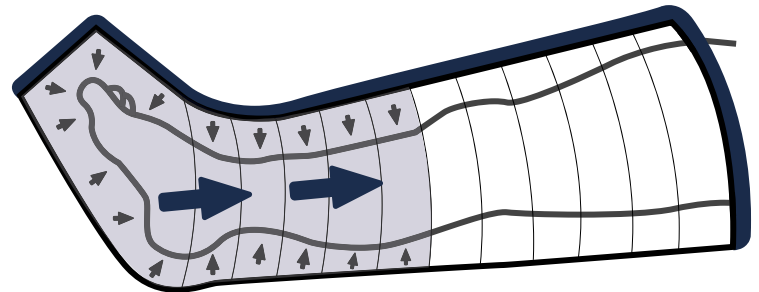

Der Druck kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden, dieser sollte durch den behandelnden Arzt vorgegeben werden.

Sind alle Kammern gefüllt, entweicht je nach eingestellter Zeit, die Luft aus allen Kammern der Manschette gleichzeitig.

Der Zyklus beginnt nach einer Pause jeweils wieder von vorne. Ein Rückstau von Flüssigkeit wird somit ausgeschlossen.

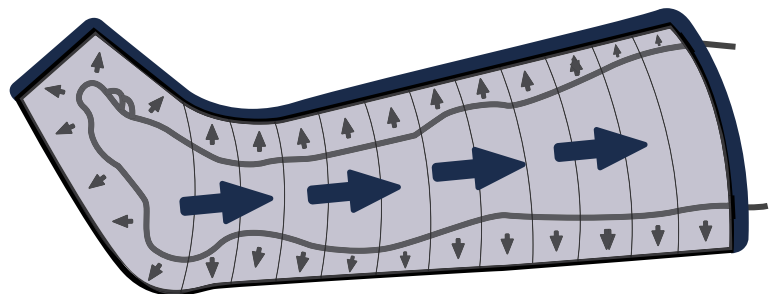

effektiver & schonender Abtransport von Flüssigkeit

Behandlungsmanschetten

Kompressionstherapie

Der richtige Einsatz der Behandlungsmanschetten

Für den Erfolg der Kompressionstherapie ist die Verwendung der passenden Behandlungsmanschetten entscheidend.

Die richtige Manschette

- muss dem Bein- oder Armumfang angepasst sein
- sollte ausreichend lang sein
- bei Lymphödemen und Lipödemen (die das ganze Bein umfassen bzw. die bis oberhalb des Beckenkamms reichen) sollte die Manschette den Beckenbereich umschließen. Hier ist eine Kompressionshose von Vorteil. Durch die zusätzliche Stimulanz im Leisten-, Bauch- und Beckenbereich wird eine verbesserte Entstauung erzielt.

Für eine optimale Passform sind die Behandlungsmanschetten individuell anpassbar. Zur Verfügung stehen: Bein-, Hose-, Jacke- und Arm-Schultermanschetten mit Erweiterungssätzen.



Kompressionshose

mit verstellbarem Fußteil

- normal Artikel-Nr.: **4031**
mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm

Erweiterungssatz Kompressionshose

- normal Artikel-Nr.: **4034**
- kurz Artikel-Nr.: **4040**
- Fußteil Artikel-Nr.: **4038**

Behandlungsmanschetten

Kompressionstherapie



Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4030**
- kurz Artikel-Nr.: **4037**
- weit Artikel-Nr.: **4035**

Erweiterungssatz Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4033**
- kurz Artikel-Nr.: **4039**



Arm-Schultermanschette

- normal Artikel-Nr.: **4043**



Kompressionsjacke

- Universalgröße Artikel-Nr.: **3075**

halbe Kompressionsjacke

- Universalgröße Artikel-Nr.: **3077**

Erweiterungssatz Kompressionsjacke

- Arm Artikel-Nr.: **4070**
- Rücken Artikel-Nr.: **4071**



	☒ ↓	Art.-Nr.	Artikel	Maße			
				Länge	Umfang		
					oben ¹	mitte ²	unten ³
Steuereinheit		4000	Varilymph 12 Pro HM-Nr.: 17.99.01.1018		Oberschenkel ¹	Knie ²	Knöchel ³
Manschetten - Standard		4030	Beinmanschette normal	81 cm	75 cm	60 cm	45 cm
		4037	Beinmanschette kurz	70 cm	70 cm	58 cm	47 cm
		4035	Beinmanschette weit	87 cm	89 cm	81 cm	72 cm
		4043	Arm-Schultermanschette	unten: 67 cm Schulter: 85 cm	Schulter oben 58 cm	Ellenbogen 53 cm	Hand 50 cm
		4031	Kompressionshose normal mit flexiblen Fußteil (Bundweite 140 cm)	ohne Fußteil 118 cm	72 cm	68 cm	60 cm
		3075	Kompressionsjacke Universalgröße				
		3077	halbe Kompressionsjacke Universalgröße				
Manschetten - Erweiterungen		4033	Erweiterung für Beinmanschette normal (4030)		20 cm		10 cm
		4039	Erweiterung für Beinmanschette kurz (4037)		20 cm		10 cm
		4034	Erweiterung für Kompressionshose normal (4031)		21 cm		12 cm
		4040	Erweiterung für Kompressionshose kurz (4029)		21 cm		10 cm
		4038	Erweiterung für Fußteil Kompressionshose (4031 und 4029)		Knöchel 13 cm		Spann 10 cm
		4070	Erweiterungssatz Kompressionsjacke Arm	95,5 cm	7 cm		7 cm
		4071	Erweiterungssatz Kompressionsjacke Rücken	45,5 cm	6,5 cm		6,5 cm
Zubehör		4036	Verbindungsschläuche				
		3067	Netzkabel				

Informationen		Hinweis zum flexiblen Fußteil: Umfang Fußspitze: 29 cm Länge Fußteil: 30 cm Umfang Knöchel: 47 cm Höhe Fußteil: 24 cm
		Wichtig! Bei Bestellung von Erweiterungen auf den Reißverschlußtyp achten! Spiralreißverschluss oder Krampenreißverschluss Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Varilymph

SLK Varilymph 12 Pro®

digitales Kompressionstherapiegerät



MADE
IN
GERMANY



hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten



verdrehsicher konstruierter
Anschlussstecker

Varilymph 12 Pro

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK 12-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

Technische Daten

- Druckbereich: von 15 bis 80 mmHg
- Therapiedauer: von 15 bis 60 Min.
- Entlüftung: 10 bis 120 Sek.
- Befüllung: 20 bis 120 Sek.
(Befüllungs- und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)

Maße





- Maße Steuereinheit: 17 x 20 x 20 cm (H x B x T)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang

- SLK Varilymph 12 Pro Kompressionstherapiegerät
- Netzkabel
- Verbindungsschlauch

Dekubitusprophylaxe

Wechseldrucksysteme
Schaumstoff- und Hybridsysteme
für die Dekubitusprophylaxe und -therapie

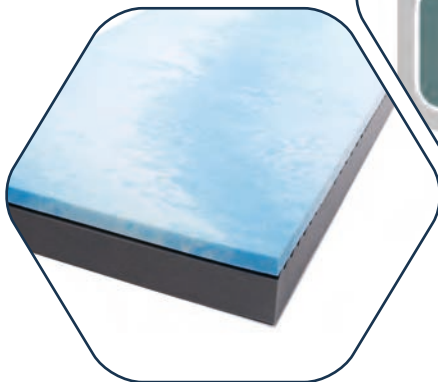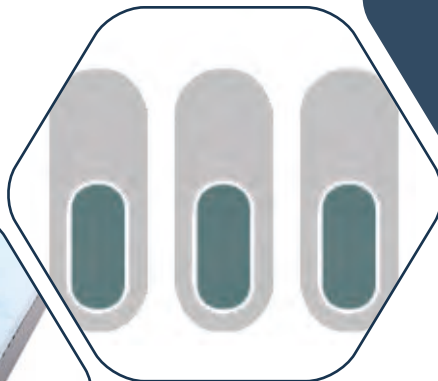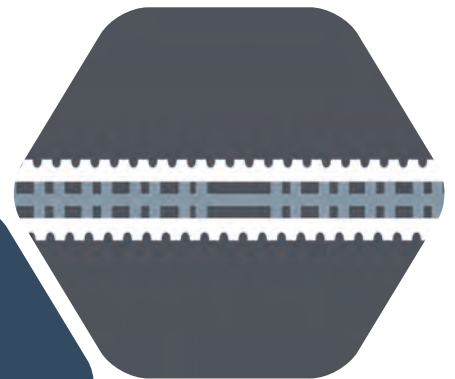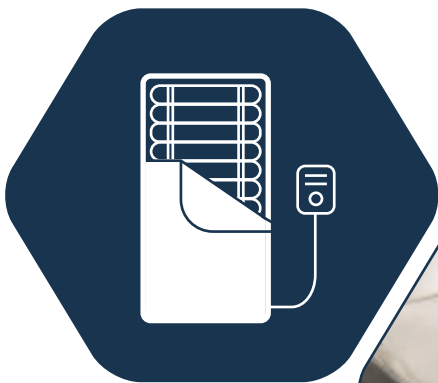

medical solutions

SLK ECO I+2

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Fakten

- max. Patientengewicht: 30-140 kg
 - Dekubitusstadium: 1 bis 11
 - bei niedrigem bis mittlerem Risiko
 - großzelliges Matratzenauflagesystem
 - 17 Nylon-beschichtete Polyurethanzellen
 - Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
 - akustischer Alarm bei niedrigem Druck
 - sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
 - SLK Care-TextTM Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
 - Desinfektionsmittelbeständigkeit
 - flüssigkeitsundurchlässig
 - Bezug ist bis 60 °C waschbar
 - CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß (siehe S. 26)**

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 15 x 30 x 9 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 5,7 kg

Lieferumfang

- SLK Eco I+2 Auflage inkl. Steuereinheit und Care-TextTM Bezug



Polyurethanzellen



SLK Care-TextTM Bezug,
CPR-Funktion


Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1018
Artikel-Nr.: 1781 (90 x 200 cm)

SLK I®

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Nylon-Luftstromkissen

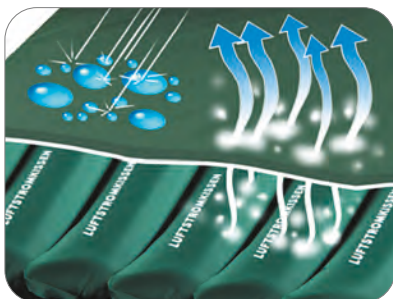

SLK Soft-Care-Text™ Bezug

Fakten

- max. Patientengewicht: 40-130 kg
 - Dekubitusstadium: 1 bis 11
 - bei niedrigem bis mittlerem Risiko
 - großzelliges Matratzenauflegesystem
 - 17-Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
 - Statik- und Wechseldruckmodus
 - optischer Alarm bei niedrigem Druck
 - sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
 - SLK Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
 - CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß (siehe S. 26)**

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 6 kg

Lieferumfang

- SLK I® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Text™ Bezug

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1005
Artikel-Nr.: 1603 (90 x 200 cm)

SLK II®


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch in
90 x 220 cm
erhältlich



Polyurethan-Luftstromkissen

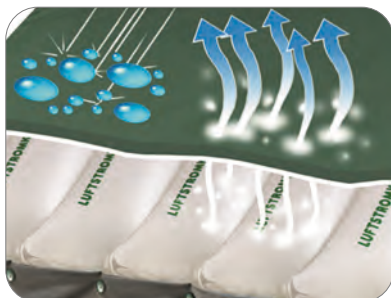

SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Fakten

- max. Patientengewicht: 40-135 kg
 - Dekubitusstadium: 1 bis III
 - bei niedrigem bis hohem Risiko
 - großzelliges Matratzenauflagesystem
 - 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
 - Statik- und Wechseldruckmodus
 - Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
 - optischer Alarm bei niedrigem Druck
 - sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
 - SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
 - CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß (siehe S. 26)**

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 8 kg

Lieferumfang

- SLK II® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Hilfsmittel-Nr.: II.29.04.1007

Artikel-Nr.: I701 (90 x 200 cm), I735 (90 x 220 cm)

SLK III®


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch in
90 x 220 cm
erhältlich



Cell-in-Cell-System

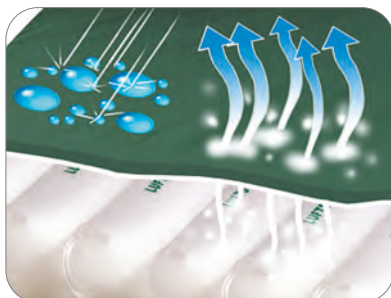

SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Fakten

- max. Patientengewicht: 40-195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 111
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 21 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 15 kg

Lieferumfang

- SLK III® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.1009**Artikel-Nr.: 1702 (90 x 200 cm), 1706 (90 x 220 cm)**

SLK IV®

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch in
90 x 220 cm
erhältlich



Cell-in-Cell-System



integrierte Kissentasche

Fakten

- max. Patientengewicht: 40-250 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagerung und Spitzfußprophylaxe

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3004

Artikel-Nr.: 1703 (90 x 200 cm), 1751 (90 x 220 cm)

Pain&Therapy

SLK Pain&Therapy®


Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie



auch in
90 x 220 cm
erhältlich



Polyurethan Luftstromkissen

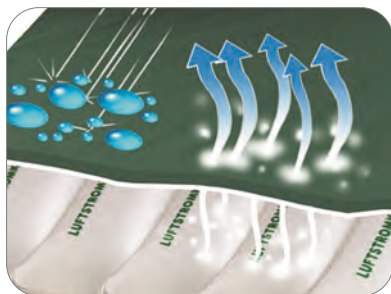

SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Fakten

- max. Patientengewicht: 30-135 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 1V
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation

optional: SLK Frame im Standardmaß (siehe S. 26)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff, 19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

Lieferumfang

- SLK Pain&Therapy® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage


Hilfsmittel-Nr.: II.29.08.3005

Artikel-Nr.: 1704 (90 x 200 cm), 1779 (90 x 220 cm)

KiddyCare

SLK KiddyCare Digital®

Pulsationssystem speziell für Kinder zur Dekubitus- und Schmerztherapie

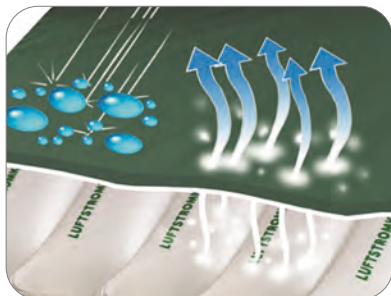

SLK Soft-Care-Tex™ Bezug



Cell-on-Cell-System

Fakten

- max. Patientengewicht: 3-75 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 1V
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem für Kinder
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 8 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer und akustischer Alarm bei niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- atmungsaktiver Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
- CPR-Funktion zur Reanimation

optional: Anpassung der Matratze an das Bettmaß durch maßgefertigte Frames möglich (siehe S. 26)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 70 x 140 cm
- Höhe: 17 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 10 kg

Lieferumfang

- SLK KiddyCare Digital® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.11.04.2096

Artikel-Nr.: 1705 (70 x 140 cm)

FreeChair

SLK FreeChair Professional®

Netzunabhängiges Wechseldrucksitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Fakten

- max. Patientengewicht: 30-100 kg
- akkubetriebenes Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- wählbare Wechseldruckintervalle (10 Min. / 15 Min. / 20 Min.)
- Statikfunktion zur Weichlagerung
- die Steuereinheit kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden
- für überwiegend sitzende Patienten

Technische Daten / Maße


- Maße Steuereinheit: 12,6 x 25 x 5,6 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen: 7 x 43 x 43 cm (H x B x T)
- Akku: 6 V Ni-MH / 2000 mAh
- Netzgerät: primär 230 Volt / 50 Hz, sekundär 12 Volt / max. 18 Watt
- Gesamtgewicht: 1,4 kg

Lieferumfang

- SLK FreeChair Professional® Sitzkissen inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug
- 2 programmierbare Steuereinheiten, inkl. Akku
- Transporttasche für die Steuereinheiten
- ein Ladegerät



Schaumstoff

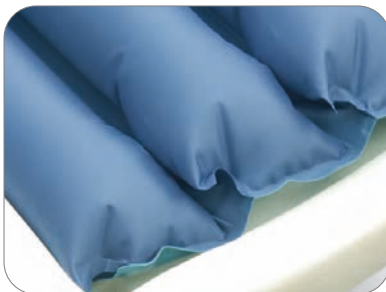

Luftzellen

Artikel-Nr.: 1812 (43 x 43 cm)

Therapiesysteme

Übersicht luftbefüllte energetische Therapiesysteme

	SLK ECO I+2	SLK I	SLK II	SLK III	SLK IV	SLK Pain&Therapy	SLK KiddyCare Digital	SLK IV XXL
Stadium bis (nach EPUAP)	2	2	3	3	4	4	4	4
bis Risikostufe	niedrig / mittel	niedrig / mittel	mittel / erhöht	mittel / erhöht	hoch	hoch	hoch	hoch
für Patienten von	30-140 kg	40-130 kg	40-135 kg	40-195 kg	40-250 kg	30-135 kg	3-75 kg	80-400 kg
Statikfunktion	+	+	+	+	+	+	+	+
Pulsation	-	-	-	-	+	+	+	+
Cell-in-Cell-System	-	-	-	+	+	-	-	+*1
Spitzfußprophylaxe	-	-	-	-	+	-	-	+
SLK Soft-Care-Tex™ Bezug	-	+	+	+	+	+	+	+*2
Transporttasche	-	-	-	+	+	+	+	+
Matratzenauflagesystem	+	+	+	-	-	-/+*3	-	-
Matratzenersatzsystem	-	-	-	+	+	-/+*3	+	+
CPR-Funktion	+	+	+	+	+	+	+	+
Sensor-Chip-Steuerung (SCS)	-	-	-	-	+	+	+	+
Micro-Chip-Steuerung (MCS)	-	-	+	+	-	-	-	-
VDE-Messpunkt	-	+	+	+	+	+	+	+
EPR-Netzkabel	-	+	+	+	+	+	+	+
Hilfsmittelnummer	11.29.04.1018	11.29.04.1005	11.29.04.1007	11.29.08.1009	11.29.08.3004	11.29.08.3005	11.11.04.2096	

* 1 SLK IV XXL 90er Breite: Cell-in-Cell System / 120er Breite: Cell-on-Cell System

* 2 SLK IV XXL 90er Breite: SLK Soft-Care-Tex™ Bezug / 120er Breite: SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug


* 3 Die SLK Pain&Therapy wird standardmäßig als Matratzenersatzsystem ausgeliefert, kann jedoch durch Entnahme des Schaumstoffkerns auch als Auflagesystem verwendet werden.

SLK IV XXL

Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung
zur Dekubitus- und Schmerztherapie



90 cm
Breite

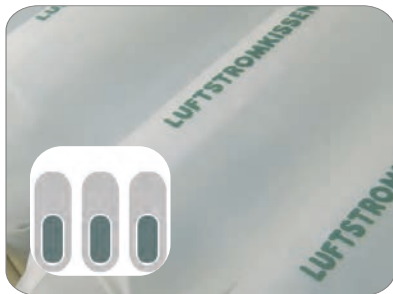

Cell-in-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad

Fakten

- max. Patientengewicht: 80-400 kg
 - Dekubitusstadium: 1 bis 1V
 - bei niedrigem bis hohem Risiko
 - Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
 - 20 Zellen, davon 9 Luftstomzellen
 - Cell-in-Cell-System
 - Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
 - Statik- und Pulsationsmodus
 - SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
 - verstärkte Luftanschlüsse an den Luftzellen
 - CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
 - Anti-Rutsch-Pads
- optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 26)**

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Artikel-Nr.: 1882 (90 x 200 cm)


SLK IV XXL Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



120 cm
Breite



9 Luftstromzellen

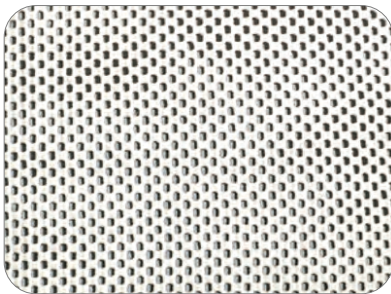

Anti-Rutsch-Pad

Fakten

- max. Patientengewicht: 80-400 kg
 - Dekubitusstadium: 1 bis 1V
 - bei niedrigem bis hohem Risiko
 - Matratzensersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
 - 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
 - Cell-on-Cell System
 - Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
 - Statik- und Pulsationsmodus
 - abwaschbarer SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
 - CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
 - Anti-Rutsch-Pads
- optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 26)**

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 120 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Artikel-Nr.: 2080 (120 x 200 cm)

SLK XXL Foam


hochwertiges HR-Schaumstoffsystem für adipöse Patienten



auch im
Sondermaß
erhältlich



hervorragendes Mikroklima
durch Belüftungskanäle

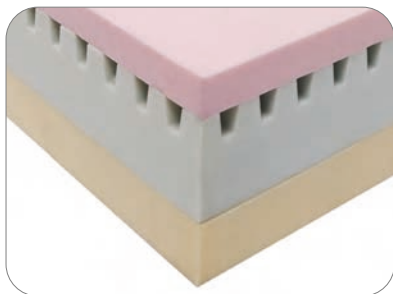

optimale Druckentlastung
durch Profilschnitte

Fakten

- max. Patientengewicht: 300 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 111
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Schaumstoffmatratze für die Versorgung von bariatrischen Patienten mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition durch Visco-Topschaum
- abwaschbarer SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 22 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 kg / m³

Lieferumfang

- SLK XXL Foam Schwerlastmatratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Artikel-Nr.: I0063 (90 x 200 cm), I0064 (100 x 200 cm),
I0081 (120 x 200 cm), I0087 (Sondermaß)**

SLK Frame

Schaumstoffrahmen



auch im
Sondermaß
erhältlich



Einsatz einer SLK IV XXL
mit einem SLK Frame

Fakten

- speziell für den Einsatz in der Schwerlastversorgung
 - Schaumstoffrahmen für großzellige Wechseldrucksysteme
 - Rahmenbasis 5 cm mit Seiten-, Kopf- und Fußteilen aus Schaumstoff
 - schnelle Anpassung an vorhandene Bettsysteme in allen Größen
 - ersetzt aufwändige Sonderanfertigungen
 - abwaschbarer SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
 - Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
 - Bezug erfüllt OEKO-TEX-Standard 100, FCKW-frei
- optional: für alle SLK Anti-Dekubitussysteme**

Technische Daten / Maße

- Standard-Innenmaß: 15 x 90 x 200 cm (H x B x L)
- Standard-Außenmaß: 20 x 100 x 200 cm (H x B x L)
- Sondermaße für die meisten Bettrahmen
- abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Frame Schaumstoffrahmen
inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Artikel-Nr.: 10026 (100 x 200 cm), 10033 (Sondermaß)

SLK NeoCare Basic


Standard Pflegebettmatratze

SLK NeoCare I

Prophylaxe- und Therapiematratze



Schaumschicht

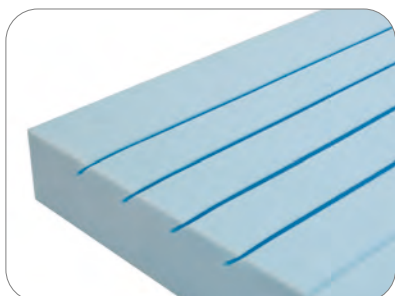

3 cm Einschnitte reduzieren
Scher- und Reibungskräfte

SLK NeoCare Basic

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Pflegebettmatratze
- Hoher Liegekomfort durch hochwertigen PU-Schaumstoff

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 35 kg / m³

Lieferumfang

- SLK NeoCare Basic Pflegebettmatratze
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

SLK NeoCare I

- max. Patientengewicht: 120 kg
- ISO 10993-I Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang


- SLK NeoCare I Therapiesystem
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

SLK NeoCare Basic Artikel-Nr.: 10061 (90 x 200 cm), 10066 (100 x 200 cm)

SLK NeoCare I Artikel-Nr.: 10067 (90 x 200 cm), 10068 (100 x 200 cm)

SLK NeoCare II

Prophylaxe- und Therapiematratze

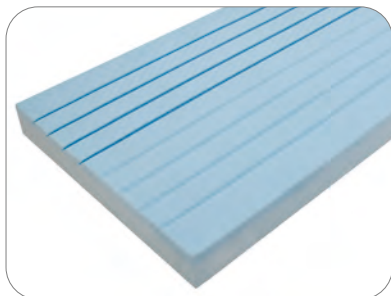

Scherkraftreduzierende
Einschnitte



Kaltschaum-Deckschicht

Fakten

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Dekubitusstadium: 1
- bei geringem Risiko
- ISO 10993-I Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität Deckschaum: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Oberschicht: 2,5 kPa Stauchhärte
- Unterschicht: 4,5 kPa Stauchhärte
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang

- SLK NeoCare II Pflegebettmatratze
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

Artikel-Nr.: 10076 (90 x 200 cm), 10077 (100 x 200 cm)

FoamCare

SLK FoamCare Comfort®

profilierte HR-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch im
Sondermaß
erhältlich



unterschiedliche Härtezonen



druckentlastende Würfelstruktur

SLK FoamCare Comfort 120

- max. Patientengewicht: 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 11
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

SLK FoamCare Comfort 140

- max. Patientengewicht: 160 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 11
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko
- 5-Zonen HR-Schaumkern mit Konturschnitten (Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich)
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 14 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 5-Zonen Schaumstoff

Lieferumfang

- SLK FoamCare Comfort® 120 / 140 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1032

SLK FoamCare Comfort 120 Artikel-Nr.: 10014 (90 x 200 cm), 10015 (100 x 200 cm)

SLK FoamCare Comfort 140 Artikel-Nr.: 10058 (90 x 200 cm), 10065 (100 x 200 cm) 29


SLK ProfiSoft Comfort®

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




auch im
Sondermaß
erhältlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

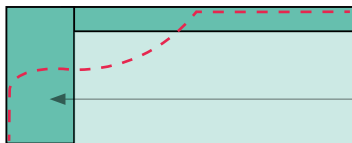

Randzonenverstärkung

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

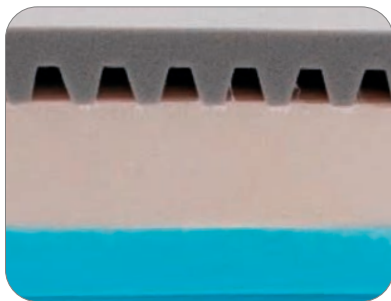

hervorragendes Mikroklima
durch Belüftungskanäle



+ 220 cm Bezug

optionales Verlängerungsset
(90 x 20 cm)

Fakten

- max. Patientengewicht: 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 111
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei
- Zusätzlich: pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze
Verlängerungsset: 90 x 20 cm
(20 cm langes Set bestehend aus 20 cm Schaumstoff + 220 cm Matratzenbezug)

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff

Lieferumfang

- SLK ProfiSoft Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034

Artikel-Nr.: 10016 (90 x 200 cm), 10017 (100 x 200 cm)

Verlängerungsset Artikel-Nr.: 10078 (90 x 20 cm)

ViscoCare


SLK ViscoCare Comfort®

viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch im
Sondermaß
erhältlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

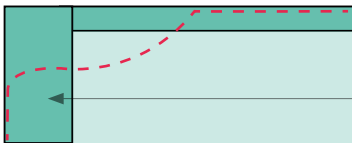


Randzonenverstärkung

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.



Randzonenverstärkung

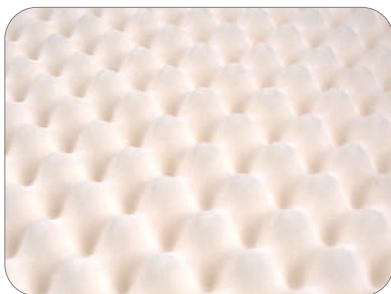

Noppenstruktur wirkt
Wärmestau entgegen

SLK ViscoCare Comfort 120

- max. Patientengewicht: 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 11
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

SLK ViscoCare Comfort 150

- max. Patientengewicht: 200 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 11
- bei niedrigem bis hohem Risiko

- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Randzonenverstärkung
- in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
SLK ViscoCare Comfort 120 Höhe: 12 cm
SLK ViscoCare Comfort 150 Höhe: 15 cm
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 15 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff

Lieferumfang

- SLK ViscoCare Comfort® 120 / 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033

SLK ViscoCare Comfort 120 Artikel-Nr.: 10018 (90 x 200 cm), 10019 (100 x 200 cm)

SLK ViscoCare Comfort 150 Artikel-Nr.: 10020 (90 x 200 cm), 10021 (100 x 200 cm)

Silver Sleep

SLK Silver Sleep

2-schichtige Komfortmatratze mit Gel-feel-Schaum und Silver-Care-Bezug



auch im
Sondermaß
erhältlich



SLK Silver-Care-Bezug



optimale Druckentlastung durch
Einschnitte in der Unterschicht

Fakten

- 2-schichtige Schaumstoffmatratze mit neuartigem Gel-feel-Schaum
- kühlend und atmungsaktiv
- optimale Druckverteilung durch einzigartiges Einsinkverhalten
- hervorragendes Mikroklima durch Gel-feel-Schaum und Lüftungskanäle
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- SLK Silver-Care-Bezug wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- optimal auch für Pflegebetten geeignet

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 14 cm (ohne Bezug)
- SLK Silver-Care-Bezug (gesteppt), waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 2-Schichten

Lieferumfang

- SLK Silver Sleep Komfortmatratze,
inkl. SLK Silver-Care-Bezug (gesteppt) mit Wendeschlaufen

Artikel-Nr.: 10079 (90 x 200 cm), 10080 (100 x 200 cm), 10083 (90 x 220 cm), 10084 (80 x 200 cm), 10085 (120 x 200 cm), 10086 (140 x 200 cm)

SLK Bi-Stretch

Ersatzbezüge für Schaumstoffmatratzen

SLK Touch of Silver



SLK Bi-Stretch-Bezug

auch im
Sondermaß
erhältlich



SLK Touch of Silver Bezug

auch im
Sondermaß
erhältlich

SLK Bi-Stretch-Bezug

- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm

Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

SLK Touch of Silver Bezug

- wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm

Lieferumfang

- SLK Touch of Silver Bezug

SLK Bi-Stretch-Bezug Artikel-Nr.: 1838 (90 x 200 x 12 cm), 1912 (100 x 200 x 12 cm), 1839 (90 x 200 x 15 cm), 1915 (100 x 200 x 15 cm)

SLK Touch of Silver Bezug Artikel-Nr.: 2062 (90 x 200 x 12 cm), 2114 (100 x 200 x 12 cm), 2115 (90 x 200 x 15 cm), 2116 (100 x 200 x 15 cm)

Evakuierung

SLK Evakuierungstuch

Evakuierungstuch für den Ernstfall



Fakten

- Anbringung an die Matratze mit Hilfe von starken Elastikbändern
- Sicherheitsgurte zum Fixieren von Patienten
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückschonend für das Pflegepersonal
- ergibt eine biegsame Kombination von rutschfestem Tuch und Matratze
- passt durch jede Tür und jedes Treppenhaus
- Kein Umbetten des Patienten notwendig

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, Sondermaß: auf Anfrage
- PVC beschichtetes Polyestergewebe, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Evakuierungstuch



SLK Evakuierungstuch



Transport-Gurtgriff

Artikel-Nr.: 2131 (90 x 200 cm), Sondermaß (auf Anfrage)

Evakuierung

SLK Evakuierungsbezug

Matratzenbezug für Evakuierungsmatratzen



untere Bezugseite



verstellbare Gurtverschlüsse

Fakten

- an Matratze angebunden und somit zeitsparend
- durch stabilen und reibungsarmen Boden des Evakuierungsbezugs lässt sich die Matratze leicht über Böden ziehen
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückenschonend für das Pflegepersonal
- Gurte geben der Matratze schützende U-Form
- optimale Verbindung von Liegekomfort mit hygienischen Ansprüchen
- obere Bezugseite: hochwertige Polyurethan Beschichtung
- untere Bezugseite: Nylonstoff, geprüft nach DIN 4102 BI
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm, 100 x 200 x 15 cm, Sondermaß: auf Anfrage
- Höhe: 15 cm
- SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Evakuierungsbezug (SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug)


Artikel-Nr.: 2126 (90 x 200 x 15 cm), 2127 (100 x 200 x 15 cm), 2195 Sondermaß (Lieferzeit von ca. 3 Wochen)

SLK GreenCare

non-energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

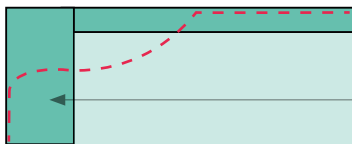

Randzonenverstärkung

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.



Randzonenverstärkung



einzelne entnehmbare
Polyurethan-Zellen

Fakten

- max. Patientengewicht: 20-195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und- therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- spürbare Reduktion des Auflagedruckes
- passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum
- keine Energiekosten

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 18 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 14 kg

Lieferumfang

- SLK GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug

SLK BlueCare

energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Fakten

- max. Patientengewicht: 20-180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und -therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechseldruck
- für den Einsatz in der Schmerztherapie geeignet
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- einfach zu reinigen / desinfizieren

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 12 cm unbelüftet, ohne Kompression
18 cm belüftet, ohne Kompression
- SLK Nylon-Polyurethan-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 11 kg

Lieferumfang

- SLK BlueCare Anti-Dekubitus-System inkl. Steuereinheit und Nylon-Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug



10 Zellen mit integriertem Schaumstoff-Zellkern



CPR-Funktion

Patientenliftsysteme

mobile Patientenlifter



medical solutions

Aus diesen Gründen sollte man Patientenlifter einsetzen

Wie viele Personen benötigt man laut Lastenhandhabungsverordnung um einen Patienten umzupositionieren?

Nach nationalem Gesetz sind dazu 4 Pfleger oder ein Patientenlifter nötig.

Patientenlifter dienen zur Aufnahme, zum Transport und Positionswechsel von Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung. Mit einem geeigneten Gurt ist es möglich, einen Patienten sicher und schonend zu bewegen.

Vorteile für den Patienten

- Sicherer und schonender Transfer
- Aktivlifter unterstützen bei der Therapie, bei der Erhaltung oder Steigerung der Mobilität und Unabhängigkeit
- Aktivlifter sind in ihren Eigenschaften positiv:
 - für die Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems
 - für eine Verbesserung des Körpergefühls und der Darmfunktion
 - für die Stärkung von Knochen, Gelenken und Knorpel

Vorteile für den Betreuer

- einfache Bedienung während des Transfers
- Minimierung der körperlichen Belastung des Betreuers beim Transfer

SLK Carry I 85 Classic

Patientenlifter konzipiert für die Pflege Zuhause



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Handbedienung mit Magnet

Fakten

- max. Patientengewicht: **185 kg**
- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- Hakenaufnahme mit Federsicherung

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK 2-Punkt-Bügel: 8053

optional:

- SLK 4-Punkt-Bügel: 8060
- SLK 4-Punkt-Bügel Basic: 8064

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Lenkrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	manuelle Spreizung	elektrische Spreizung
Länge	115	115
Bauhöhe	137	137
Breite	61	61
Fußhöhe	11	11
Hubhöhe	81-203	81-203
Drehradius	132	132
Spreizung	51-94	51-94
Gewicht	37 kg	38 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0099

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 8002, elektrische Spreizung 8003 (Europalettenkonform verpackt)

SLK Carry 185 Pro

Patientenlifter konzipiert für den Einsatz in Einrichtungen und Kliniken



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Bedienung über Steuerbox möglich

Fakten

- max. Patientengewicht: **185 kg**
- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stop, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- doppelte Akkuleistung
- Hakenaufnahme mit Federsicherung

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK 2-Punkt-Bügel: 8054

optional:

- SLK 4-Punkt-Bügel: 8060
- SLK 4-Punkt-Bügel Basic: 8064

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	manuelle Spreizung	elektrische Spreizung
Länge	118	118
Bauhöhe	137	137
Breite	61	61
Fußhöhe	11	11
Hubhöhe	81-203	81-203
Drehradius	132	132
Spreizung	51-94	51-94
Gewicht	38 kg	39 kg

Maße in cm

weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0100

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 8004, elektrische Spreizung 8005 (Europalettenkonform verpackt)

SLK Carry I 85 Pro L

Patientenlifter mit extra niedrigem Fahrwerk



Komfort-Rollen



optional mit SLK 4-Punkt-Bügel

Fakten

- max. Patientengewicht: 185 kg
- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückenschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- Hakenaufnahme mit Federsicherung

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK 2-Punkt-Bügel: 8054

optional:

- SLK 4-Punkt-Bügel: 8060
- SLK 4-Punkt-Bügel Basic: 8064

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	manuelle Spreizung	elektrische Spreizung
Länge	118	118
Bauhöhe	135	135
Breite	61	61
Fußhöhe	9	9
Hubhöhe	79-201	79-201
Drehradius	131	131
Spreizung	51-94	51-94
Gewicht	38 kg	39 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0101

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 8006, elektrische Spreizung 8007 (Europalettenkonform verpackt)

SLK Multy Hybridlifter

Universallifter, zum Aktivlifter umrüstbar

Weltneuheit höhenverstellbarer Standmast!



Fakten

- max. Patientengewicht: 185 kg
- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- hohe Akkuleistung
- Hakenaufnahme mit Federsicherung

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK 2-Punkt-Bügel: 8054

optional:

- SLK 4-Punkt-Bügel: 8060
- SLK 4-Punkt-Bügel Basic: 8064
- SLK Multy Umrüstkit Aktiv: 8011 (Seite 93)

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	manuelle Spreizung	elektrische Spreizung
Länge	117	117
Bauhöhe	137	137
Breite	61	61
Fußhöhe	11	11
Hubhöhe	81-203	81-203
Drehradius	129	129
Spreizung	61-92	61-92
Gewicht	41,3 kg	42,3 kg

Maße in cm

weitere Details auf Seite: 56



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Bedienung über Steuerbox möglich

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0105

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 8009, elektrische Spreizung 8013 (Europalettenkonform verpackt)

Compact

SLK Blue Flyer Compact

Patientenlifter mit kurzem Fahrgestell



werkzeuglos klappbar



Bedienung über Steuerbox möglich

Fakten

- max. Patientengewicht: **160 kg**
- für Kinder und kleine Patienten bis zu einer Körpergröße von 1,70 cm geeignet
- Einsatz in kleinen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Benutzerfreundlichkeit für Betreuer und Patient
- 360 Grad Drehung des Universalbügels in höchster Position möglich
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- faltbar und transportfähig
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK Universalbügel: 5376

optional:

- SLK Twin-Bügel: 5181

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	manuelle Spreizung
Länge	100
Bauhöhe	126
Breite	62
Fußhöhe	11
Hubhöhe	78-178
Drehradius	114
Spreizung	59-92
Gewicht	31 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.0087

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 5000

Flyer XL

SLK Flyer XL

Patientenlifter für schwergewichtige Patienten



SLK Twin-Bügel XL serienmäßig



Bedienung über Steuerbox möglich

Fakten

- max. Patientengewicht: 300 kg
- schonendes Aufheben und Absetzen von Patienten
- elektrisch verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Patientenliftergurte

serienmäßig:

- SLK Twin-Bügel XL: 5439

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien


Daten	elektrische Spreizung
Länge	125
Bauhöhe	124
Breite	74
Fußhöhe	11
Hubhöhe	66-182
Drehradius	145
Spreizung	70-105
Gewicht	46 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Artikel-Nr.: elektrische Spreizung 5016

Patientenliftsysteme

mobile Aktivlifter

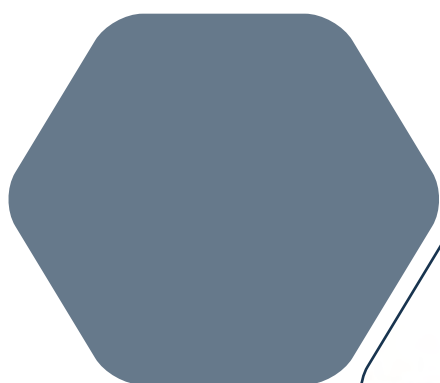

medical solutions

SLK Multy Hybridlifter

Aktivlifter, zum Universallifter umrüstbar

Weltneuheit höhenverstellbarer Standmast!



● MADE
● IN
● GERMANY

Fakten

- max. Patientengewicht: 185 kg
- schonendes Aufrichten und Absetzen des Patienten
- sicherer und einfacher Transfer mit Gesäßunterstützung
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- hohe Wendigkeit
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- hohe Akkuleistung

Zu verwendende Gurte:

- alle SLK Aktivliftergurte

optional:

- SLK Wadenband: 5194
- SLK Multy Umrüstkit Universal: 8010 (Seite 93)

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Bedienung über Steuerbox möglich

Daten	manuelle Spreizung	elektrische Spreizung
Länge	117	117
Bauhöhe	105	105
Breite	61	61
Fußhöhe	11	11
Hubhöhe	86-163	86-163
Drehradius	129	129
Spreizung	61-92	61-92
Gewicht	51,3 kg	52,3 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1001

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 8008, elektrische Spreizung 8012 (Europalettenkonform verpackt)

Blue Wayup

SLK Blue Wayup

Aktivlifter mit fixem Fahrgestell



Einsatz mit Spezial
Aktivgurt mit Sitzschaukel



optionales SLK Wadenband

Fakten

- max. Patientengewicht: 150 kg
- für Patienten im Homecare-Bereich
- sicherer und einfacher Transfer mit Gesäßunterstützung
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- extrem kompakt, wodurch eine hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche gewährleistet wird
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Zu verwendende Gurte:

- SLK Universal Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

optional:

- SLK Wadenband: 5193
- breites SLK Schienbeinpolster: 5462

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	fixes Fahrgestell
Länge	83
Bauhöhe	103
Breite	58
Fußhöhe	8
Hubhöhe	83-129
Drehradius	90
Spreizung	-
Gewicht	29 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1012

Artikel-Nr.: fixes Fahrgestell 5006

Blue Wayup

SLK Blue Wayup

Aktivlifter mit manueller Spreizung



Merkmale der manuellen Variante

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer

Daten	manuelle Spreizung
Länge	100
Bauhöhe	103
Breite	53
Fußhöhe	11
Hubhöhe	83-129
Drehradius	111
Spreizung	53-82
Gewicht	30 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56



minimale Spreizung



maximale Spreizung

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1011
Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 5007

SLK Wayup

Aktivlifter mit fixem Fahrgestell

NICHT MEHR
VERFÜGBAR!



variable Fußplatte



optionales SLK Wadenband

- max. Patientengewicht: 180 kg
- schonendes Aufrichten und Absetzen von Patienten
- auch für kleine Patienten und Kinder geeignet
- einfacher und einfacher Transfer mit Gesäßunterstützung
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- ergonomischer Bedienergriff
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- serienmäßig mit schmalen Wadenband

Zu verwendende Gurte:

- SLK Universal Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt
- SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

optional:

- breites SLK Wadenband: 5193
- breites SLK Schienbeinpolster: 5462
- 3-Funktionstrittplatte

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Daten	fixes Fahrgestell
Länge	95
Bauhöhe	100
Breite	56,5
Fußhöhe	6,5
Hubhöhe	80-133
Drehradius	94
Spreizung	-
Gewicht	29 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1013
Artikel-Nr.: fixes Fahrgestell 5018

SLK Wayup

Aktivlifter mit manueller und elektrischer Spreizung

NICHT MEHR
VERFÜGBAR!



manuelle / elektrische Spreizung



Handbedienung
für elektrische Spreizung



Hubvorrichtung

Merkmale der manuellen Variante

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückenschonende Handhabung für den Betreuer

Daten	manuelle Spreizung
Länge	107
Bauhöhe	106
Breite	54
Fußhöhe	11
Hubhöhe	82-135
Drehradius	110
Spreizung	54-90
Gewicht	36 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Merkmale der elektrischen Variante

- Spreizung des Fahrgestells ohne Kraftanstrengung auf Tastendruck
- empfohlen bei schwergewichtigen Patienten
- auch auf hochflorigen Teppichen einsetzbar
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen

Daten	elektrische Spreizung
Länge	107
Bauhöhe	106
Breite	54
Fußhöhe	11
Hubhöhe	82-135
Drehradius	110
Spreizung	54-80
Gewicht	38 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1014, 22.40.01.1015

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 5019, elektrische Spreizung 5020

SLK Easylev

Aktivlifter mit fixem Fahrgestell

Easylev



Fakten

- max. Patientengewicht: 180 kg
- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- serienmäßig mit schmalen Wadenband

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

optional:

- breites SLK Wadenband: 5193
- breites SLK Schienbeinpolster: 5462
- 3-Funktiontrittplatte

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kuggelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien



Hubvorrichtung



optionales SLK Wadenband

Daten	fixes Fahrgestell
Länge	84
Bauhöhe	121
Breite	56,5
Fußhöhe	6,5
Hubhöhe	78-155
Drehradius	90
Spreizung	-
Gewicht	38 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.I042
Artikel-Nr.: fixes Fahrgestell 5021

SLK Easylev

Aktivlifter mit manueller und elektrischer Spreizung



manuelle / elektrische Spreizung



100 mm Doppelrollen-
wartungsfrei



Steuereinheit

Merkmale der manuellen Variante

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer

Daten	manuelle Spreizung
Länge	100
Bauhöhe	126
Breite	54
Fußhöhe	11
Hubhöhe	75-158
Drehradius	110
Spreizung	54-90
Gewicht	42 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Merkmale der elektrischen Variante

- Spreizung des Fahrgestells ohne Kraftanstrengung auf Tastendruck
- empfohlen bei schwergewichtigen Patienten
- auch auf hochflorigen Teppichen einsetzbar
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen

Daten	elektrische Spreizung
Länge	100
Bauhöhe	126
Breite	54
Fußhöhe	11
Hubhöhe	75-158
Drehradius	110
Spreizung	54-80
Gewicht	44 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.01.1043, 22.40.01.1044

Artikel-Nr.: manuelle Spreizung 5022, elektrische Spreizung 5023

SLK Wayup XL

Aktivlifter für schwergewichtige Patienten



Hubvorrichtung



optionales SLK Wadenband

Fakten

- max. Patientengewicht: 300 kg
- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- breites SLK Schienbeinpolster serienmäßig
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

serienmäßig:

- mit breiterem SLK Schienbeinpolster

optional:

- SLK Wadenband: 5212

Hinweis: Liftergurte ab Seite 61, Zubehör ab Seite 84

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien




Daten	elektrische Spreizung
Länge	107
Bauhöhe	105
Breite	69
Fußhöhe	11
Hubhöhe	85-135
Drehradius	125
Spreizung	69-104
Gewicht	45 kg

Maße in cm
weitere Details auf Seite: 56

Artikel-Nr.: elektrische Spreizung 5017

Technische Daten


Patientenlifter & Aktivlifter

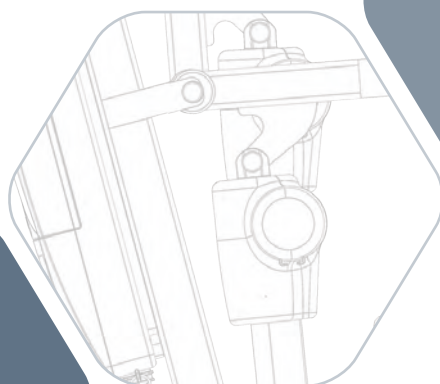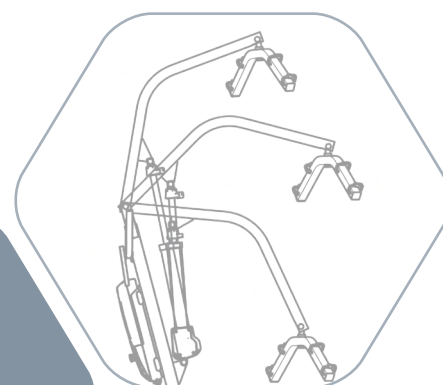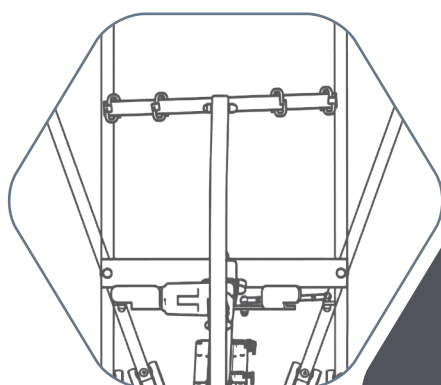

medical solutions



Technische Daten

Patientenlifter & Aktivlifter

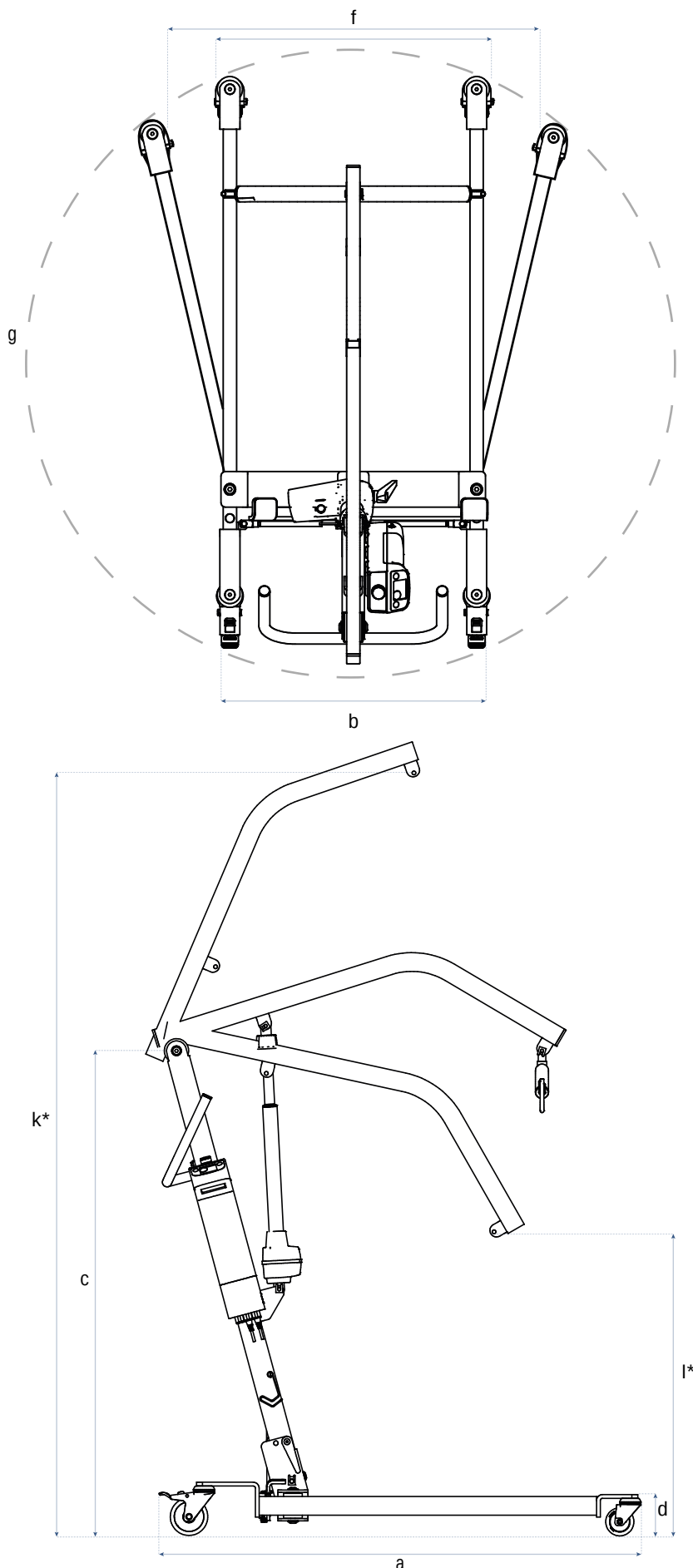

	Länge	Breite
	a	b
SLK Carry 185 Classic		
manuelle Spreizung	115	61
elektrische Spreizung	115	61
SLK Carry 185 Pro		
manuelle Spreizung	118	61
elektrische Spreizung	118	61
SLK Carry 185 Pro L		
manuelle Spreizung	118	61
elektrische Spreizung	118	61
SLK Multy Universallifter		
manuelle Spreizung	117	61
elektrische Spreizung	117	61
SLK Blue Flyer Compact		
manuelle Spreizung	100	62
SLK Flyer XL		
elektrische Spreizung	125	74
SLK Multy Aktivlifter		
manuelle Spreizung	117	61
elektrische Spreizung	117	61
SLK Blue Wayup		
fixes Fahrgestell	83	58
manuelle Spreizung	100	53
SLK Wayup		
fixes Fahrgestell	95	56,5
manuelle Spreizung	107	54
elektrische Spreizung	107	54
SLK Easylev		
fixes Fahrgestell	84	56,5
manuelle Spreizung	100	54
elektrische Spreizung	100	54
SLK Wayup XL		
elektrische Spreizung	107	69


* = nach Bild 1, DIN EN ISO 10535:2007-04

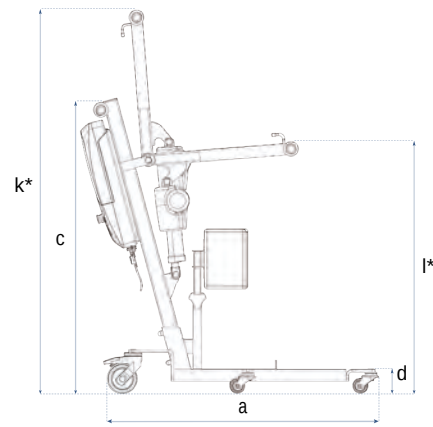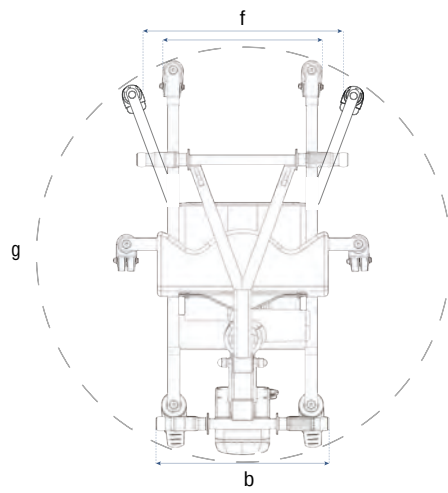

Bauhöhe	Hubhöhe oben	Höhe des Fahrgestells	Hubhöhe unten	Spreadung	Drehradius	Gewicht	max. Patientengewicht
c	k*	d	l*	f	g	h	i
137	203	11	81	51 - 94	132	37 kg	185 kg
137	203	11	81	51 - 94	132	38 kg	185 kg
137	203	11	81	51 - 94	132	38 kg	185 kg
137	203	11	81	51 - 94	132	39 kg	185 kg
135	201	9	79	51 - 94	131	38 kg	185 kg
135	201	9	79	51 - 94	131	39 kg	185 kg
137	203	11	81	61 - 92	129	41,3 kg	185 kg
137	203	11	81	61 - 92	129	42,3 kg	185 kg
126	178	11	78	59 - 92	114	31 kg	160 kg
124	182	11	66	70 - 105	145	46 kg	300 kg
105	163	11	86	61 - 92	129	51,3 kg	185 kg
105	163	11	86	61 - 92	129	52,3 kg	185 kg
103	129	8	83	-	90	29 kg	150 kg
103	129	11	83	53 - 82	111	30 kg	150 kg
100	133	6,5	80	-	94	29 kg	180 kg
106	135	11	82	54 - 90	110	36 kg	180 kg
106	135	11	82	54 - 80	110	38 kg	180 kg
121	155	6,5	78	-	90	38 kg	180 kg
126	158	11	75	54 - 90	110	42 kg	180 kg
126	158	11	75	54 - 80	110	44 kg	180 kg
105	135	11	85	69 - 104	125	45 kg	300 kg

Liftergurte

Patientenliftergurte & Aktivliftergurte

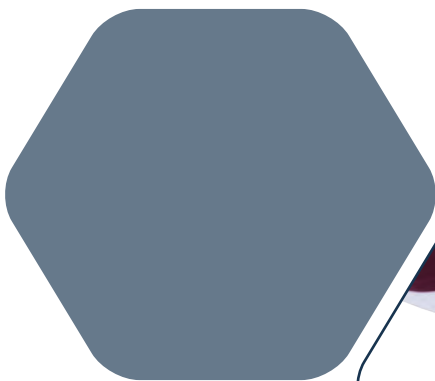

medical solutions

Qualität & Komfort

Qualität, Komfort und Sicherheit sind unsere Ansprüche

Bei der Entwicklung unserer Produkte wird besonders Wert darauf gelegt, dass therapeutische Wirksamkeit und Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Aus diesem Grund sind unsere Liftergurte speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten.

Wir bieten individuelle Lösungskonzepte für Kinder, Erwachsene, leichte oder schwere Patienten, im Homecare-Bereich, in Pflegeinstitutionen oder Kliniken.

Die SLK-Liftergurte zeichnen sich durch ihre erstklassige Qualität und Benutzerfreundlichkeit aus. Hochwertige Materialien und eine professionelle Verarbeitung gewährleisten eine hohe Belastbarkeit von bis zu 320 kg. Außerdem sind die Gurte bis zu einer Temperatur von 70 °C waschbar und entsprechen somit den allgemein geltenden Hygienestandards.

Die Gurtschlaufen sind farbig gekennzeichnet. Diese Farbkennzeichnung ermöglicht eine schnellere und sichere Anpassung des Liftergurtes an den Patienten. Die verschiedenfarbigen Gurtumrandungen gewährleisten ein schnelles Erkennen der Größen.

Alle SLK-Gurte eignen sich zudem auch für Lifter anderer Hersteller gemäß der aktuellen Kompatibilitätserklärung. Den Download hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.slk-gmbh.de.



Laden Sie sich auf unserer Webseite unter
Download die aktuelle Kompatibilitätsliste herunter!
www.slk-gmbh.de

Größentabelle für die Liftergurte

Körpergröße in cm		Gewicht in kg																											
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	S	S	M	M	M																								
110	S	S	M	M	M	L	L																						
120	S	S	M	M	M	L	L																						
130	S	S	M	M	M	L	L																						
140	S	S	S	M	M	L	L																						
150	S	S	S	S	M	L	L	L																					
160	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
170	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
180	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
190	M	M	M	M	M		L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
200	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
210	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL

für alle anderen Größen sind Sonderanfertigungen notwendig

Universal

SLK Universalgurt

Universalgurt für den allgemeinen Gebrauch



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- für den sicheren Transfer des Patienten sowie das Liften vom Boden
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- optional mit anklettbarer SLK Kopfstütze

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719




Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

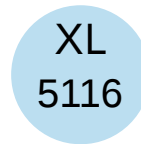

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

SLK Universalgurt mit Kopfstütze

Universalgurt für den allgemeinen Gebrauch mit Kopfstütze



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- anschmiegsamer Universalgurt mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- Benutzung mit SLK Twin-Bügel (5181) empfohlen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719

Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern



SLK Universalgurt Bad

Badegurt



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Ablaufen von Wasser
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- optional mit anklettbarer SLK Kopfstütze

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719



Material & Service

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S
5124

M
5125

L
5126

XL
5127

XXL
5128

3XL
5210

4XL
5211

SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze

Universalgurt zum Baden mit Kopfstütze



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Ablaufen von Wasser
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- Benutzung mit SLK Twin-Bügel (5181) empfohlen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719


Material & Service

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

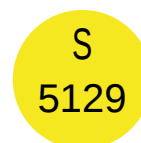

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Quick

Quick Transfer- und Toilettengurt

Transfer- und Toilettengurt für das schnelle Anlegen und Umsetzen



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- besonders unkompliziert und schnell an- und abzulegen
- mit Rückenverstärkung und Brustschlaufe
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- optional mit adaptierbarer Kopfstütze

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- adaptierbare SLK Kopfstütze: 5138
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719




Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

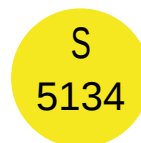

Toilettengurt

SLK Toilettengurt

Toilettengurt



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- schnelles An- und Auskleiden
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- optional mit adaptierbarer SLK Kopfstütze

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- adaptierbare SLK Kopfstütze: 5138
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719



Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S 5139	M 5140	L 5141
XL 5142	XXL 5143	3XL 5206
4XL 5207		

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Hammock

SLK Hammock Universalgurt

Gurt im Hängemattenschnitt für den allgemeinen Gebrauch



kg
320

Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- Benutzung mit SLK Twin-Bügel (5181) empfohlen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719



Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S
5144

M
5145

L
5146

XL
5147

XXL
5148

3XL
5200

4XL
5201



Hammock Bad

SLK Hammock Badegurt

Gurt im Hängemattenschnitt für den allgemeinen Gebrauch im Bad



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- optional mit anklettbarer SLK Kopfstütze
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- Benutzung mit SLK Twin-Bügel (5181) empfohlen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719



Material & Service

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S 5149	M 5150	L 5151
XL 5152	XXL 5153	3XL 5202
4XL 5203		



Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Hammock

SLK Hammock Sitzschalengurt

Sitzschalengurt für den Verbleib im Rollstuhl



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- anschmiegsamer Stoff, der die Konturen der Sitzschale annimmt
- ohne Nähte und Schlaufen im Rücken- und Gesäßbereich
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- optional mit anklettbarer SLK Kopfstütze
- Benutzung mit SLK Twin-Bügel (5181) empfohlen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719



Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S 5154	M 5155	L 5156
XL 5157	XXL 5158	3XL 5204
4XL 5205		

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

SLK Comfort-Liegegurt

Liegendtransfergurt für den halb liegenden Transport



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- nur mit SLK Twin-Bügel möglich
- Einsatz einer anklettbaren SLK Kopfstütze wird empfohlen
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719




Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

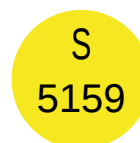

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Comfort Bad

SLK Comfort-Liege-Badegurt

Liegendtransfergurt für den halb liegenden Transport zum Baden



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- nur mit SLK Twin-Bügel möglich
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- Einsatz einer anklettbaren SLK Kopfstütze wird empfohlen
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter vorzugsweise mit SLK Twin-Bügel (5181) und SLK Kopfstütze
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- anklettbare SLK Kopfstütze: 5118
- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719




Material & Service

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

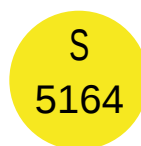

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Rücken-Fix

SLK Rücken-Fix-Gurt

Universalgurt



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- Gurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- für Patienten deren Rücken und Kopf extrem gestützt werden müssen

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719

Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern



Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Rücken-Fix Bad

SLK Rücken-Fix-Badegurt

Badegurt



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- Gurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
- für Patienten deren Rücken und Kopf extrem gestützt werden müssen
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool

Geeignet für:

- alle SLK Patientenlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719

Material & Service

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern



Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001

Maxi-Gurt

SLK Maxi-Gurt

Universalgurt für schwergewichtige Patienten



kg
320



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- mit integrierter Kopfstütze
- sorgt bei dauerhafter Nutzung für ein angenehmes Hautklima
- in besonders großen Größen

Geeignet für:

- Patientenlifter mit SLK Twin-Bügel XL (5439)
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719

Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

XXL
5177

3XL
5178

4XL
5179

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.0001



we lift you up

www.slk-gmbh.de

SLK Aktivgurt

Aufrichtgurt für dual- und nach oben ziehende Aktivlifter



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- gepolsterter Gurt zur Unterstützung beim Aufrichten
- zusätzlicher Bauchgurt für mehr Sicherheit
- höchster Tragekomfort

Geeignet für:

- alle SLK Aktivlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719


Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

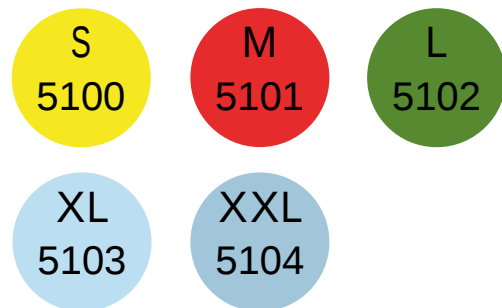

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.000I

SLK Spezial Aktivgurt

Aufrichtgurt mit Gesäßunterstützung für nach vorne ziehende Aktivlifter



Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten
- zusätzlicher Gesäßgurt für mehr Sicherheit

Geeignet für:

- SLK Multy Aktivlifter
- SLK Blue Wayup
- SLK Wayup
- SLK Wayup XL
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719

Material & Service

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C

Garantie:


- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern



Spezial SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

Aufrichtgurt mit Gesäßunterstützung für nach vorne ziehende Aktivlifter

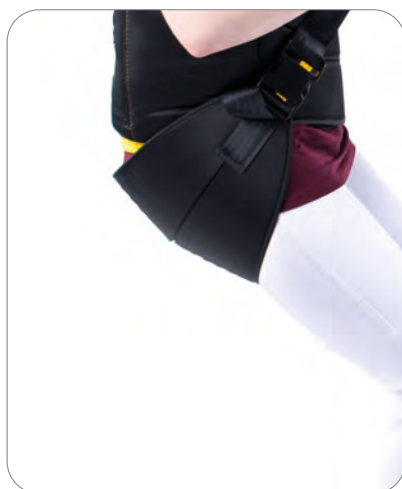

SLK Sitzschaukel

Fakten

- max. Patientengewicht: 320 kg
- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten

Geeignet für:

- SLK Multy Aktivlifter
- SLK Blue Wayup
- SLK Wayup
- SLK Wayup XL
- SLK Easylev
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

optional:

- SLK-Verlängerungsschlaufen: 5719


Material & Service

- Polyester-Jersey
- Sitzschaukel mit Anti-Rutsch Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

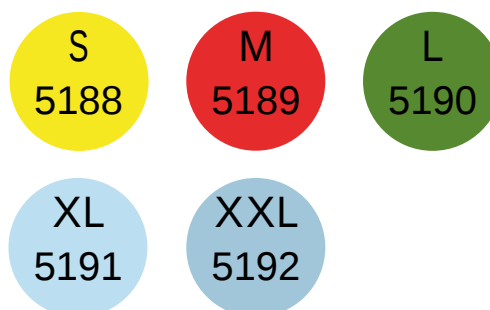

Abrechnungspositions-Nr.: 22.40.04.000I

Technische Daten

Patientenliftergurte & Aktivliftergurte




medical solutions

Daten

Technische Daten

Patientenliftergurte & Aktivliftergurte

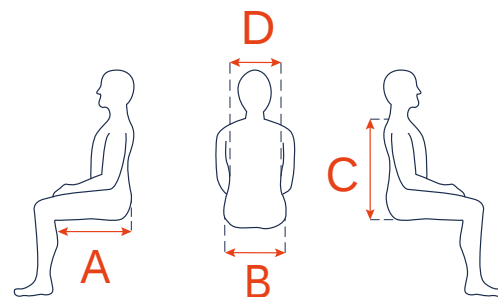

Gurte für Aktivlifter

	Artikel-Nr.	A	C	D
SLK Aktivgurt in Größe S	5100	-	21	60
SLK Aktivgurt in Größe M	5101	-	25	75
SLK Aktivgurt in Größe L	5102	-	29	88
SLK Aktivgurt in Größe XL	5103	-	33	102
SLK Aktivgurt in Größe XXL	5104	-	37	116
SLK Spezial Aktivgurt in Größe S	5105	-	21	60
SLK Spezial Aktivgurt in Größe M	5106	-	25	75
SLK Spezial Aktivgurt in Größe L	5107	-	29	88
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe S	5188	25	68	60
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe M	5189	25	68	75
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe L	5190	25	68	88
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XL	5191	25	68	102
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XXL	5192	25	68	116
SLK Wadenband / SLK Wadenband XL / SLK Wadenband Wayup XL	5193/5194/5212			

Gurte für Patientenlifter

	Artikel-Nr.	A	B	C
SLK Universalgurt in Größe S	5113	52	35	56
SLK Universalgurt in Größe M	5114	60	37	58
SLK Universalgurt in Größe L	5115	73	47	57
SLK Universalgurt in Größe XL	5116	78	53	58
SLK Universalgurt in Größe XXL	5117	81	65	64
SLK Universalgurt in Größe XXXL	5208	84	77	70
SLK Universalgurt in Größe XXXXL	5209	87	89	76
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe S	5119	52	35	89
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe M	5120	60	42	103
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe L	5121	73	47	111
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XL	5122	78	53	115
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XXL	5123	81	65	123
SLK Universalgurt Bad in Größe S	5124	52	35	56
SLK Universalgurt Bad in Größe M	5125	60	44	58
SLK Universalgurt Bad in Größe L	5126	73	47	57
SLK Universalgurt Bad in Größe XL	5127	78	53	58
SLK Universalgurt Bad in Größe XXL	5128	81	65	64
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXL	5210	84	77	70
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXXL	5211	87	89	76
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe S	5129	52	35	89
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe M	5130	60	45	103
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe L	5131	73	47	111
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XL	5132	78	53	115
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XXL	5133	81	65	123


Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten

Gurte für Patientenlifter	Artikel-Nr.	A	B	C
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe S	5134	93	35	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe M	5135	105	37	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe L	5136	115	47	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe XL	5137	125	53	25
SLK Toilettengurt in Größe S	5139	93	35	27
SLK Toilettengurt in Größe M	5140	105	37	27
SLK Toilettengurt in Größe L	5141	115	47	27
SLK Toilettengurt in Größe XL	5142	125	53	27
SLK Toilettengurt in Größe XXL	5143	135	65	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXL	5206	145	77	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXXL	5207	155	89	27
SLK Hammock Universalgurt in Größe S	5144	41	35	53
SLK Hammock Universalgurt in Größe M	5145	46	37	57
SLK Hammock Universalgurt in Größe L	5146	50	47	61
SLK Hammock Universalgurt in Größe XL	5147	55	53	66
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXL	5148	61	65	71
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXL	5200	67	77	76
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXXL	5201	73	89	81
SLK Hammock Badegurt in Größe S	5149	41	35	53
SLK Hammock Badegurt in Größe M	5150	46	37	57
SLK Hammock Badegurt in Größe L	5151	50	47	61
SLK Hammock Badegurt in Größe XL	5152	55	53	66
SLK Hammock Badegurt in Größe XXL	5153	61	65	71
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXL	5202	67	77	76
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXXL	5203	73	89	81
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe S	5154	41	35	53
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe M	5155	46	37	57
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe L	5156	50	47	61
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XL	5157	55	53	66
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXL	5158	61	65	71
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXL	5204	67	77	76
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXXL	5205	73	89	81
SLK Comfort-Liegegurt in Größe S	5159	59	35	53
SLK Comfort-Liegegurt in Größe M	5160	65	37	57
SLK Comfort-Liegegurt in Größe L	5161	70	47	61
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XL	5162	75	53	65
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XXL	5163	80	65	69
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe S	5164	59	35	53
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe M	5165	65	37	57
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe L	5166	70	47	61
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XL	5167	75	53	65
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XXL	5168	80	65	69
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe S	5169	59	35	88
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe M	5170	66	37	92
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe L	5171	71	47	96
SLK Rücken-Fix-Gurt in Größe XL	5172	77	53	101
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe S	5173	59	35	88
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe M	5174	66	37	92
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe L	5175	71	47	96
SLK Rücken-Fix-Badegurt in Größe XL	5176	77	53	101
SLK-Maxi Gurt in Größe XXL	5177	100	65	92
SLK-Maxi Gurt in Größe XXXL	5178	124	78	96
SLK-Maxi Gurt in Größe XXXXL	5179	146	91	101

alle Maßangaben in cm

Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten


anklettbare
SLK Kopfstütze

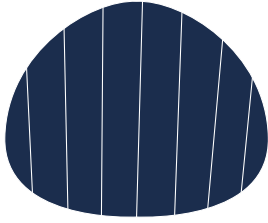


SLK Wadenband



adaptierbare
SLK Kopfstütze mit Verstärkung

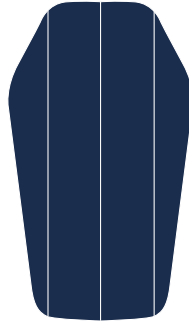

SLK Toilettengurt

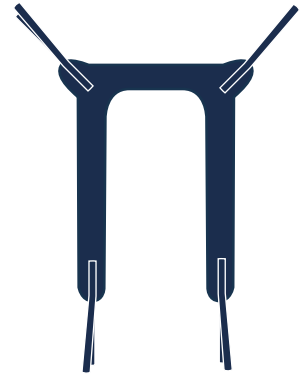


SLK Spezial Aktivgurt



SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel



SLK Quick Transfer- und Toilettengurt

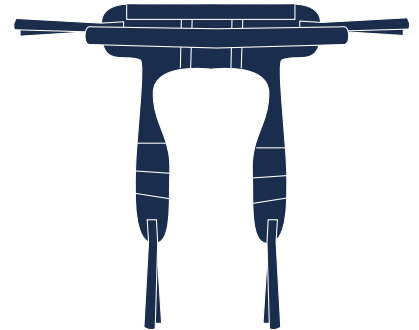


SLK Aktivgurt




SLK Sitzschaukel




SLK Universalgurt

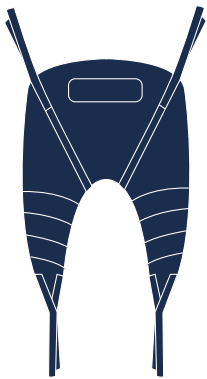

SLK Universalgurt
mit Kopfstütze

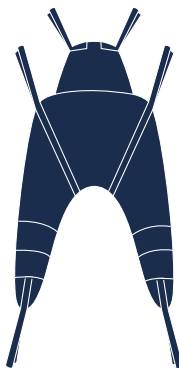


SLK Rücken-Fix-Gurt

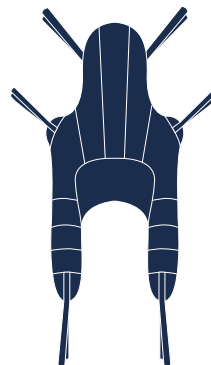


SLK Maxi-Gurt




SLK Hammock
Sitzchalengurt

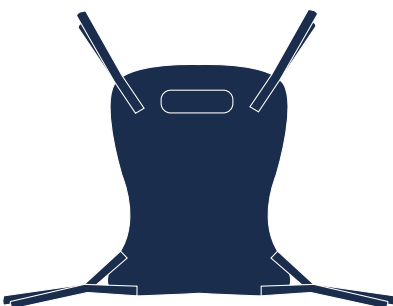

SLK Hammock
Universalgurt

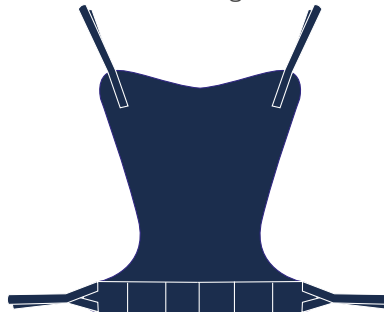


SLK Comfort-Liegegurt

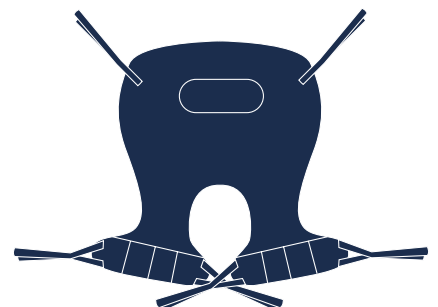

Zubehör

Lifterzubehör

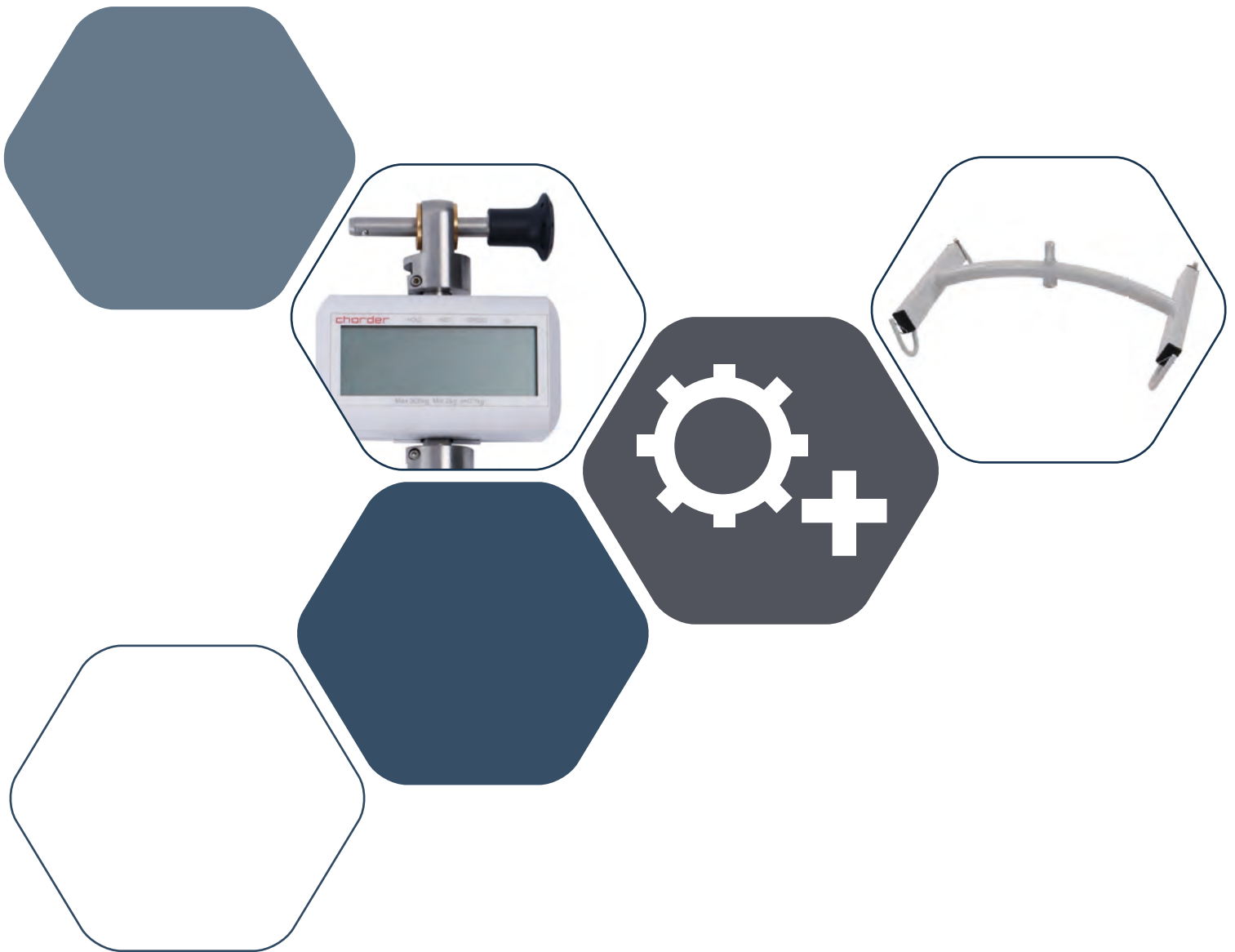

medical solutions

SLK-Lifterwaagen



SLK-Lifterwaage

Die SLK-Lifterwaage kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragengewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für schwergewichtige Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5186

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage

SLK-eichfähige Lifterwaage

Die SLK-eichfähige Lifterwaage ist ab Werk erstgeeicht und kann somit für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Sie kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragengewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für adipöse Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5183

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage

SLK Waagen inkl. Adapter

SLK-eichfähige Lifterwaage inkl. Adapter für Novacare Cacero, AI 66, A222, A333

Artikelnummer: 8021

SLK-Lifterwaage inkl. Adapter für Novacare Cacero, AI 66, A222, A333

Artikelnummer: 8023

SLK-Lifterwaage inkl. Adapter für aks Patientenlifter

Artikelnummer: 8022

Wandladestation

SLK Wandladestationen



SLK Carry Wandladestation

TiMotion Antriebssystem

Mit der SLK Carry Wandladestation können Akkus von Patientenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden. Diese kann gleichzeitig auch als Tischladestation verwendet werden. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 8454

geeignet für alle SLK Carry 185, SLK Multy Patientenlifter

Ladegerät optional erhältlich

Artikelnummer: 8450

Lieferumfang: ohne Akku



SLK Carry Wandladestation & Ladegerät

TiMotion Antriebssystem

Mit der SLK Carry Wandladestation können Akkus von Patientenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden. Diese kann gleichzeitig auch als Tischladestation verwendet werden. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 8390

geeignet für alle SLK Carry 185, SLK Multy Patientenlifter

Lieferumfang: ohne Akku



SLK Wandladestation

UMEC Antriebssystem

Mit der SLK Wandladestation können Akkus von Patientenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 5182

geeignet für alle SLK-Patientenlifter

(außer SLK Carry 185, SLK Multy)

Lieferumfang: ohne Akku

SLK Patientenlifterbügel



SLK 2-Punkt-Bügel

Der SLK 2-Punkt-Bügel besticht durch seine einfache und schnelle Handhabung. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8053 (Telegrau) für SLK Carry 185 Classic

Artikelnummer: 8054 (Silber) für SLK Carry 185 Pro, Pro L, SLK Multy Patientenlifter




SLK 4-Punkt-Bügel

Der SLK 4-Punkt-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8060 (Silber)

geeignet für alle SLK Carry 185, SLK Multy Patientenlifter

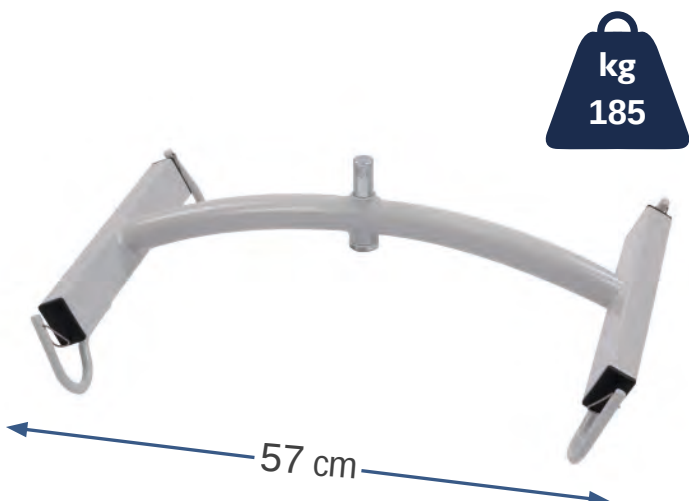

SLK 4-Punkt-Bügel Basic

Der SLK 4-Punkt-Bügel Basic ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.


Artikelnummer: 8064 (Silber)

geeignet für alle SLK Carry 185, SLK Multy Patientenlifter

Wir empfehlen den Einsatz des SLK 4-Punkt-Bügel Basic u.a. bei:

- adipösen Patienten
- schmerzempfindlichen Patienten
- Patienten die zu Streckspastiken neigen

SLK Patientenlifterbügel & Zubehör

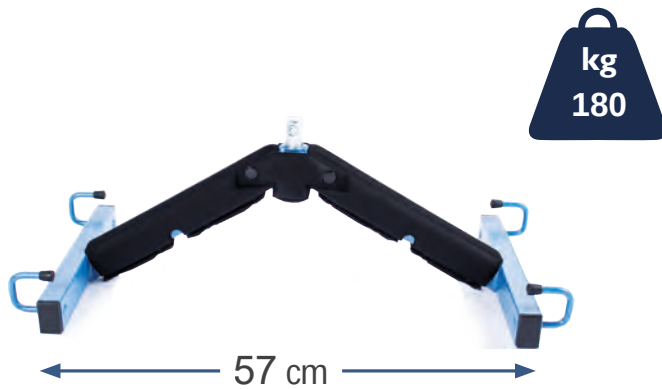

SLK Twin-Bügel

Der SLK Twin-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Der passende Bügelschutz reduziert Verletzungsrisiken.

Artikelnummer: 5181

geeignet für SLK Flyer Serie



SLK Stoßschutz für Patientenlifter Hebearm

Der SLK Stoßschutz für Patientenlifter Hebearme reduziert Verletzungsrisiken.

Artikelnummer: 5464

Geeignet für alle SLK Universallifter

Auch an Patientenlifter anderer Hersteller montierbar !

SLK Liftergurtzubehör



anklebbare SLK Kopfstütze

Die anklebbare SLK Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein SLK Twin-Bügel empfohlen.

Artikelnummer: 5118

geeignet für Gurte mit passender Vorrichtung



adaptierbare SLK Kopfstütze mit Verstärkung

Die adaptierbare SLK Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf-, Nacken- und Rückenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein SLK Twin-Bügel empfohlen.

Artikelnummer: 5138

geeignet für SLK Toilettengurt und den SLK Quick Transfer- und Toilettengurt

SLK-Verlängerungsschlaufen für SLK-Liftergurte bei Patientenliftern

Die SLK-Verlängerungsschlaufen ermöglichen Ihnen, die Gurtschlaufen von geeigneten SLK-Liftergurten zu verlängern, um diese schnell und einfach an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Sie bestehen aus extrem reißfesten Gurtband und sind einfach an den Gurtschlaufen der SLK-Liftergurte zu befestigen und für SLK-Liftergurte an Patientenliftern vorgesehen.

Durch die Verlängerung der Gurtschlaufen können folgende Ziele erreicht werden:

- Vergrößerung des Freiraumes des Patienten zum Transportbügel
- leichteres Einhängen der Gurtschlaufen am Transportbügel
- insbesondere bei der Aufnahme des Patienten vom Boden
- Verlängerung der Beinschlaufen um eine aufrechtere Sitzposition zu erreichen oder um den Winkel der Position offener zu gestalten (in der Hüfte)
- Effektive Verlängerung, nach Befestigung am SLK-Liftergurt ca. 18 cm

Artikelnummer: 5719

Norm: DIN EN ISO 10535:2007-04

Länge: 24 cm (gefaltet)


geeignet für alle SLK-Patientenliftermgurte

Lieferumfang: Verpackungseinheit (4 Stück)



SLK Multy Umrüstkits

Diese beiden Bauteile bilden das „SLK Umrüstkit Aktiv“

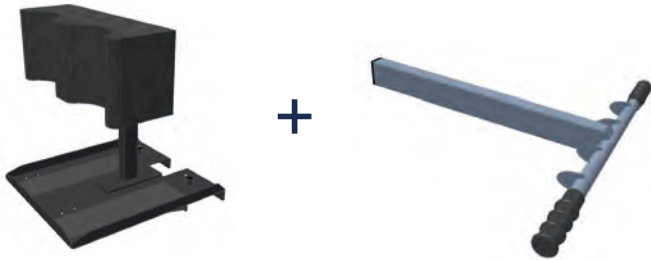

Im **SLK Multy Umrüstkit Aktiv** enthalten:


- SLK Tritt Brett mit SLK Schienbeinpolster
- SLK Aktiv Hebearm

SLK Multy Umrüstkit Aktiv

Die Basis des SLK Multy Hybridlifters ist für beide Versionen gleich. Durch die Verwendung von Anbauteilen (Umrüstkits) kann der Lifter zum Universallifter oder Aktivlifter umgerüstet werden. Dieses Umrüstkit transformiert den SLK Multy Hybridlifter (Universallifter) zum Aktivlifter.

Artikelnummer: 8011

geeignet für SLK Multy Universallifter

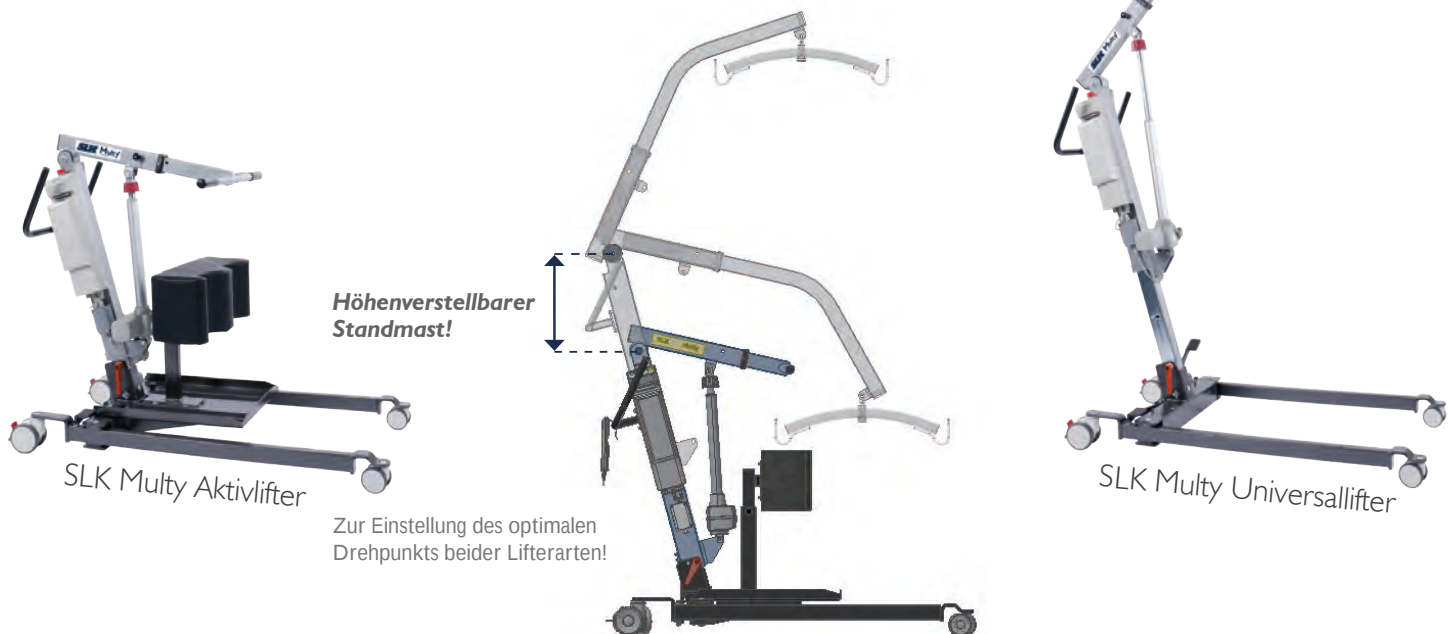

Diese beiden Bauteile bilden das „SLK Umrüstkit Universal“



Im **SLK Multy Umrüstkit Universal** enthalten:

- SLK Universal Hebearm
- SLK 2-Punkt-Bügel

SLK Multy Umrüstkit Universal

Die Basis des SLK Multy Hybridlifters ist für beide Versionen gleich. Durch die Verwendung von Anbauteilen (Umrüstkits) kann der Lifter zum Patientenlifter oder Aktivlifter umgerüstet werden. Dieses Umrüstkit transformiert den SLK Multy Hybridlifter (Aktivlifter) zum Universallifter.

Artikelnummer: 8010

geeignet für SLK Multy Aktivlifter

Gewichtetrolley

SLK Gewichtetrolley 220 kg

für den Maximal-Lasttest als Teil der Lifterwartung



ohne Last



aufgehängter Zustand mit Last

Fakten

- max. Gewicht: 220 kg
- für die Funktionsprüfung von Patientenhilfen mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang B1)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem SLK Gewichtetrolley einfach auf ihren Patientenhilfen anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

Material & Service

- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugellagert

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Lieferumfang:

- Gestell mit Rollen ohne Gewichte
- Zugdeichsel
- Schäkel
- Bolzen mit SL-Sicherung

Gewichtetrolley

SLK Gewichtetrolley 440 kg

für den Maximal-Lasttest als Teil der Lifterwartung



Fakten

- max. Gewicht: 440 kg
- für die Funktionsprüfung von Patientenliftern mit Maximallast nach EN 10535 (Anhang BI)
- Die Anschlaghöhe lässt sich bei dem SLK Gewichtetrolley einfach auf ihren Patientenlifter anpassen, dadurch wird der gesamte Hebebereich bei der Prüfung abgedeckt
- für fast alle gängigen Lifter geeignet

Material & Service

- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- bremsbare Rollen 75 ø mm, kugelgelagert

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Lieferumfang:

- 2 Gestelle mit Rollen ohne Gewichte
- Zugdeichsel
- 2 Schäkel
- 2 Hebebänder
- Bolzen mit SL-Sicherung



aufgehängter Zustand
(Test bei einem 185 kg Lifter)



mit Last

Artikel-Nr.: 5474

Deckenliftersysteme

Deckenlifter



medical solutions

Individualität ist unser Service für Sie

Wir bieten Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Full Service-Paket


- Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten
- Aufmaß der Räumlichkeiten
- individuelle Angebotserstellung
- Installation des Deckenlifters
- Wartung des Deckenlifters

Auf uns als kompetenten Partner können Sie sich verlassen

Beispiele


Installationsbeispiele

Beispiele aus einer Wohnung

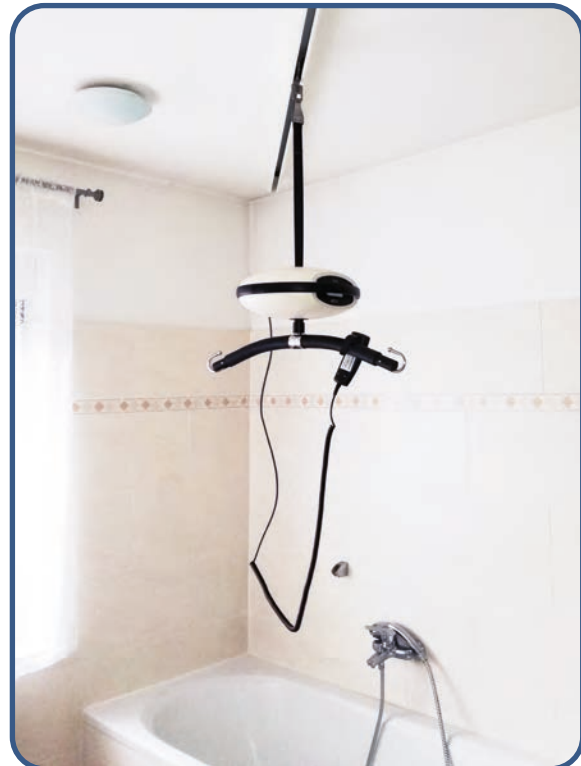

Installationsbeispiele

Beispiele aus einer Klinik

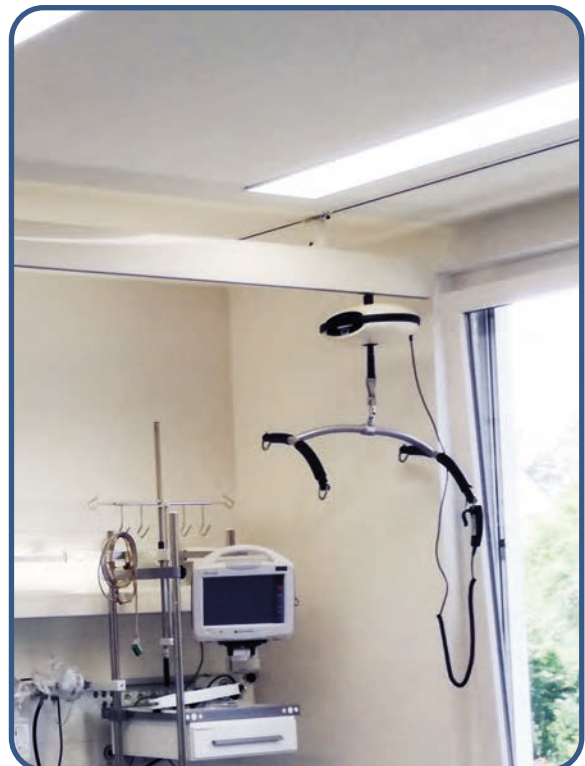

Portable

SLK Luna Portable

portable Deckenlifterkassette



SLK Walking Sling

Fakten

- max. Patientengewicht je nach Liftermodell: 200 kg oder 275 kg
- portables System zum Einsatz in mehreren Räumen
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretcher Sling

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

SLK Luna Stationär

stationäre Deckenlifterkassette



Fakten

- max. Patientengewicht je nach Liftermodell: 200 kg oder 275 kg
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- nahezu überall installierbar
- hoher Benutzerkomfort durch fixiertes Deckenmodul
- optimale Lifterlösung für den Transfer in die Badewanne

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretcher Sling


Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Room to Room

SLK Luna Room to Room

portable Deckenlifterkassette

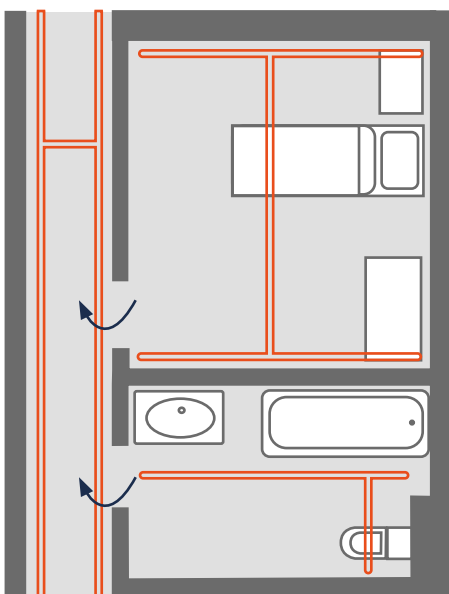

Aufriss einer Wohnung mit Deckenliftern

Fakten

- max. Patientengewicht je nach Liftermodell: 200 kg oder 275 kg
- sicherer Patiententransport von Raum zu Raum
- keine Türdurchbrüche für den Transport von Raum zu Raum nötig
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretch Sling

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

SLK Luna Twin Set

Schwerlast Deckenliftersystem

Twin Set



besonders sichere, patentierte
Gurtaufnahme



Deckenlifterschiene

Fakten

- max. Patientengewicht: 400 kg
- für schwergewichtige Personen geeignet

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretcher Sling

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

SLK Luna Mover

Motorisierter Fahrwagen



Fakten

- max. Patientengewicht je nach Liftermodell: 275 kg
- abnehmbarer Deckenlift
- nahezu überall installierbar
- moderate Laufgeschwindigkeit
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Sicherheitssystem: Handbedienug bei Defekt oder Stromausfall
- Patientenkomfort: Der SLK Luna Mover funktioniert im Tipp-Betrieb, das heißt: Er stoppt sofort, wenn die Handbedienug nicht mehr betätigt oder ganz losgelassen wird

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretcher Sling

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

SLK Mobile Flex

2-Ständer-System und 4-Ständer-System



Fakten

- max. Patientengewicht: 200 kg
- ideale Lösung für Räume in denen temporär ein Deckenliftsystem benötigt wird
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- kann ohne spezielle Werkzeuge verstellt werden, so dass das Heben in allen Situationen möglich ist
- Leichtbau-System zum einfachen Aufbau
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume

Zu verwendende Gurte:

- SLK Liftergurte (siehe Seite 61-74)
- SLK Walking Sling, SLK Silva Stretcher Sling

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien





4-Ständer-System



Komfort-Rollen

Hilfsmittel

Transfer- und Positionierungshilfen

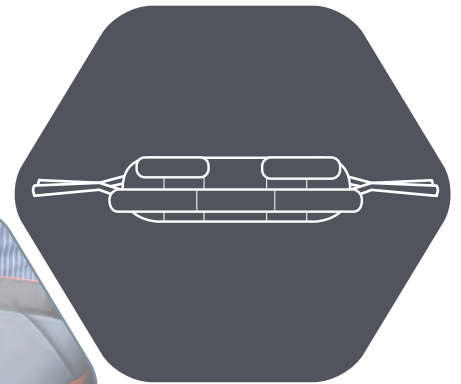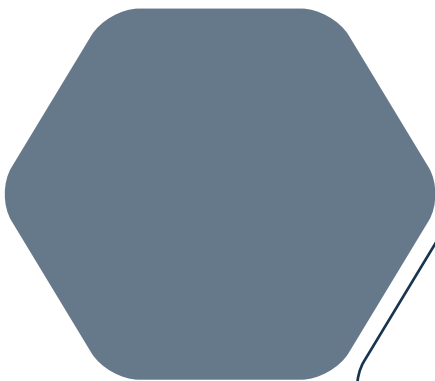

medical solutions

SLK Quick Stand

Hebegurt



Fakten

- rückschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rückschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung im Stand

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

M
5704

L
5705

XL
5706

SLK Quick Hold

Haltegurt

Hold



Fakten

- rückschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rückschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung beim Gehen
- 6 Griffschlaufen zur Unterstützung
- einfache Handhabung
- verstellbarer und automatisch zentrierender Verschluss an der Vorderseite
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S
5700

M
5701

L
5702

XL
5703

SLK Quick Slide

Gleit-/Wendelaken



Fakten

- dient zum Umlagern von normalen bis hin zu adipösen Patienten
- Stoff mit guten Gleiteigenschaften

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- silikonbeschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße & Artikelnummern

48x48
5707

80x70
5708

130x70
5709

140x110
5710

195x70
5711

Maße in cm

SLK Quick Slide mit Schlaufen

Gleit-/Wendelaken



Fakten

- dient zum Umlagern von normalen bis hin zu extrem adipösen Patienten
- Griffschlaufen zur Unterstützung
- Stoff mit guten Gleiteigenschaften

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- silikonbeschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße & Artikelnummern

130x70
5712

140x110
5713

195x70
5714

Maße in cm



SLK Easy Bauchgurt

Bauchgurt



Fakten

- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größe & Artikelnummer

one size
5722

SLK Easy Hosengurt

Hosengurt



Fakten

- optimale Unterstützung der Beckenpositionierung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials in die Oberschenkel
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Position und -Größeneinstellung
- abwaschbar / wasserabweisend
- einfache Handhabung
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größen & Artikelnummern

S
5715

M
5716

L
5717

XL
5718

SLK Easy Weste

Gurtweste



Fakten

- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material & Service

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Größe & Artikelnummer

one size
5724

Hygienecenter

Chemothermische Aufbereitung
im eigenen SLK Hygienecenter



medical solutions

Hygienecenter

Chemothermische Aufbereitung

SLK Hygienecenter



Hochwertige Antidekubitus-Systeme werden für den Wiedereinsatz beim Patienten gereinigt und desinfiziert. Die sichere und nachvollziehbare hygienische Aufbereitung ist hier eine besondere Herausforderung.

SLK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mutters von der Universität Marburg ein validiertes Aufbereitungsverfahren entwickelt, welches nicht nur sicher Krankheitserreger bekämpft, sondern gleichzeitig das Material schont, und so eine lange Lebensdauer der Hilfsmittel gewährleistet.



Die moderne Anlage zur Chemothermischen Aufbereitung nutzt eine Kombination aus Temperatur und Chemikalien, welche sich nach den Vorgaben des Robert Koch Institut richtet. Die Wirksamkeit unseres Waschverfahrens wird regelmäßig vom Hygieneinstitut Hohenstein überwacht.



Die Anlage ist konsequent in eine reine und eine unreine Seite getrennt. Stark verschmutzte Bestandteile (beispielsweise Bezüge und Transporttaschen) werden in speziellen Waschmaschinen gereinigt, während Luftkammern und Unterbauten in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsstraße aufbereitet werden. Dieses Verfahren gewährleistet minimale mechanische Belastung bei maximaler hygienischer Wirksamkeit.




Nach erfolgter Desinfektion gelangen die Systeme in die reine Seite. Hier werden Funktionskontrollen und messtechnische Prüfungen durchgeführt.

Abschließend werden die Systeme in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und zusammen mit einem Hygienezertifikat in neuen Kartonagen zum Kunden geschickt. Bei weiteren Fragen zur Aufbereitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Notizen

DIE RICHTIGE VERSORGUNG

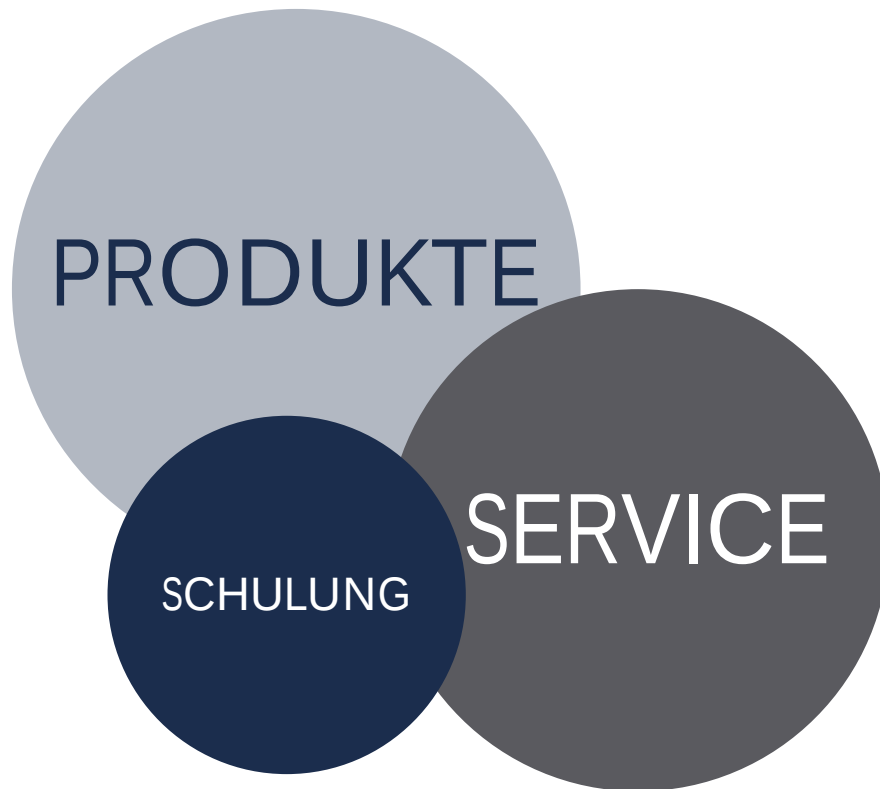

Produkte

- Lagerungssysteme zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- Systeme zur Apparativen Intermittierenden Kompressionstherapie mit entsprechenden Mehrkammermanschetten für verschiedene Anwendungsgebiete
- Patientenlifter für Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Schulung

- Produktschulungen zu unseren SLK®-Systemen
- Schulungen zum Thema Dekubitus (Ursachen, Therapieformen usw.)
- Apparative Intermittierende Kompressionstherapie (Produkt- und Anwenderschulung für SLK®-Produkte)
- Patientenlifter für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich

Service

- schnelle Lieferung von Produkten
- sichere und zeitnahe chemothermische Aufbereitung und Prüfung von Antidekubitussystemen nach validiertem Verfahren
- regelmäßige Kontrolle der Aufbereitung durch ein international anerkanntes Hygieneinstitut
- aufbereitete Systeme werden in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und in neuen Kartons verschickt
- Wartung und Reparatur von SLK®-Produkten
- Aufbereitung mit Wartung und Ableitstromprüfung gem. DIN EN 62353
- Reparatur von Fremdsystemen auf Anfrage
- hohe Sicherheit beim Wiedereinsatz